

CARDIOVIT AT-102 G2

Einfach, smart und hochmodern



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-102 G2

Die neue EKG-Generation: CARDIOVIT AT-102 G2

- ⚡ Beste Signalqualität und diagnostische Algorithmen für Erwachsene und Kinder
- ⚡ Schnelle bidirektionale Wi-Fi-Kommunikation mit KIS/EPA
- ⚡ Spirometrie und Basis-Belastungs-EKGs optional verfügbar



SpiroScout SP plus Spirometrieaufzeichnungen mit dem CARDIOVIT AT-102 G2

MODERNSTE TECHNIK UND VERNETZUNG

Das CARDIOVIT AT-102 G2 bietet eine 8"-Farbanzeige mit Touch-Funktions-tasten. Die versiegelte alphanumerische Tastatur ist leicht zu reinigen und dadurch perfekt geeignet für die tägliche klinische Routine. Die intelligente Batterietechnologie ermöglicht die Aufzeichnung von EKGs über mehr als 8 Stunden.

Mit bidirektionaler Kommunikation können Daten ganz einfach von einem EPA-/KIS-System abgefragt und Berichte in den Formaten PDF, DICOM und HL7 rasch übertragen werden. Dank der Standard-Wi-Fi- und LAN-Konnektivität, der EKG-Vorschau auf dem Bildschirm und dem grossen Speicher unterstützt das Gerät papierlose Arbeitsabläufe und hilft, Kosten zu sparen. Individualisierbare Ausschriebe sind auf dem integrierten, hochauflösenden A4-Thermodrucker möglich.

HÖCHSTE EFFIZIENZ IN JEDEM ABLAUF

Noch nie war die EKG-Aufzeichnung einfacher und schneller: Geben Sie die Patientendaten ein oder laden Sie sie mittels PDQ oder Arbeitsliste herunter, zeichnen Sie das EKG auf und speichern, drucken und übertragen Sie die Daten innert 20 Sekunden und mit nur einer Taste.




IN EINFACHEN SCHRITTEN: 1-2-3

- 1: Patientendaten eingeben oder herunterladen
- 2: Signalqualität prüfen und EKG aufzeichnen
- 3: EKG vor dem Speichern, Exportieren oder Drucken überprüfen

DIAGNOSTISCHE TOOLS DES CARDIOVIT AT-102 G2

- ⚡ Ruhe-EKGs mit dem SCHILLER-Analyseprogramm ETM sowie ETM Sport für die automatische Interpretation von Sportlern.
- ⚡ Ruhe-Rhythmus-Aufzeichnung während bis zu 20 Minuten.
- ⚡ Optimale Signalqualität für EKGs von Kindern.
- ⚡ Basis-Belastungs-EKG (optional) mit einer grossen Auswahl an Protokollen für Laufband und Ergometer.
- ⚡ Der CCAA-Algorithmus von SCHILLER (Culprit Coronary Artery Algorithm) lokalisiert den Verschluss in der Koronararterie und bestimmt somit die Grösse des gefährdeten Gebietes.

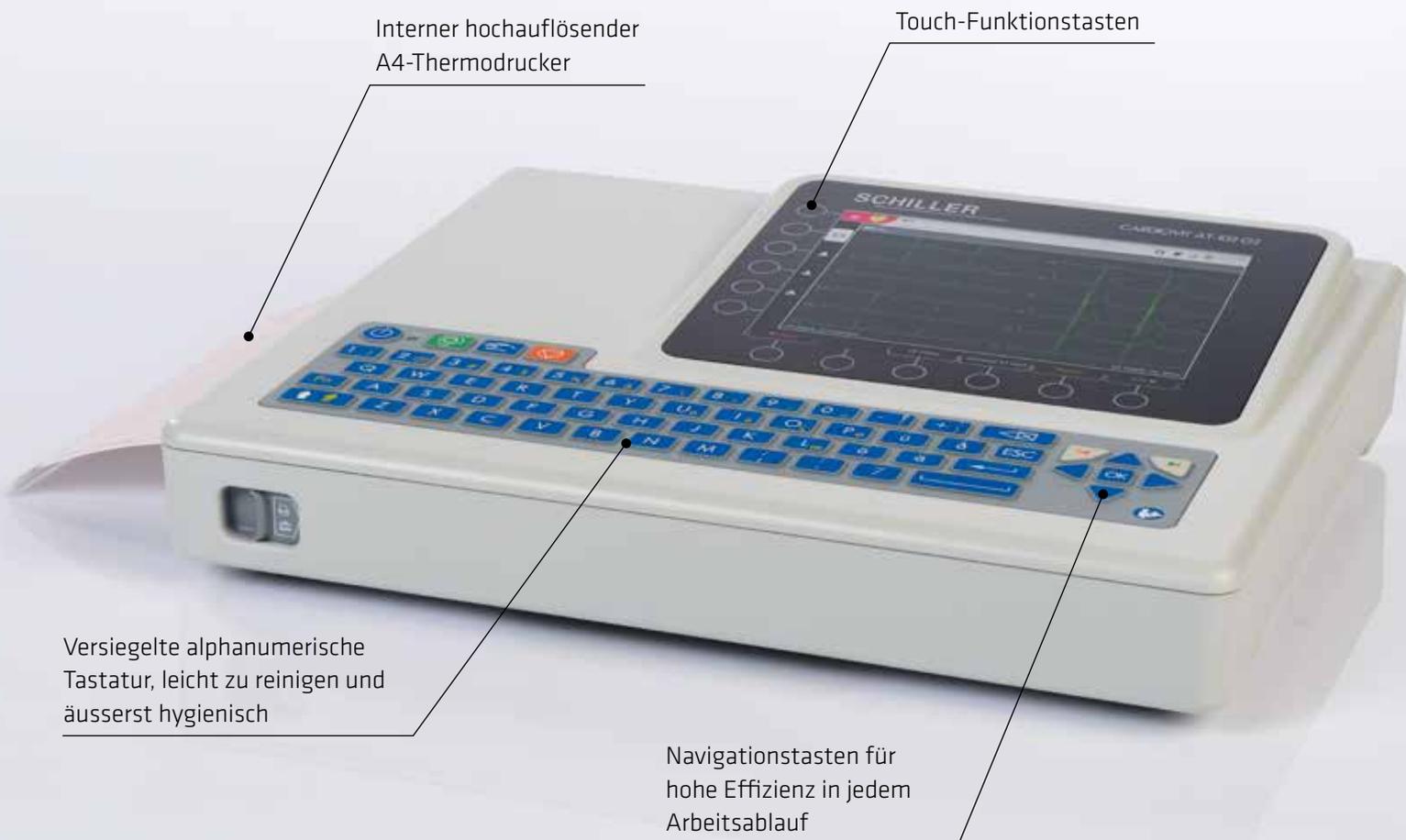

Das CARDIOVIT AT-102 G2 ist auch mit Gerätewagen verfügbar.

SPIROMETRIE MIT DEM CARDIOVIT AT-102 G2

Mit dem SpiroScout SP plus wird das CARDIOVIT AT-102 G2 auch ein Spirometer. Dank der Ultraschall-Technologie von GANSHORN sind Spirometrie-Aufzeichnungen äusserst präzise. Zudem benötigt der Sensor weder Wartung noch Kalibrierung. Die Einweg-ScoutTubes garantieren maximale Hygiene und Patientensicherheit. ScoutTubes sind CO₂-neutral.

Die Spirometrie-Option umfasst FVC, VC und MVV, eine grosse Auswahl an Referenz-Normen, Prä- und Post-Tests sowie die Interpretation von FVC-Ergebnissen.

Das Gerät zeigt die Qualität des Manövers während und nach jedem Test an.

Die umfangreichen Spirometrie-Ergebnisse können ausgedruckt und an ein EPA-/KIS-System übertragen werden.



Für Messungen mit Kindern ist eine Motivationsansicht verfügbar.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydani-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Bromborough, Wirral,
 Merseyside, CH62 3RJ
 Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

