

CARDIOVIT AT-102 G2

Simple, intelligent et technologie de pointe



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-102 G2

ECG de nouvelle génération : CARDIOVIT AT-102 G2

- ⚡ Qualité du signal supérieure et algorithmes de diagnostic pour enfants et adultes
- ⚡ Communication Wi-Fi rapide et bidirectionnelle avec SIH/DME
- ⚡ Spirométrie et ECG d'exercice de base disponibles en option



SpiroScout SP plus, pour les tests de spirométrie avec le CARDIOVIT AT-102 G2

CONNECTIVITÉ ET TECHNOLOGIE DE POINTE

Le CARDIOVIT AT-102 G2 est équipé d'un écran couleur 8" et de touches de fonction tactiles. Grâce à son clavier alphanumérique étanche qui permet un nettoyage aisé, cet appareil convient parfaitement aux routines cliniques quotidiennes. La technologie de batterie intelligente garantit plus de 8 heures d'enregistrement ECG.

La communication bidirectionnelle permet d'accéder facilement aux données et de transférer rapidement tous les rapports aux systèmes SIH/DME au format PDF, DICOM ou HL7. La connectivité wi-fi et LAN combinée à l'affichage ECG à l'écran et une grande capacité de mémoire permettent d'effectuer un flux de travail sans papier et de réaliser des économies sur les coûts. Il est possible d'effectuer des impressions personnalisables en format A4 sur l'imprimante thermique à haute résolution.

EFFICACITÉ SUPÉRIEURE QUEL QUE SOIT LE FLUX DE TRAVAIL

L'obtention d'un ECG désormais plus facile et rapide que jamais : saisir ou télécharger les données patient à l'aide de la liste de travail ou de la requête de données patient (PDQ), obtenir un ECG, sauvegarder, imprimer et transférer les données en vingt secondes à l'aide d'une seule touche de navigation.




ÉTAPES 1-2-3 SIMPLES

- 1: Saisir ou télécharger les données patient.
- 2: Vérifier la qualité du signal et effectuer l'ECG.
- 3: Examiner l'ECG avant de l'enregistrer, l'exporter ou l'imprimer.

LES OUTILS DE DIAGNOSTIC DU CARDIOVIT AT-102 G2

- ⚡ ECG de repos avec le programme d'analyse ETM de SCHILLER ainsi qu'ETM Sport, le programme d'interprétation automatique pour les athlètes.
- ⚡ Enregistrement du rythme de repos jusqu'à 20 minutes.
- ⚡ Qualité de signal optimal pour ECG pédiatriques.
- ⚡ ECG d'effort de base (optionnel) avec un vaste de protocoles pour tapis roulants et ergomètres.
- ⚡ Le Culprit Coronary Artery Algorithm (CCAA, en option) de SCHILLER permet de localiser le siège de l'obstruction de l'artère coronaire et de déterminer la taille de la zone cardiaque à risque.

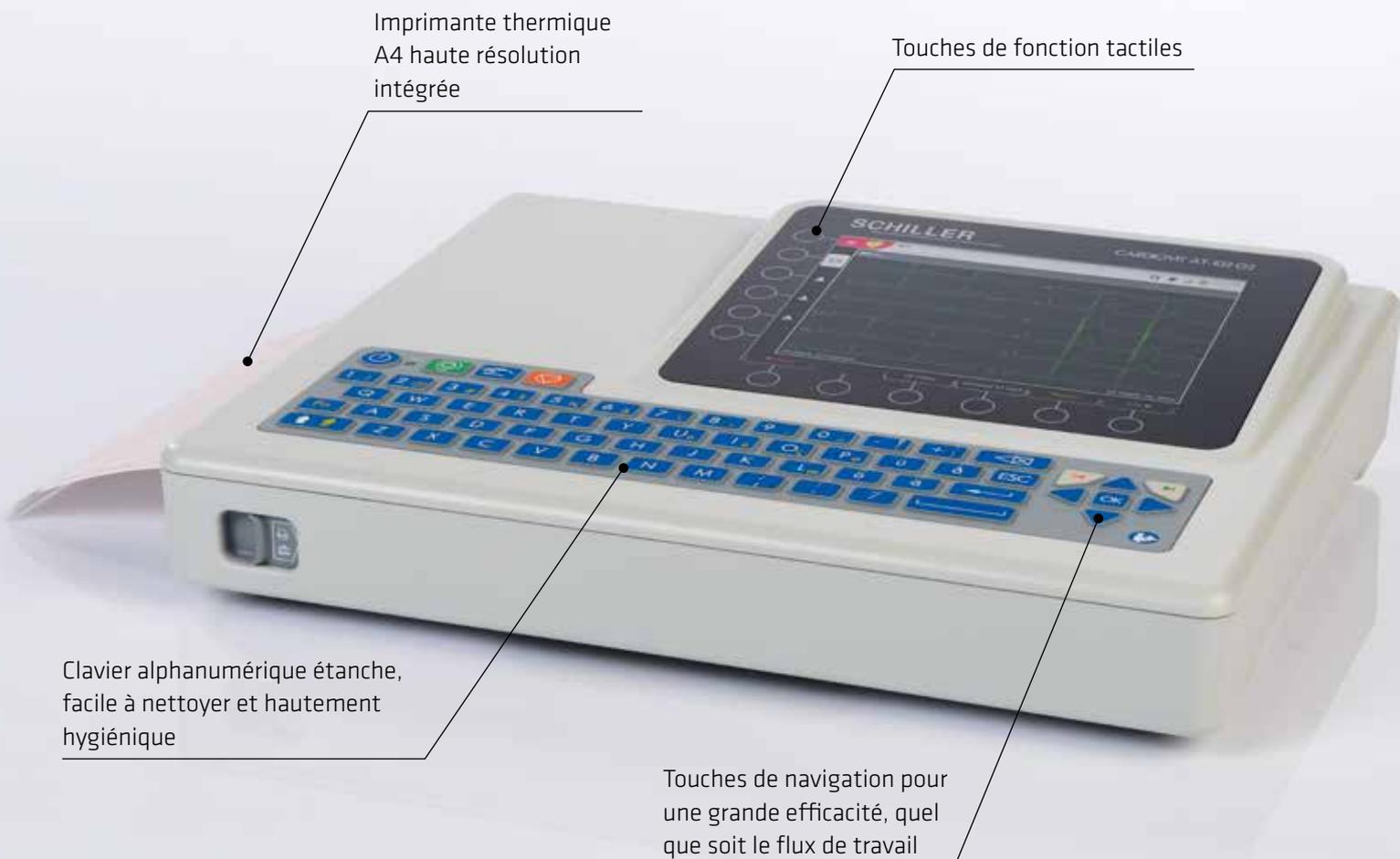

Imprimante thermique
A4 haute résolution
intégrée

Touches de fonction tactiles

Clavier alphanumérique étanche,
facile à nettoyer et hautement
hygiénique

Touches de navigation pour
une grande efficacité, quel
que soit le flux de travail

Le CARDIOVIT AT-102 G2 est
également disponible avec un chariot.

AJOUTER LA SPIROMÉTRIE À VOTRE CARDIOVIT AT-102 G2

Avec le SpiroScout SP plus, le CARDIOVIT AT-102 G2 devient également un spiromètre. Grâce à la technologie ultrasonique de GANSHORN, les enregistrements de spirométrie sont extrêmement précis et le capteur ne requiert aucun entretien ni étalonnage. Les ScoutTubes jetables assurent une hygiène maximale et la sécurité des patients. Les ScoutTubes sont neutres en CO₂.

L'option spirométrie propose des mesures CVF, CVL et VMM avec un large choix de normes de référence, de tests préalables et postérieurs ainsi que l'interprétation des résultats CVF.

L'appareil fournit un feedback sur la qualité de la procédure pendant le test et après chaque essai.

Les résultats complets de spirométrie peuvent être imprimés sur du papier thermique et exportés vers des systèmes SIH/DME.



Un écran de motivation est inclus pour les tests avec des enfants.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.

