


CARDIOVIT AT-102 G2

Semplice, intelligente e all'avanguardia

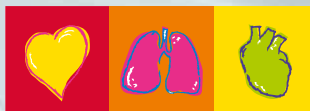

SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-102 G2

La nuova generazione ECG:
CARDIOVIT AT-102 G2

- Migliore qualità del segnale e algoritmi diagnostici per pazienti adulti e pediatrici
- Comunicazione Wi-Fi bidirezionale veloce con HIS/EMR
- Spirometria e ECG di base da sforzo disponibile opzionalmente



SpiroScout SP plus, per test di spirometria con il CARDIOVIT AT-102 G2

TECNOLOGIA E CONNETTIVITÀ ALL'AVANGUARDIA

Il CARDIOVIT AT-102 G2 è dotato di un display a colori di 8" con tasti funzione touch. La sua tastiera alfanumerica sigillata assicura una facile pulizia, rendendola ideale alla routine clinica quotidiana. La tecnologia intelligente della batteria garantisce più di 8 ore di registrazione ECG.

La comunicazione bidirezionale consente il facile accesso ai dati e la rapida trasmissione dei referti ai sistemi EMR/HIS nel formato PDF, DICOM o HL7. La connettività Wi-Fi e LAN standard, unitamente alla verifica degli ECG su schermo e alla grande capacità di memoria, consente di non utilizzare la carta e di ridurre i costi. Sono disponibili stampe personalizzabili sulla stampante termica interna A4 ad alta risoluzione.

ELEVATA EFFICIENZA IN OGNI FLUSSO DI LAVORO

L'acquisizione di ECG non è mai stata così facile e veloce: immettere o scaricare i dati del paziente con PDQ o lista di lavoro, acquisizione dell'ECG, salvataggio, stampa e trasmissione dei dati entro venti secondi mediante un solo tasto di navigazione.



FLUSSO DI LAVORO 1-2-3

- 1: Immettere o scaricare i dati paziente
- 2: Controllare la qualità del segnale ed eseguire l'ECG
- 3: Verificare l'ECG prima di memorizzare, esportare o stampare

STRUMENTI DIAGNOSTICI DEL CARDIOVIT AT-102 G2

- ECG a riposo con programma di analisi ECG SCHILLER ETM ed ETM Sport, l'interpretazione automatica per gli atleti.
- Registrazione del ritmo a riposo fino a 20 minuti.
- Qualità del segnale ottimale per ECG pediatrici.
- ECG di base da sforzo (opzionale) con un'ampia selezione di protocolli per treadmill ed ergometri.
- Il Culprit Coronary Artery Algorithm (CCAA, opzionale) di SCHILLER localizza la sede dell'ostruzione nell'arteria coronarica e dunque le dimensioni dell'area cardiaca a rischio.



Il CARDIOVIT AT-102 G2 è disponibile anche con carrello.

SPIROMETRIA CON IL CARDIOVIT AT-102 G2

Con lo SpiroScout SP plus, il CARDIOVIT AT-102 G2 diventa anche uno spirometro. Grazie alla tecnologia a ultrasuoni GANSHORN, le registrazioni sono altamente accurate ed il sensore non necessita di manutenzione o calibrazione. Gli ScoutTube monouso garantiscono massima igiene e sicurezza per il paziente. Gli ScoutTube hanno un impatto neutro in termini di emissioni di CO₂.

L'opzione di spirometria consente FVC, SVC e MVV con un'ampia selezione di standard di riferimento, pre e post test nonché l'interpretazione dei risultati FVC.

Il dispositivo fornisce un feedback sulla qualità della procedura sia durante che dopo ogni test.

I risultati di spirometria completi possono essere stampati su carta termica ed esportati ai sistemi EMR/HIS.



Uno schermo di incentivazione è incluso per i test con bambini.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.

