

CARDIOVIT AT-180


Effizienz, Leistung und Cybersicherheit



CARDIOVIT AT-180

Renommierte SCHILLER-Technologie im Spitzen-Elektrokardiographen CARDIOVIT AT-180:

- Höchste Effizienz in jeder Umgebung – EKG-Aufzeichnung mit nur drei Klicks
- Cybersicherheit
- Hochentwickelte klinische Werkzeuge

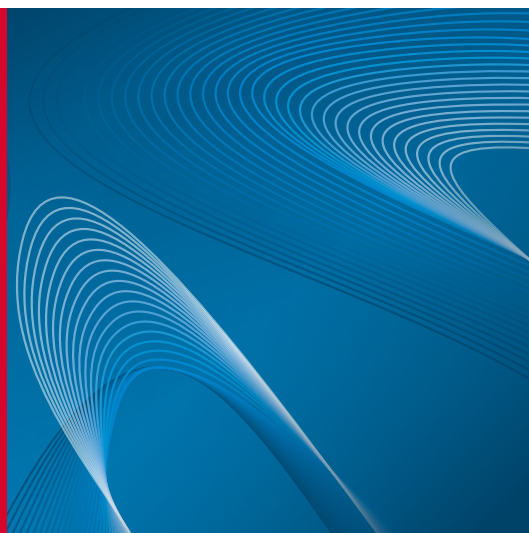

Mit ECG Framer 10-sekündiges Ruhe-EKG aus Ruhe-Rhythmus erstellen (Rhythmusdauer bis 20 Minuten)

HÖCHSTE EFFIZIENZ IN JEDER UMGEBUNG

Sei es in der Notfallaufnahme oder der Kardiologie: Effizienz und Qualität sind unerlässlich. Noch nie war die EKG-Aufzeichnung schneller. Geben Sie die Patientendaten ein oder laden Sie sie mit PDQ oder Arbeitsliste herunter, zeichnen Sie das EKG auf und drucken oder übertragen Sie es mit nur drei Klicks.



IN EINFACHEN SCHRITTEN: 1-2-3

1. Patientendaten eingeben oder herunterladen. Dank Barcode und PDQ keine Fehleingaben.
2. Vor der Aufzeichnung Signalqualität prüfen und vertauschte Elektroden erkennen.
3. EKG überprüfen, Messungen bearbeiten und vor dem Export oder Ausdruck den Bericht erstellen.

ECG FRAMER: Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie es, EKGs wiederholen zu müssen. Zeichnen Sie ein oder mehrere EKGs höchster Qualität auf und beobachten Sie so den Patienten während 20 Minuten. Vermessungen und die Interpretation werden automatisch für alle EKGs generiert. Ruhe Rhythmus sowie alle EKGs können an SEMA (Datenverwaltungssystem von SCHILLER) übertragen werden.

CYBERSICHERHEIT

Bidirektionale Kommunikation mit EPA- und KIS-Systemen ist für alle Aufzeichnungstypen verfügbar. Datenintegrität und -sicherheit werden dank verbesserten Sicherheitseigenschaften unterstützt:

- konfigurierbare Zugriffssteuerung mit Benutzernamen, Passwort und Zugriffsrechten zum Schutz vor nicht autorisierten Zugriffen
- Wi-Fi-Protokolle mit zertifikatsbasierter Authentifizierung – für einen sicheren Zugriff auf die IT-Infrastruktur eines Krankenhauses
- Verschlüsselte Datenübertragung

HOCHENTWICKELTE KLINISCHE WERKZEUGE

16-KANAL-EKG: Die 16-Kanal-Ruhe-EKG-Analyse (mittels 14-adrigem Patienten-kabel) bietet dank rechter Brust- und Rückenelektrode erweiterte Ergebnisse für Brustschmerzen bei Erwachsenen.

SAECG: Mittels Analyse von ventrikulären Spätpotentialen können Patienten mit vorgängigem Myokardinfarkt ermittelt werden, welche anfällig sind auf ventrikuläre Tachyarrhythmien und möglichen plötzlichen Herztod.

VEKTOR-EKG: 3D-Ansicht der kardialen elektrischen Aktivität sowie umfassende Diagnose der Herzvorder- und -hinterwand.

ETM SPORT: Die erste automatisierte EKG-Interpretation für Sportler-Hezen, basierend auf den neusten Seattle-Kriterien.

Assistent zum Anschliessen der Elektroden (Dreh- und Zoom-Funktion), mit farbcodierten Kurven und anatomischem Modell

18,5"-Touchscreen zur EKG-Überprüfung


Hochauflösender A4-Thermodrucker

Robuster Gerätewagen mit Leichtlaufrollen und Behälter für Zubehör

Erkennung vertauschter Elektroden vor Start der EKG-Aufzeichnung

Neue, intuitive Benutzeroberfläche

Äusserst hygienische Tastatur mit strapazierfähiger, austauschbarer Abdeckung, die vor Staub, Dreck und Flüssigkeiten schützt

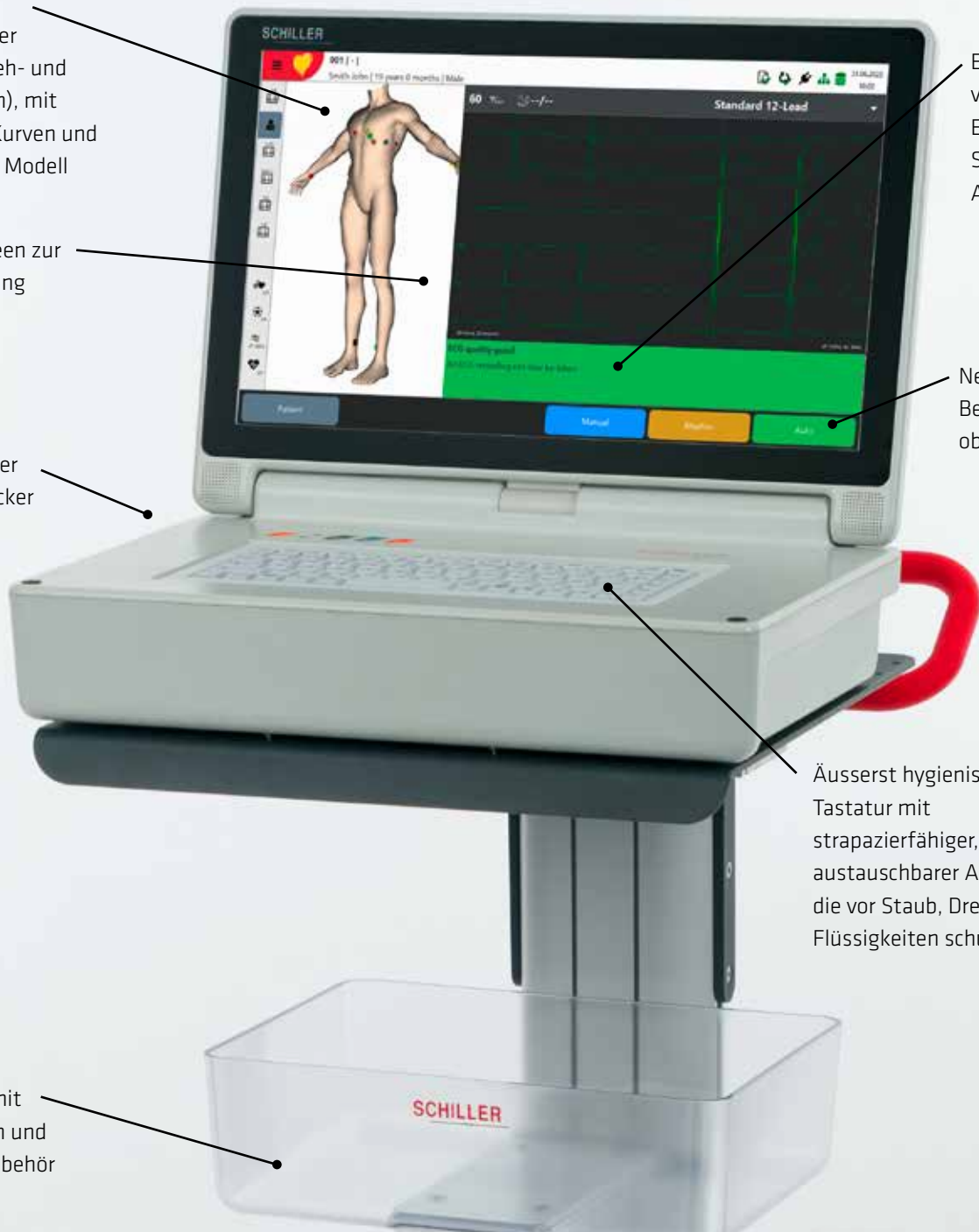

BELASTUNGS-EKG

Hochentwickeltes Belastungs-Programm mit grosser Flexibilität bei der Protokolldefinition für Fahrräder und Laufbänder. Drucken Sie den massgeschneiderten Bericht auf dem hochauflösenden Thermodrucker aus. In der Fulldisclosure-Anzeige kann jeder Schlag und jede Arrhythmie überprüft und neu analysiert werden, was die Diagnosesicherheit erhöht.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

