

CARDIOVIT AT-180

Efficacité, performances, cybersécurité

SCHILLER




001 | - |

Smith John | 19 years 0 months | Male



LP 150Hz


Patient

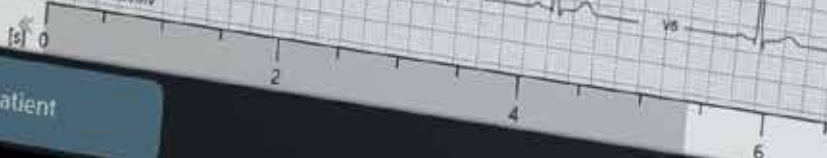

CARDIOVIT AT-180

La fameuse technologie SCHILLER dans l'électrocardiographe de pointe CARDIOVIT AT-180:

- ⚡ Haute efficacité dans tous les environnements – obtention d'ECG en seulement trois clics
- ⚡ Cybersécurité
- ⚡ Outils cliniques avancés

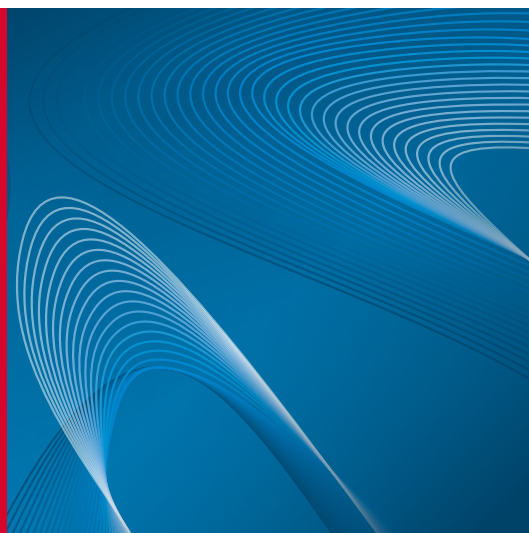

Créez un ECG de repos de 10 secondes à partir d'un enregistrement de rythme de repos allant jusqu'à 20 minutes avec ECG Framer

HAUTE EFFICACITÉ DANS TOUS LES ENVIRONNEMENTS

Du service des urgences à la clinique de cardiologie, l'efficacité et la qualité sont essentielles. L'obtention d'ECG n'a jamais été aussi rapide: saisissez ou téléchargez les données patient avec PDQ ou une liste de travail, obtenez l'ECG, imprimez et transmettez en seulement trois clics.



ÉTAPES 1-2-3 SIMPLES

1. Saisie ou téléchargement des données patient. Aucune erreur avec le code-barres et la fonction PDQ.
2. Vérifier la qualité du signal et l'inversion éventuelle de la dérivation avant l'acquisition.
3. Vérifier l'ECG, éditer les mesures et dresser le rapport avant exportation ou impression.

ECG FRAMER: Gagnez du temps et évitez de répéter les ECG. Laissez le patient se détendre et prenez l'ECG de meilleure qualité ou plusieurs ECG pour l'observation du patient sur un laps de temps de 20 minutes. Les mesures et l'interprétation sont générées automatiquement pour tous les ECG. Les enregistrements continus d'ECG sur 12 dérivations et tous les ECG capturés sont stockés localement et transmis à SEMA, le logiciel de gestion des données de SCHILLER.

CYBERSÉCURITÉ

La communication bidirectionnelle avec les systèmes DME et SIH est disponible pour tous les types d'enregistrement. L'intégrité et la protection des données sont prises en charge avec des fonctionnalités de sécurité améliorées:

- ⚡ Contrôle d'accès configurable avec nom d'utilisateur, mot de passe et droits pour empêcher tout accès non autorisé
- ⚡ Protocoles Wi-Fi avec authentification basée sur des certificats pour

garantir un accès sécurisé à l'infrastructure informatique de l'hôpital

- ⚡ Données cryptées pendant la transmission

OUTILS CLINIQUES AVANCÉS

ECG 16 DÉRIVATIONS: L'analyse ECG au repos sur 16 dérivations (recourant à un câble de patient à 14 brins) tire parti d'une électrode thoracique et dorsale droite pour fournir des résultats étendus pour les douleurs thoraciques chez l'adulte.

ECG MOYENNÉ: L'analyse des potentiels ventriculaires tardifs dans l'ECG identifie les patients post-IM prédisposés à des tachyarythmies ventriculaires et à un éventuel décès cardiaque soudain.

ECG VECTORIEL: Affichage tridimensionnel de l'activité électrique cardiaque et diagnostic complet des parois frontales et postérieures.

Assistant de mise en place des électrodes avec modèle anatomique (fonction de rotation et de zoom avant) et courbes (codes couleur)

Écran tactile de 18,5" pour une vérification complète de l'ECC


Imprimante thermique A4 haute résolution

Roues coulissantes lisses et chariot robuste avec bac pour ranger les accessoires

Détection d'inversion de dérivation avant obtention de l'ECC

Nouvelle interface utilisateur SCHILLER intuitive

Clavier hautement hygiénique avec un couvercle durable et amovible qui protège de la poussière, de la saleté et des liquides

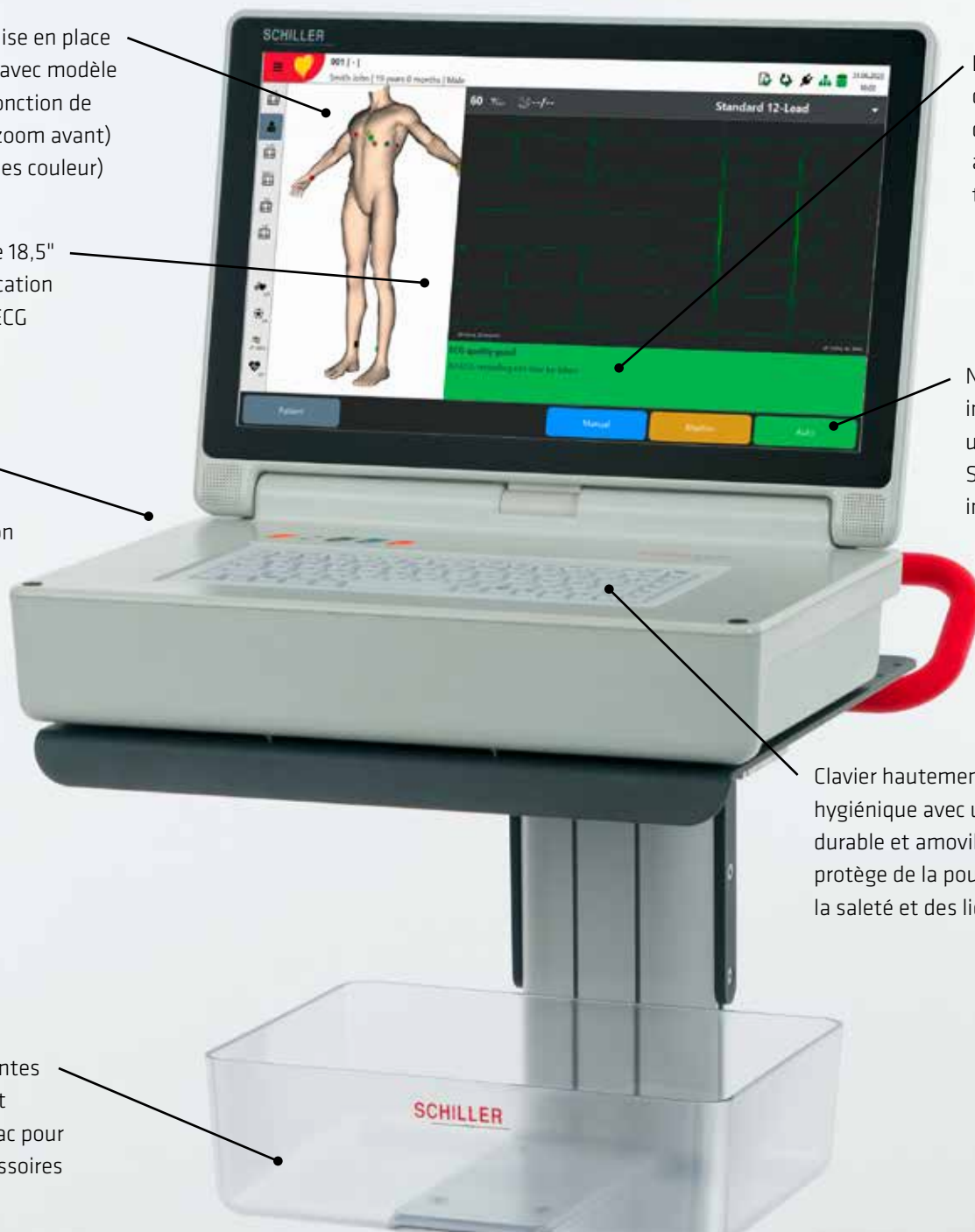

ETM SPORT: Le premier module d'interprétation d'ECC automatisé conçu pour les athlètes, basé sur les derniers critères de Seattle.

ECG D'EFFORT

Programme d'effort avancé d'une grande flexibilité dans la définition du protocole pour les ergomètres et les tapis roulants. Imprimez votre rapport personnalisé avec l'imprimante thermique haute résolution. Les données d'affichage complet permettent de vérifier et de réanalyser chaque battement et arythmie pour une confiance clinique améliorée.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.

