



# CARDIOVIT CS-104

Das integrierte System für Belastungstests





**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# CARDIOVIT CS-104

Alles was Sie brauchen in  
einem System:

- drahtlose EKG-Aufzeichnung
- optionale Ultraschall-  
Spirometrie mit SpiroScout  
SP plus
- integrierte Workstation für  
die Überprüfung der Daten

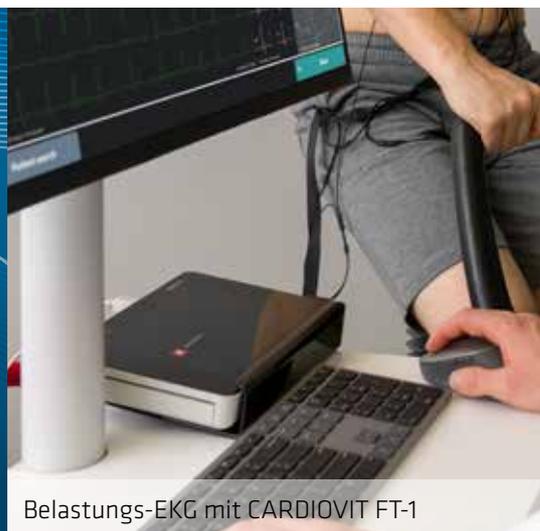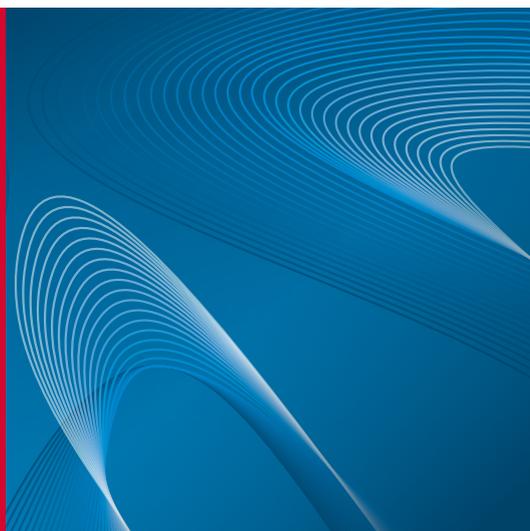

Belastungs-EKG mit CARDIOVIT FT-1

## ALLE FUNKTIONEN IN EINEM EINZIGEN SYSTEM

- Belastungstest mit optionaler  
Arrhythmie-Erkennung
- pharmakologischer Belastungstest
- Ruhe-EKG mit dem EKG-Analyse-  
programm ETM sowie ETM Sport für  
die automatische Interpretation bei  
Sportlern
- Ruhe-Rhythmus-Aufzeichnung von  
bis zu 60 Minuten mit optionaler  
Arrhythmie-Erkennung
- ECG Framer: 10-sekündiges Ruhe-  
EKG anhand des Ruhe-Rhythmus
- Vektor-EKG (optional)
- Spirometrie, basierend auf der  
Ultraschalltechnologie von  
SpiroScout SP plus (optional)



## WORKSTATION ZUR DATENÜBERPRÜFUNG

CARDIOVIT CS-104 bietet umfassende Überprüfungs- und Bearbeitungsfunktionen sowie Funktionen zum Erstellen des Schlussberichts. Beides kann eingesehen und überprüft werden, sowohl lokal generierte Daten als auch Aufzeichnungen von anderen SCHILLER Ruhe-EKG-Geräten oder Belastungssystemen, die mit dem SCHILLER Server verbunden sind. Für die bidirektionale Vernetzung (einschliesslich Arbeitsliste und Patientendatenabfrage) mit EPA-, KIS- und PACS-Systeme wurde ebenfalls gesorgt.

Ultraschallspirometer  
SpiroScout SP plus

## DRAHTLOSES EKG

Das drahtlose Modul MS-12 BT ist optional erhältlich und vereinfacht die EKG-Aufzeichnung, da der Benutzer sich frei bewegen kann und Bewegungsartefakte minimiert werden. Der Patient kann sich beim Fahrradfahren oder beim Laufen auf dem Laufband frei bewegen, ohne dass dieses kompakte und leichte Gerät (125 g) im Weg ist.

## SCHWEIZER QUALITÄT - EINSATZBEREIT

Das System besteht aus einem PC, einem Bildschirm, einem Gerätewagen und einem drahtlosen (MS-12 BT) oder drahtgebundenen (MS-12 USB) Aufzeichnungsmodul. Optional kann CARDIOVIT FT-1 für die EKG-Aufzeichnung verwendet werden. Alles ist von SCHILLER vorinstalliert und getestet und bereit für den klinischen Einsatz.

CARDIOVIT CS-104 ist auch als PC-Software für Ruhe-EKGs mit optionalen Add-ons für Belastungstests und Spirometrie erhältlich.

BP-200 plus (optional)  
zur Blutdruck- und  
SpO2-Messung während  
eines Belastungstests

Drei Aufzeichnungs-  
module zur Auswahl:

- ❖ MS-12 BT: klein und leistungsfähig – das drahtlose EKG-Aufzeichnungsmodul mit Anzeige der Signalqualität und mit dem Assistenten zum Anschliessen der Elektroden
- ❖ MS-12 USB: benutzerfreundliches Plug-and-Play-Modul zur EKG-Aufzeichnung
- ❖ CARDIOVIT FT-1: Dieses eigenständige Ruhe-EKG-Gerät von SCHILLER kann auch als ein Aufzeichnungsmodul verwendet werden.

Leichtgängige Rollen  
für reibungsloses  
Manövrieren



Intuitive und anpassbare  
Benutzeroberfläche:

- ❖ verschiedene EKG-Ansichten wählbar
- ❖ Arbeitsabläufe individuell anpassbar
- ❖ Suchfilter und Berichtsentwürfe definierbar

Arbeitshöhe auf  
88 bis 122 cm  
einstellbar (mit  
Federmechanismus)

SpiroScout SP plus  
(optional): Spirometrie als Ergänzung  
zu Ihrem System für  
Belastungstests

Transparenter  
Transportbehälter  
für medizinisches  
Zubehör



**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
info@schiller.fr  
www.schiller-medical.fr



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99 0  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai – 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Switzerland**  
SCHILLER Schweiz AG  
CH-8912 Obfelden  
Phone +41 44 744 30 00  
sales@schiller-schweiz.ch  
www.schiller-schweiz.ch



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology  
Co., Ltd.  
100102 Beijing, China  
Phone +86 10 84565453  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKIYE  
Okmeydani-Sisli – Istanbul  
Phone +90 212 210 8681  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
info@schiller.hr  
www.schiller.hr



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
119049 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**United Kingdom**  
SCHILLER UK Ltd.  
Bromborough, Wirral,  
Merseyside, CH62 3RJ  
Phone +44 1333 312150  
sales@schilleruk.com  
service@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

