



CARDIOVIT CS-104

El sistema de pruebas de esfuerzo integrado




SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT CS-104

Todo lo que se necesita, en un único sistema:

- Adquisición de ECG por vía inalámbrica
- Espirometría por ultrasonidos opcional con SpiroScout SP plus
- Estación de trabajo integrada para el análisis de datos

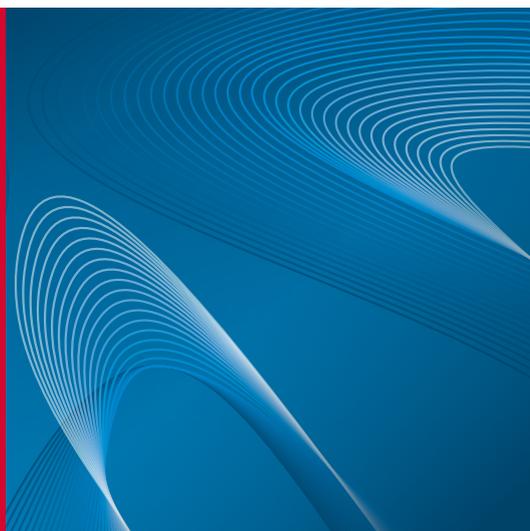

ECG de esfuerzo durante el ejercicio con CARDIOVIT FT-1

TODAS LAS POSIBILIDADES EN UN ÚNICO SISTEMA

- Prueba de esfuerzo durante el ejercicio con detección de arritmias opcional
- Prueba de esfuerzo farmacológico
- ECG reposo con el programa de análisis de ECG de SCHILLER ETM así como ETM Sport, la interpretación automática para deportistas
- Registro del ritmo reposo de hasta 60 minutos con detección de arritmias opcional
- ECG Framer: ECG reposo de 10 segundos a partir de un registro de ritmo reposo

- ECG vector (opcional)
- Espirometría basada en la tecnología de ultrasonidos del SpiroScout SP plus (opcional)

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

El sistema CARDIOVIT CS-104 ofrece amplias funciones de revisión y edición, así como herramientas para la preparación del informe final. Es posible examinar tanto los datos adquiridos localmente como los registros de otros equipos de SCHILLER conectados a SCHILLER Server, por ejemplo, sistemas de prueba de esfuerzo durante el ejercicio y equipos de ECG reposo. Se ofrece conectividad bidireccional (con lista de trabajo y PDQ) a los sistemas EMR, HIS y PACS.

ECG INALÁMBRICO

El módulo inalámbrico opcional MS-12 BT simplifica enormemente la adquisición del ECG, ya que permite al usuario manejarlo libremente en cualquier entorno y reduce al mínimo los artefactos de movimiento. Tanto si está pedaleando en una bicicleta como corriendo en un tapiz rodante, el paciente tiene total libertad para moverse y apenas notará este dispositivo pequeño y ligero (125 g).

CALIDAD SUIZA. LISTO PARA USAR

El sistema está formado por un PC, un monitor, un carrito y un módulo de adquisición inalámbrico (MS-12 BT) o con cables (MS-12 USB). Como opción, el CARDIOVIT FT-1 se puede usar para la adquisición de ECG. Todo está preinstalado y probado por SCHILLER, listo para usar en la práctica clínica real.

El sistema CARDIOVIT CS-104 también está disponible como software para PC de ECG reposo con complementos opcionales de espirometría y prueba de esfuerzo.



Espirometro por ultrasonidos SpiroScout SP plus

BP-200 plus (opcional)
para medir la presión
arterial y la SpO₂ durante
la prueba de esfuerzo

Elija entre tres módulos
de adquisición:

- ❖ MS-12 BT: pequeño pero potente módulo de adquisición de ECG inalámbrico con visualización de señal en pantalla y asesor de conexiones
- ❖ MS-12 USB: módulo de adquisición de ECG «plug and play» fácil de usar
- ❖ CARDIOVIT FT-1: este dispositivo de ECG en reposo autónomo de SCHILLER también puede utilizarse como módulo de adquisición.

Ruedas de fácil deslizamiento para manejar el carrito cómodamente



Interfaz de usuario intuitiva y personalizable:

- ❖ Elija entre varias vistas de ECG.
- ❖ Cree sus flujos de trabajo preferidos.
- ❖ Defina filtros de búsqueda y plantillas de informe.

Altura de trabajo ajustable (de 88 a 122 cm) mediante un mecanismo de resorte

Agregue la espirometría a su sistema de pruebas de esfuerzo con el dispositivo SpiroScout SP plus (opcional).

Bandeja transparente para guardar y transportar artículos médicos



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño, las especificaciones y las características mostradas, o a suspender la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación. Las imágenes pueden ser representativas. Algunos productos pueden no estar autorizados por la normativa o no estar a la venta en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de SCHILLER para obtener la información y la disponibilidad más actuales.

