


CARDIOVIT CS-104 SPIRO


Vernetzte PC-basierte Spirometrie mit Ultraschalltechnologie

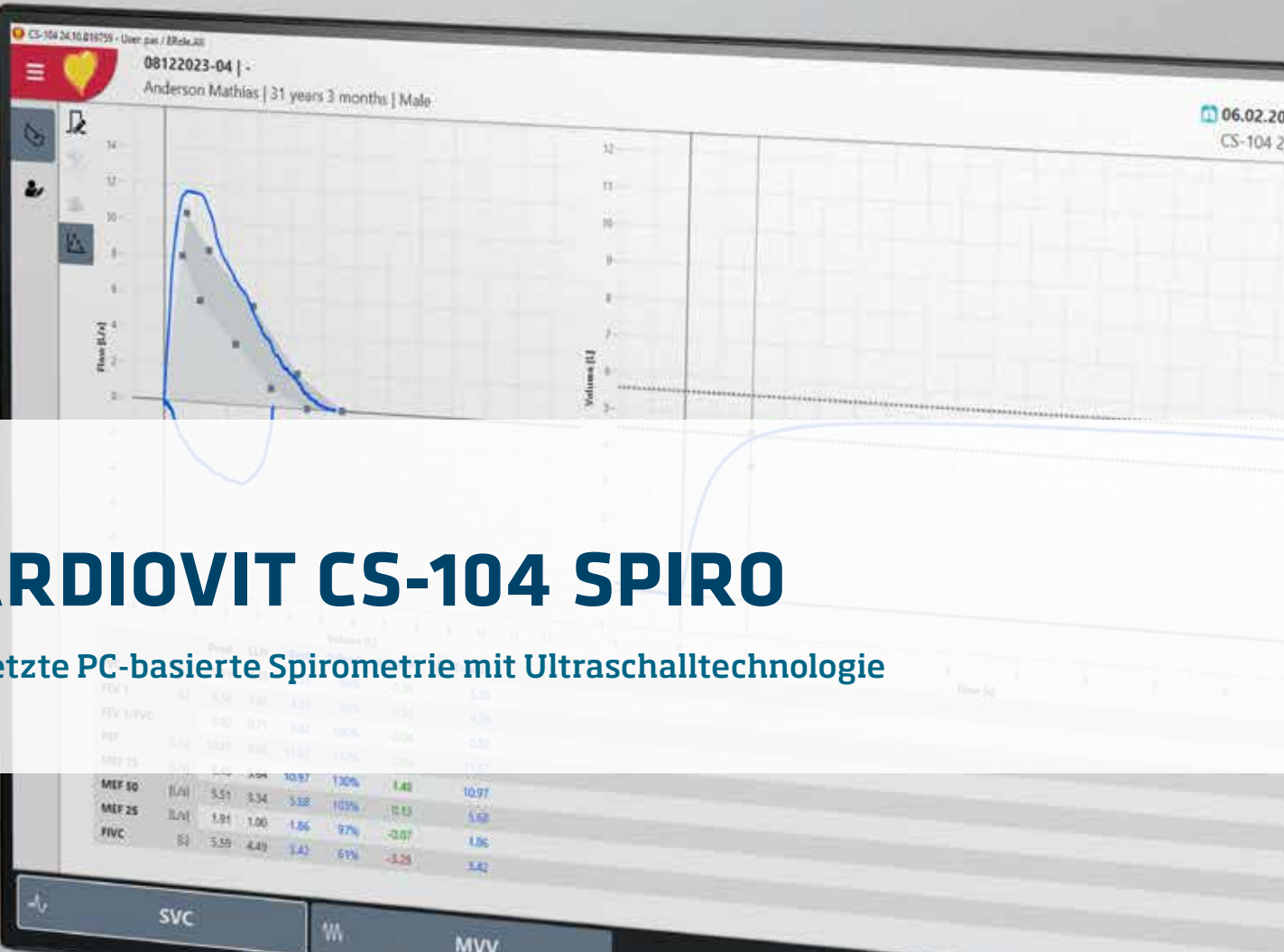

CARDIOVIT CS-104 SPIRO

CARDIOVIT CS-104 Spiro ist eine Komplettlösung für Lungenfunktionstests. Eine Spirometrie-Desktoplösung für grosse und kleine Gesundheitseinrichtungen:

- Vernetzungsoptionen und SEMA-Integration
- Ultraschalltechnologie: keine Kalibrierung, keine Aufwärmzeit, keine beweglichen Teile

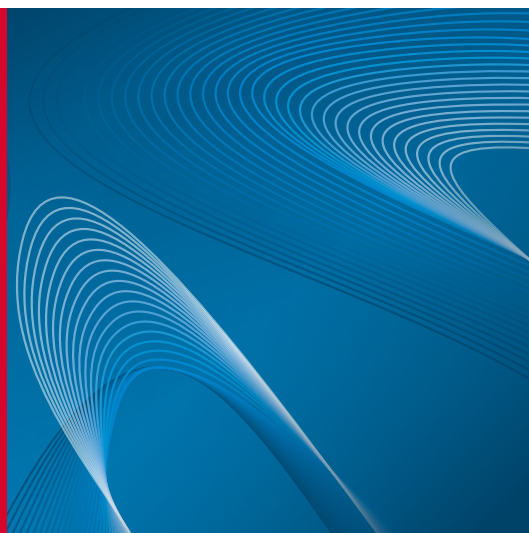

Motivationsansicht zur Animation während der Spirometrie

VERNETZUNG BEI SPIROMETRIE

CARDIOVIT CS-104 Spiro bietet die Vorteile eines Netzwerks:

- Vernetzung nach Bedarf über SCHILLER Server
- SEMA, das Datenverwaltungssystem von SCHILLER; die Ergebnisse von Lungenfunktionstests können an SEMA gesendet und dort zur Einsicht und Bearbeitung gespeichert werden.

ULTRASCHALL-TECHNOLOGIE

Dank der Ultraschalltechnologie von GANSHORN sind die Aufzeichnungen äusserst präzise, und der Sensor benötigt weder Wartung noch Kalibrierung. Die Einweg-ScoutTubes garantieren maximale Hygiene und Patientensicherheit.

INFORMATIONEN IN ECHTZEIT

Die Software trägt dazu bei, dass der Patient ein gutes Ergebnis erzielt und die Messung gültig ist: Informationen werden in Echtzeit angezeigt, nach jedem Test wird ein Feedback zur Qualität ausgegeben und für Messungen bei Kindern ist eine Motivationsansicht verfügbar.

GROSSE AUSWAHL AN MESSUNGEN

Mit dem Spirometer sind folgende Messungen erhältlich: FVC, VC und MVV. Zusätzlich sind auch Prä- und Post-Messungen möglich. Mit CARDIOVIT CS-104 Spiro werden Messergebnisse automatisch ausgewertet und Informationen zur Unterstützung bei der Diagnosefindung bereitgestellt.

SPIROMETRIE: IMMER UND ÜBERALL

CARDIOVIT CS-104 Spiro bietet den entscheidenden Vorteil, dass spirometrische Tests bequem immer und überall auf einem tragbaren Computer durchgeführt werden können.

NACHHALTIGE EINWEG-PRODUKTE

Um die Nachhaltigkeit des Produkts zu gewährleisten, leistet SCHILLER für den Einsatz von ScoutTubes und SpiroDef ScoutTube-Filtern einen Beitrag zum Klimaschutz.


myclimate
Wirkt. Nachhaltig
Produkt
myclimate.org/01-20-162037



über SCHILLER Server
mit Ihrer Infrastruktur
verbunden

erfüllt die neusten
ATS-/ERS-Richtlinien

automatische Interpretation
der Messergebnisse


Datenverwaltungssystem SEMA
von SCHILLER zum Überprüfen
und Bearbeiten von Daten

FVC, VC, MVV,
Prä-/Post-Tests,
zahlreiche Sollwerte

Feedback zur
Qualität eines
Manövers

Ultraschallsensor:
kalibrierungs- und
wartungsfrei

Einweg-ScoutTube für
maximale Hygiene und
Patientensicherheit

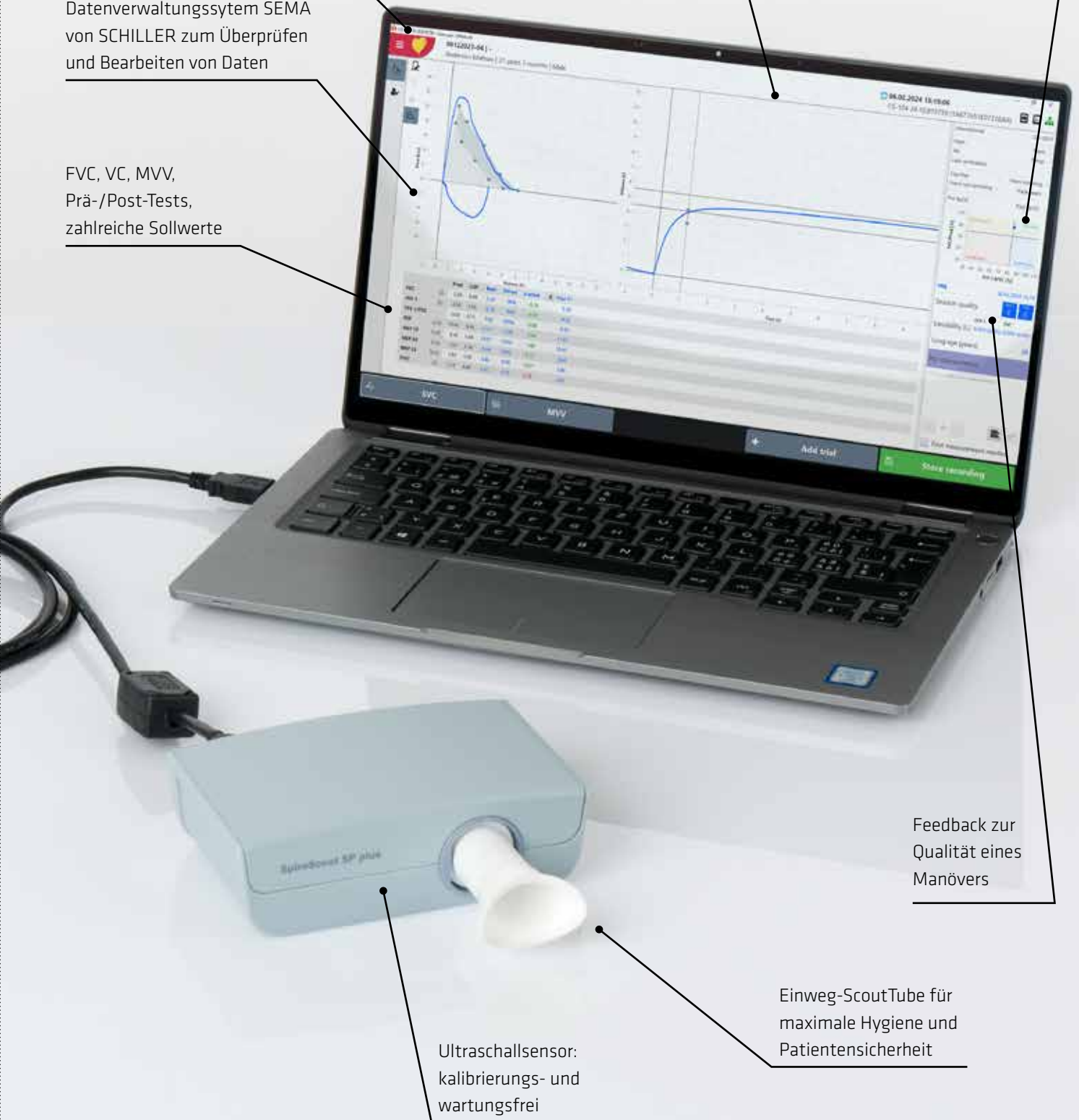



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

