


CARDIOVIT FT-1

Quand performance rime avec portabilité

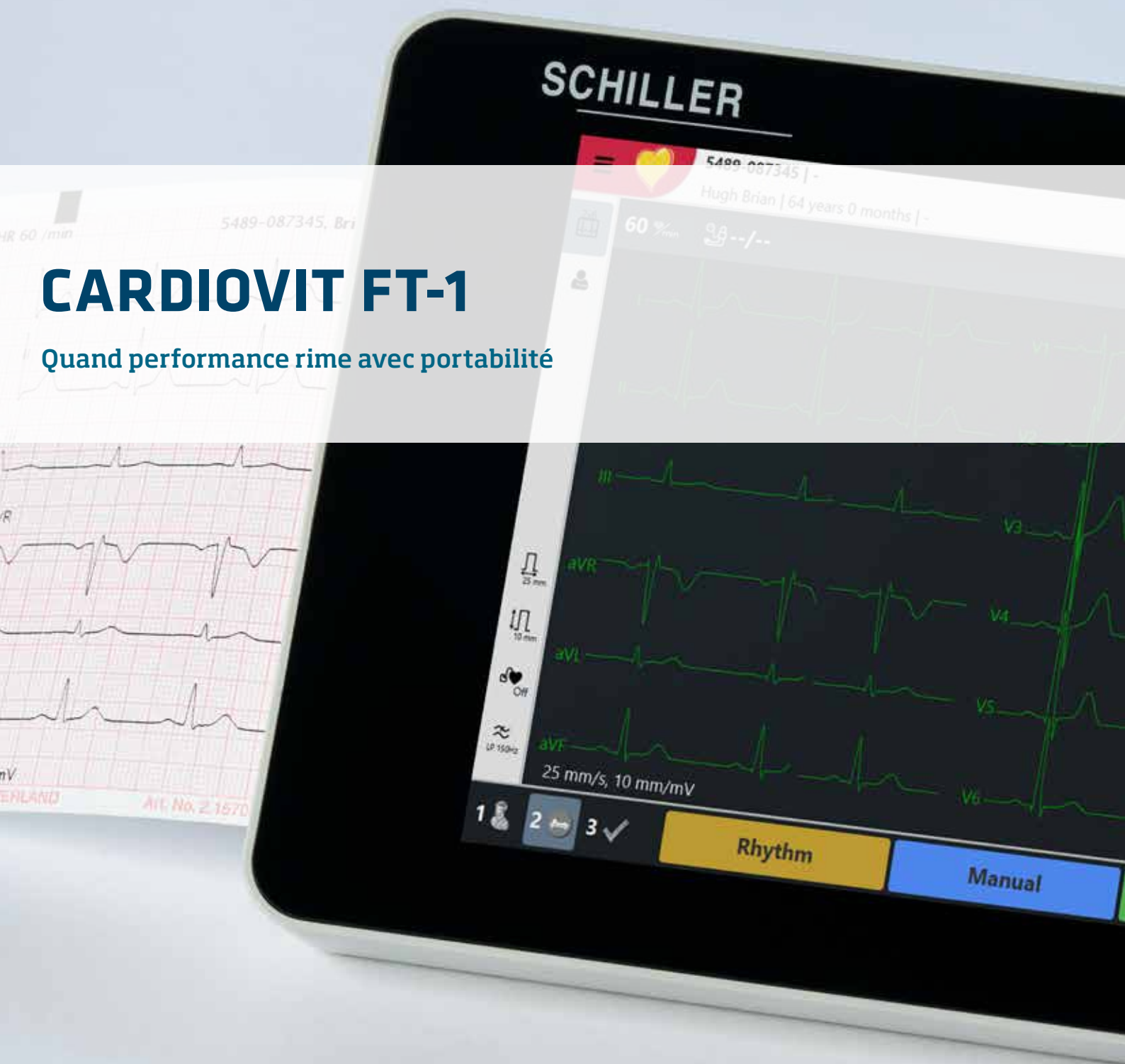


SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-1

L'ECG 12 dérivations de SCHILLER:

- ✧ Design unique
- ✧ Processus intuitif en trois étapes pour une utilisation sans effort
- ✧ Communication Wi-Fi bidirectionnelle rapide et sécurisée
- ✧ Qualité de signal exceptionnelle pour les ECG chez l'adulte et l'enfant

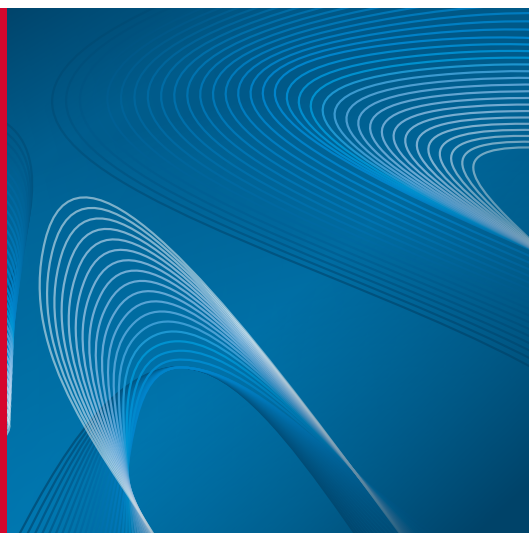

Une connexion rapide et sécurisée d'un simple effleurement d'un badge, grâce à la technologie Imprivata.

UN DESIGN UNIQUE AVEC IMPRIMANTE INTÉGRÉE

Le CARDIOVIT FT-1 est un électrocardiographe à 12 dérivations ultraportable, pesant juste un peu plus d'un kilo, batterie comprise. Il est équipé d'un écran multitactile haute résolution de 8 pouces et d'une imprimante thermique intégrée.

CONNECTIVITÉ ÉTENDUE

La communication bidirectionnelle permet un accès aisé aux données via la liste de travail ou le PDQ, ainsi qu'une transmission rapide de tous les rapports vers les systèmes de DME/SIH. Une connexion Wi-Fi sécurisée, associée à la visualisation des ECG à l'écran et à une grande capacité de stockage, permettant la mise en place des flux de travail fiables sans support papier et une réduction des coûts.

CYBERSÉCURITÉ AVANCÉE

Le CARDIOVIT FT-1 offre une cybersécurité exceptionnelle grâce à:

- ✧ Un noyau Linux renforcé sur le plan de la sécurité afin de minimiser les risques en cas de cyberattaques
- ✧ Un contrôle d'accès configurable avec nom d'utilisateur, mot de passe et droits d'accès, ainsi que la solution Enterprise Access Management (EAM) d'Imprivata, dotée d'un accès sécurisé par badge, afin d'empêcher tout accès non autorisé
- ✧ Des protocoles Wi-Fi intégrant une authentification par certificat afin de garantir un accès sécurisé à l'infrastructure informatique de l'hôpital
- ✧ Sécurité renforcée grâce à la désactivation des ports USB inutilisés

OUTILS DE DIAGNOSTIC HAUT DE GAMME

RYTHME DE REPOS: Le CARDIOVIT FT-1 enregistre les 12 dérivations pendant une durée pouvant aller jusqu'à 4 minutes, ce qui réduit le risque de passer à

côté d'événements rythmiques cliniquement significatifs. Les enregistrements peuvent être imprimés, sauvegardés, consultés et transmis.

ETM AVEC ETM SPORT (EN OPTION):

Le célèbre programme ETM de SCHILLER permet l'interprétation simultanée d'un ECG à 12 dérivations et garantit une qualité et une fiabilité irréprochables. La fonction ETM Sport, destinée à l'analyse de l'activité cardiaque des athlètes, établit la distinction entre les variations physiologiques et pathologiques de l'ECG, ce qui permet de réduire le nombre de résultats faux positifs.

CCAA (EN OPTION): L'algorithme « Culprit Coronary Artery » de SCHILLER est utilisé dans les services d'urgence et en dehors de l'hôpital chaque fois qu'il faut impérativement prendre une décision immédiate en cas de douleur thoracique. Il permet de localiser le site de l'obstruction dans l'artère coronaire et, par là même, de déterminer la taille de la zone cardiaque à risque.

IMPRIMANTE EXTERNE


Imprimante thermique intégrée haut de gamme

AIDE POUR LE POSITIONNEMENT DES ÉLECTRODES

Le guide de placement anatomique facilite la mise en place correcte des électrodes, grâce à des fonctions de zoom et de rotation permettant d'obtenir une vue optimale.

DÉTECTION D'INVERSION DES DÉRIVATIONS

En cas d'inversion des dérivations, les électrodes mal placées sont immédiatement signalées avant l'acquisition de l'ECG.

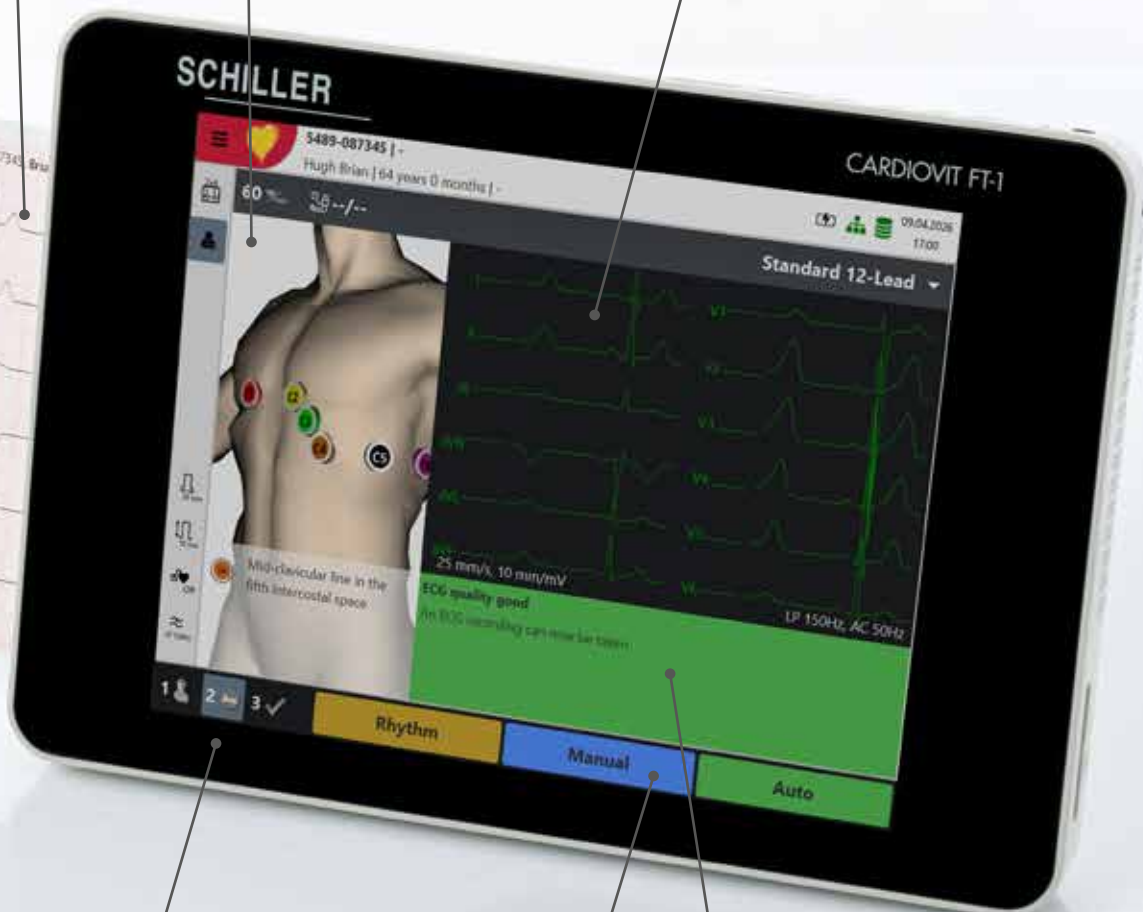

SIMPLICITE EN 3 ETAPES 1-2-3

1. Saisir ou télécharger les données du patient
2. Vérifier la qualité du signal et enregistrer un ECG
3. Vérifier l'ECG avant de l'enregistrer, de l'exporter ou de l'imprimer

Les utilisateurs peuvent passer d'une étape à l'autre.

ÉCRAN TACTILE À CRISTAUX LIQUIDES

Écran multitactile haute résolution de 8 pouces

VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DES DÉRIVATIONS

Aperçu de l'ECG pour les 12 dérivations, avec un contrôle de la qualité des dérivations indiqué par un code couleur



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 4059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.



SCHILLER
The Art of Diagnostics