


CARDIOVIT FT-1

Tam, gdzie skuteczność spotyka się z mobilnością

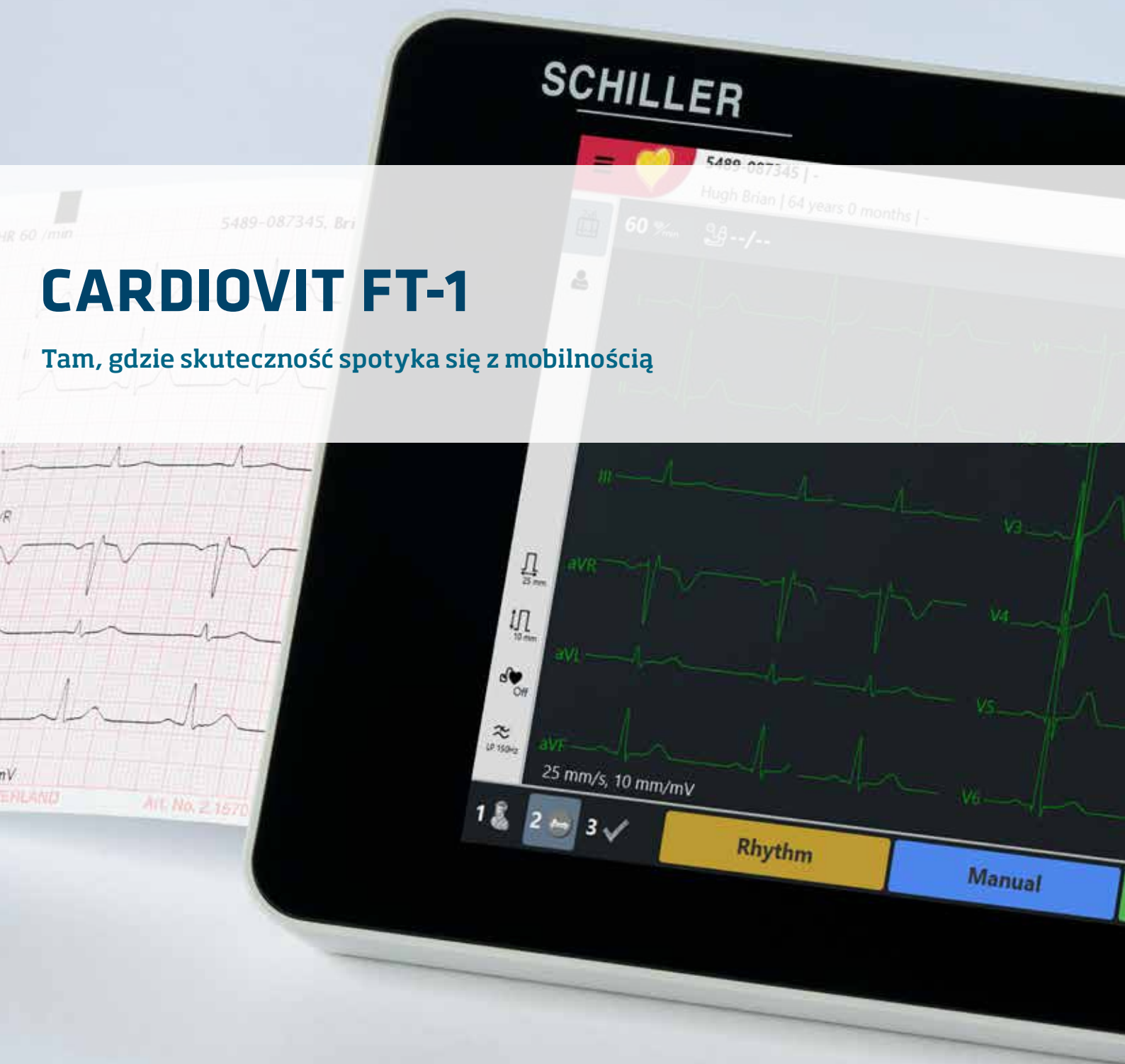


SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-1

12-odprowadzeniowe EKG SCHILLER:

- ✧ Wyjątkowa konstrukcja
- ✧ Intuicyjna, 3-etapowa procedura zapewniająca łatwą obsługę
- ✧ Szybka i bezpieczna dwukierunkowa łączność Wi-Fi
- ✧ Znakomita jakość sygnału w badaniach EKG u osób dorosłych i dzieci

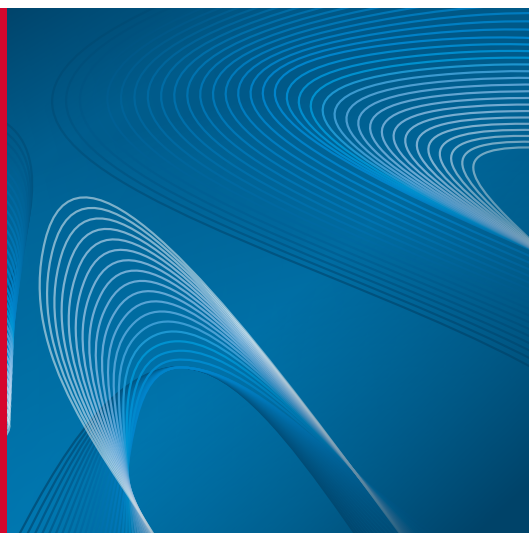

Szybkie i bezpieczne logowanie przez przyłożenie karty dostępu, oparte na technologii Imprivata.

WYJĄTKOWY PROJEKT ZE ZINTEGROWANĄ DRUKARKĄ

CARDIOVIT FT-1 to ultra lekki, przenośny, 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, ważący niewiele ponad 1 kg (z akumulatorem). Urządzenie jest wyposażone w 8-calowy ekran multi-touch w wysokiej rozdzielczości oraz zintegrowaną drukarkę termiczną.

ROZBUDOWANE FUNKCJE ŁĄCZNOŚCI

Dwukierunkowa komunikacja umożliwia łatwy dostęp do danych poprzez listę roboczą lub PDQ, a także szybkie przesyłanie wyników wszystkich badań do systemów EMR/HIS. Bezpieczne połączenie Wi-Fi, możliwość przeglądania wyników EKG na ekranie oraz duża pojemność pamięci pozwalają na niezawodną pracę bez użycia papieru i obniżają koszty.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

CARDIOVIT FT-1 zapewnia wyjątkowe cyberbezpieczeństwo dzięki następującym funkcjom:

- ✧ Zabezpieczone jądro Linuxa minimalizuje ryzyko w przypadku cyberataku
- ✧ Konfigurowalna kontrola dostępu z wykorzystaniem nazwy użytkownika, hasła i uprawnień, a także rozwiązanie Enterprise Access Management (EAM) firmy Imprivata z funkcją dostępu typu „tap-and-go”, zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi
- ✧ Protokoły Wi-Fi, w tym uwierzytelnianie za pomocą certyfikatów, zapewniają bezpieczny dostęp do szpitalnej infrastruktury IT
- ✧ Zwiększone bezpieczeństwo dzięki wyłączeniu nieużywanych portów USB

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

RYTM SPOCZYNKOWY: Urządzenie CARDIOVIT FT-1 rejestruje wszystkie

12 odprowadzeń przez okres do 4 minut, co zmniejsza ryzyko przeoczenia klinicznie istotnych zdarzeń rytmu. Zapisy można drukować, przechowywać, przeglądać i przysyłać.

ETM Z FUNKCJĄ ETM SPORT

(OPCJONALNIE): Znany program firmy SCHILLER przeznaczony do jednoczesnej interpretacji 12-odprowadzeniowego EKG, zapewniający niezrównaną jakość i niezawodność. Funkcja ETM Sport, służąca do analizy pracy serca sportowców, rozróżnia fizjologiczne i patologiczne zmiany w zapisie EKG, co pozwala ograniczyć liczbę fałszywie dodatnich wyników.

ALGORYTM CCAA (OPCJONALNIE):

Algorytm firmy SCHILLER do oceny istotnej zmiany w tętnicy wieńcowej jest wykorzystywany na oddziałach ratunkowych i poza szpitalem, gdy konieczne jest natychmiastowe podjęcie decyzji w związku z bólem w klatce piersiowej. Pozwala on zlokalizować miejsce zamknięcia tętnicy wieńcowej, a tym samym określić zagrożony obszar mięśnia sercowego.

ZINTEGROWANA Drukarka

Wysokiej klasy zintegrowana drukarka termiczna

INSTRUKCJA ROZMIESZCZENIA ELEKTROD

Instrukcja anatomiczna rozmieszczenia elektrod ułatwia prawidłowe podłączenie urządzenia, oferując funkcje powiększenia i obrotu dla uzyskania optymalnego widoku.

WYKRYWANIE ZAMIANY ODPROWADZEŃ

W przypadku zamiany odprowadzeń następuje natychmiastowe podświetlenie błędnie podłączonych elektrod przed rozpoczęciem zapisu EKG.

ŁATWE KROKI 1-2-3

1. Wprowadzenie lub pobranie danych pacjenta
2. Kontrola jakości sygnału i wykonanie zapisu EKG
3. Przegląd EKG przed jego zapisaniem, wyeksportowaniem lub wydrukowaniem


Użytkownicy mogą swobodnie przechodzić między poszczególnymi etapami.

EKRAN DOTYKOWY LCD

8-calowy ekran multi-touch o wysokiej rozdzielczości

KONTROLA JAKOŚCI ODPROWADZENIA

Przegląd wszystkich 12 odprowadzeń EKG, w tym kontrola jakości podłączenia elektrod ze wskazaniem barwnym

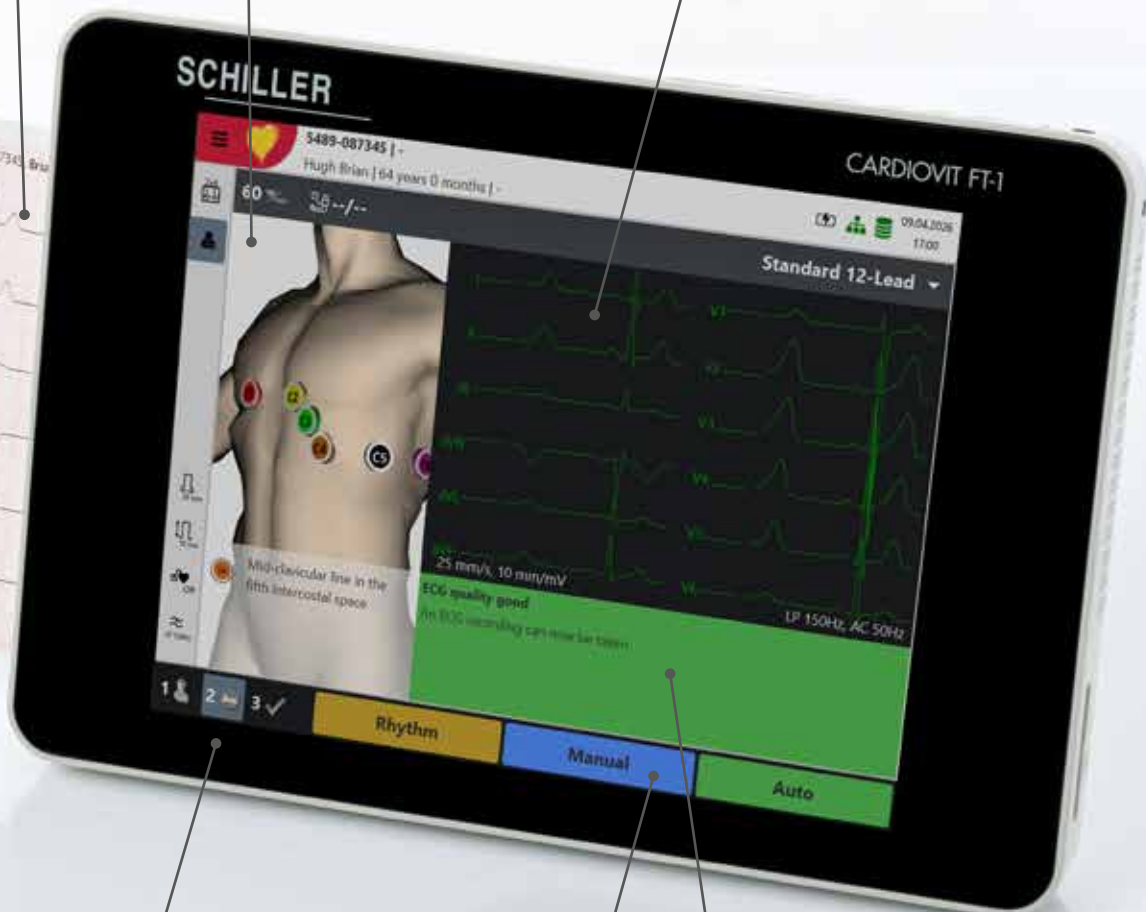



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 4059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Firma SCHILLER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych, zmian specyfikacji i funkcji prezentowanych aparatów, a także do zaprzestania produkcji/dystrybucji opisanych produktów w każdej chwili bez wcześniejszej zapowiedzi i zobowiązań. Prezentowane zdjęcia aparatów mogą być jedynie poglądowe. Niektóre produkty mogą nie być certyfikowane i dopuszczone do sprzedaży na wszystkich rynkach. Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy SCHILLER w celu uzyskania aktualnych informacji i potwierdzenia dostępności produktów.



SCHILLER
The Art of Diagnostics