

SCHILLER

CARDIOVIT FT-2

Conçu pour garantir l'efficacité clinique et une sécurité fiable




SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-2

Conçu pour des flux de travail sécurisés et efficaces:

- ❖ Une cybersécurité de pointe
- ❖ Connectivité fluide
- ❖ Processus intuitif en trois étapes pour une utilisation sans effort
- ❖ Spirométrie par ultrasons et imprimante thermique A4 en option

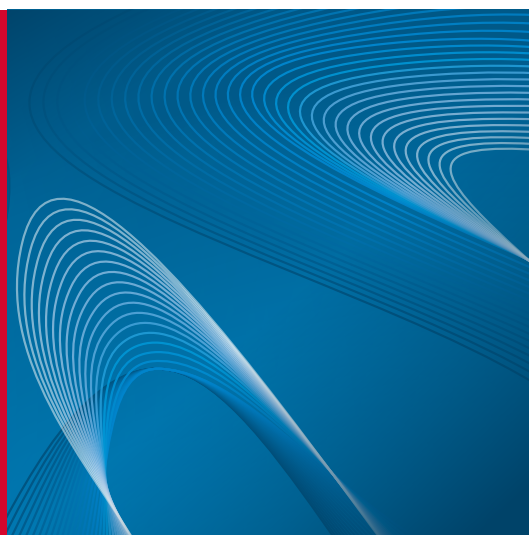

Une connexion rapide et sécurisée d'un simple effleurement d'un badge, grâce à la technologie Imprivata.

CYBERSÉCURITÉ AVANCÉE

- ❖ Un noyau Linux renforcé sur le plan de la sécurité afin de minimiser les risques en cas de cyberattaques
- ❖ Un contrôle d'accès configurable avec nom d'utilisateur, mot de passe et droits d'accès, ainsi que la solution Enterprise Access Management (EAM) d'Imprivata, dotée d'un accès sécurisé par badge, afin d'empêcher tout accès non autorisé
- ❖ Une anonymisation facultative des rapports
- ❖ Des protocoles Wi-Fi intégrant une authentification par certificat afin de garantir un accès sécurisé à l'infrastructure informatique de l'hôpital
- ❖ Sécurité renforcée grâce à la désactivation des ports USB inutilisés

CONNECTIVITÉ SANS FAILLE

La communication bidirectionnelle permet un accès aisé aux données via la liste de travail ou le PDQ, ainsi qu'une transmission rapide de tous les rapports vers les systèmes de DME/SIH.

COMPLÉTÉ PAR UNE SPIROMÉTRIE

Le spiromètre à ultrasons SpiroScout SP plus, disponible en option, transforme le CARDIOVIT FT-2 en une solution complète pour le diagnostic cardiaque et pulmonaire. Ce capteur ne nécessite ni entretien ni étalonnage.

L'option de spirométrie propose la CVF, le CVL et le VVM, avec un large choix de normes de référence, de tests préliminaires et de tests de suivi, ainsi que l'interprétation des résultats de la CVF. Un formulaire d'incitation est fourni pour les essais cliniques menés auprès d'enfants.

ADAPTÉ À VOS BESOINS

Le CARDIOVIT FT-2 est équipé d'une imprimante thermique en option, ce qui permet de choisir la configuration la mieux adaptée aux flux de travail hospitaliers, qu'ils soient sur support papier ou dématérialisés.

Outre le chariot standard, un chariot réglable en hauteur est disponible, garantissant une utilisation ergonomique et un réglage flexible.

OUTILS DE DIAGNOSTIC HAUT DE GAMME

Les enregistrements ECG au repos sont analysés par l'algorithme d'interprétation ECG ETM de SCHILLER, notamment par ETM Sport, un outil d'interprétation automatique spécialement conçu pour les athlètes.

Pour les enregistrements ECG d'une durée supérieure à 10 secondes, il est possible d'acquérir et de stocker un rythme au repos pouvant aller jusqu'à 20 minutes. Les autres caractéristiques du rythme au repos sont les suivantes:

- ❖ ECG Framer : il est possible d'extraire des ECG au repos de 10 secondes à partir d'enregistrements du rythme cardiaque au repos, accompagnés de mesures et d'une interprétation.
- ❖ Imprimer ou exporter un fichier PDF d'un extrait de 10 secondes directement depuis l'écran de vérification.

HYGIÉNIQUE

Écran multitactile de 15 pouces facile à nettoyer, câbles soigneusement rangés.

SIMPLICITÉ EN 3 ÉTAPES 1-2-3

1. Saisir ou télécharger les données du patient
2. Vérifier la qualité du signal et enregistrer un ECG
3. Vérifier l'ECG avant de l'enregistrer, de l'exporter ou de l'imprimer

Les utilisateurs peuvent passer d'une étape à l'autre.

GRANDE SURFACE DE TRAVAIL

Plateforme d'écriture avec beaucoup d'espace

IMPRIMANTE EN OPTION

Imprimante thermique A4 haute-résolution en option

AIDE POUR LE POSITIONNEMENT DES ÉLECTRODES

Le guide de placement anatomique facilite la mise en place correcte des électrodes grâce à des fonctions de zoom, de rotation et de navigation dans les images.

DÉTECTION D'INVERSION DES DÉRIVATIONS

En cas d'inversion des dérivations, les électrodes mal placées sont immédiatement indiquées avant l'acquisition de l'ECG.

VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DES DÉRIVATIONS

Aperçu de l'ECG sur les 12 dérivations, avec contrôle de la qualité des dérivations par code couleur

SPIROMÉTRIE

Pour bénéficier de fonctionnalités avancées, le spiromètre à ultrasons SpiroScout SP plus est disponible en option. La spirométrie est conforme aux recommandations ATS/ERS de 2019.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 4059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Bromborough, Wirral,
 Merseyside, CH62 3RJ
 Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.



SCHILLER
 The Art of Diagnostics