

SCHILLER

CARDIOVIT FT-2

Progettato per l'efficienza clinica e per la sicurezza




SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-2

Progettato per garantire flussi di lavoro sicuri ed efficienti:

- ❖ Cybersecurity di alto livello
- ❖ Connettività perfetta
- ❖ Flusso di lavoro intuitivo in 3-step per un utilizzo rapido
- ❖ Spirometria ad ultrasuoni e stampante termica formato A4 opzionali

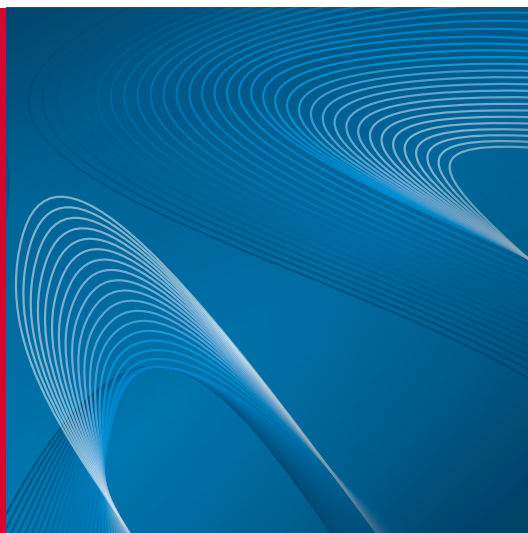

Accesso veloce e sicuro tramite la tecnologia Impriva con un semplice tocco della smart-card.

CYBERSECURITY AVANZATA

- ❖ Kernel Linux con sicurezza avanzata per ridurre al minimo il rischio di cyberattacchi
- ❖ Controllo degli accessi configurabile tramite nome utente, password e privilegi, oltre alla soluzione Impriva Enterprise Access Management (EAM) con accesso rapido tramite carta di prossimità, per impedire accessi non autorizzati
- ❖ Anonimizzazione opzionale dei referti
- ❖ Protocolli Wi-Fi con autenticazione basata su certificato per garantire l'accesso sicuro all'infrastruttura informatica dell'ospedale
- ❖ Maggiore sicurezza grazie alla disattivazione delle porte USB inutilizzate

CONNETTIVITÀ PERFETTA

Comunicazione bidirezionale per il facile accesso ai dati tramite lista di lavoro o PDQ e la rapida trasmissione dei referti ECG ai sistemi EMR/HIS.

CON SPIROMETRIA OPZIONALE

Lo spirometro ad ultrasuoni SpiroScout SP plus opzionale trasforma il CARDIOVIT FT-2 in una soluzione completa per la diagnostica cardiaca e polmonare. Il sensore non richiede alcuna calibrazione o manutenzione.

L'opzione di spirometria include FVC, SVC e MVV con un'ampia selezione di standard di riferimento, test pre e post nonché l'interpretazione dei risultati FVC. Uno schermo di incentivazione è incluso per i test con bambini.

ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE

CARDIOVIT FT-2 è dotato di una stampante termica opzionale e consente di scegliere la configurazione ottimale in base al vostro flusso di lavoro ospedaliero di tipo cartaceo o elettronico.

Oltre al carrello standard, è disponibile un carrello con altezza regolabile, che garantisce un utilizzo ergonomico e una regolazione flessibile.

STRUMENTI DI DIAGNOSTICA DI ALTO LIVELLO

Le registrazioni ECG a riposo vengono analizzate con l'algoritmo di interpretazione ECG SCHILLER ETM, inclusa l'interpretazione automatica ETM Sport specificatamente concepita per atleti.

Per le registrazioni ECG di durata superiore a 10 secondi, è possibile acquisire e memorizzare un ritmo a riposo fino a 20 minuti. Inoltre, il ritmo a riposo include le seguenti funzioni:

- ❖ ECG Framer: gli ECG a riposo di 10 secondi possono essere estratti da registrazioni del ritmo a riposo, con misurazioni e interpretazione.
- ❖ Stampare o esportare in formato PDF un segmento di 10 secondi direttamente dalla schermata di revisione.

FACILMENTE IGIENIZZABILE

Display multi-touch da 15" facile da pulire, cavi ordinatamente riposti.

INTUITIVI STEP 1-2-3

1. Immettere o scaricare i dati paziente
 2. Controllare la qualità del segnale ed acquisire l'ECG
 3. Verificare l'ECG prima della memorizzazione, esportazione o stampa
- Gli utenti possono passare liberamente da uno step all'altro.

AMPIA SUPERFICIE DI LAVORO

Ampio spazio disponibile per l'utilizzatore.

STAMPANTE OPZIONALE

Stampante termica A4 ad alta risoluzione opzionale

ASSISTENTE DI COLLEGAMENTO

L'assistente di collegamento anatomico facilita il corretto posizionamento degli elettrodi grazie alle funzioni di ingrandimento, rotazione e navigazione delle immagini.

RILEVAMENTO DELL'INVERSIONE DELLE DERIVAZIONI

In caso di inversione delle derivazioni, gli elettrodi malposizionati vengono immediatamente visualizzati prima dell'acquisizione dell'ECG.

CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLE DERIVAZIONI

Panoramica ECG di tutti i 12 canali con controllo della qualità delle derivazioni codificate in base al colore

SPIROMETRIA

Per le funzionalità avanzate, è disponibile lo spirometro ad ultrasuoni SpiroScout SP plus opzionale. La spirometria è conforme alle linee guida ATS/ERS 2019.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 4059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Bromborough, Wirral,
 Merseyside, CH62 3RJ
 Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo.
 Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.



SCHILLER
 The Art of Diagnostics