

ERG 911 L ERG 911 LS

Medizinische Sicherheits-Liege/Halbliege-Ergometer



SCHILLER
The Art of Diagnostics

ERG 911 L UND ERG 911 LS

Medizinisches Liegeergometer sowie
Spezialergometer für Echokardiographie unter Belastungsbedingungen

SCHILLER Sicherheits-Liege/ Halbliege-Ergometer:

- ∴ Stufenlos elektrisch neigbar und verstellbar
- ∴ Niedriger Einstieg für einfaches Aufsitzen
- ∴ Leise und bequem
- ∴ Konfigurierbar



ERG 911 L: Sicherheits-Liege/Halbliege-Ergometer, stufenlos 0° - 45° neigbar

ERG 911 L: LIEGEND FÜR MEHR SICHERHEIT

Das Sicherheits-Liege/Halbliege-Ergometer ERG 911 L wurde für die Anwendung im kardiologischen Bereich entwickelt. Besondere Sicherheitsaspekte, z.B. bei Probanden mit Verdacht auf Störungen der Herz-Kreislauffunktionen, bei Belastungen nach Herzinfarkt, nach Bypass-Operationen, oder bei speziellen Anwendungen der Belastungsergometrie, wie z.B. Herzkatheteruntersuchungen, verlangen den Einsatz eines Liege-/ Halbliege-Sicherheitsergometers. Hier kommt das SCHILLER Sicherheits-Liege/Halbliege-Ergometer zum Einsatz. Auch für die Untersuchung von älteren oder beeinträchtigten Menschen empfiehlt sich die Verwendung eines Sicherheits-Liege-/Halbliege-Ergometers. Der Leistungsgrad ist dank der optimalen Platzierung des Probanden auf der Liegefläche identisch zur Fahrradergometrie.

ERG 911 LS: SPEZIAL- ERGOMETER FÜR ECHOKARDIOGRAPHIE

Die Entwicklung des ERG 911 LS basiert auf der Technik des Sicherheits-Liege-/Halbliege-Ergometers ERG 911 L. Durch eine zusätzliche Schwenkachse der Liege kann der Patient während der Belastung in eine Linksseitenlage bis maximal 30 Grad abgedreht werden. Diese Stellung ist besonders günstig für eine hohe Qualität der Ultraschallbilder während der Stress-Echo Untersuchung. Eine stabile Achselstütze sorgt für eine bequeme und sichere Lage des Patienten, während sich die Liege für Herzschalluntersuchungen nach links neigt. Das ERG 911 LS kann ausser für diese Spezialanwendung weiterhin wie ein normales Sicherheits-Liege/Halbliege-Ergometer verwendet werden.

ERG 911 LS: STUFENLOS ELEKTRISCH NACH LINKS NEIGBAR (0° - 30°)

- ❶ Öffnung in der Liegefläche in Herzhöhe für bequeme Ultraschalluntersuchung
- ❷ Stabile Haltegriffe und Polsterstützen zur sicheren Lagerung des Patienten in der Seitenlage
- ❸ Beckenstütze für mehr Sicherheit



Zwei Betriebsmodi:

- ❖ Remotebetrieb mit einem Mastergerät (EKG, PC, ...)
- ❖ Eigenständiger Betrieb, entweder mit benutzerdefinierbarem Stufenprotokoll oder manueller Laststeuerung

Bluetooth und RS-232-Verbindung

SpO₂ Messung (optional)

Stabiler, einstellbarer Haltegriff

180° drehbarer Messkopf

Elegantes und leicht zu reinigendes Gehäuse

Hohe Belastungsgenauigkeit

Sehr ruhig (auch bei hohen Drehzahlen)

Wartungsfrei dank Riemenantrieb

Präzise Blutdruck-Messeinheit mit Armauflage (optional)

Elektrisch verstellbare Kopfstütze und Sitz

Öffnung auf Herzhöhe für die Stressechokardiographie


Stufenlos elektrisch nach links neigbar (0° - 30°)

Stabile Stahlrohrkonstruktion für Patientengewicht bis 160 kg

Stufenlos elektrisch neigbar (0° - 45°)

Grosse Trittplatte mit niedrigem Einstieg für bequemes Aufsitzen

Offen konstruiert für ergonomischen Ultraschall durch den Arzt

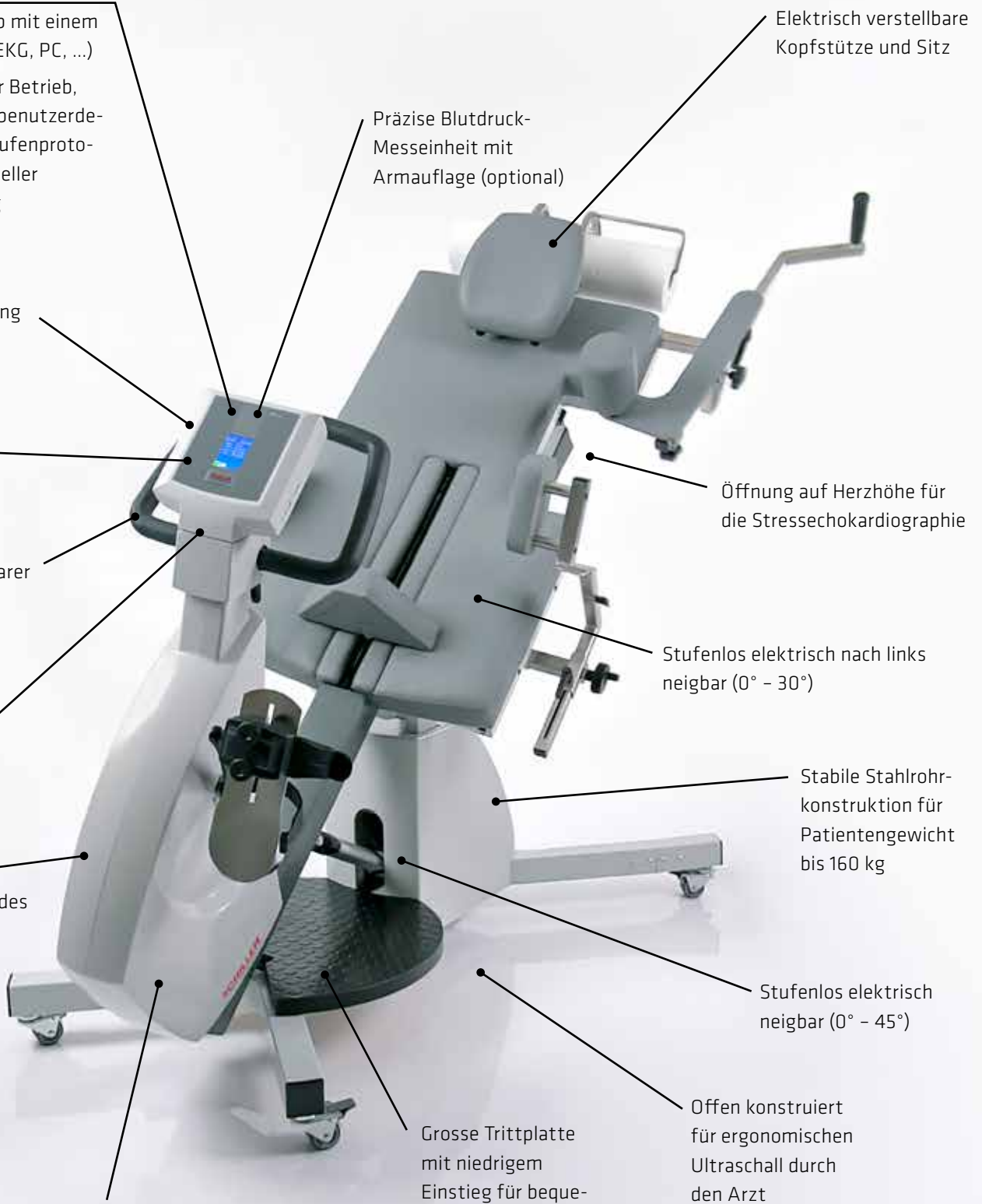



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Türkiye
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 133 331 2150
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

