

ERG 911 L ERG 911 LS

Ergometri medicali di sicurezza con lettino/schienale



SCHILLER
The Art of Diagnostics

ERG 911 L

ERG 911 LS

Ergometro con lettino medico ed ergometro speciale per l'ecocardiografia durante l'attività

Ergometro di sicurezza con lettino/schienale SCHILLER:

- ∴ Infinitamente variabile e regolabile elettricamente
- ∴ Telaio basso per un facile accesso
- ∴ Silenzioso e confortevole
- ∴ Configurabile



ERG 911 L: ergometro di sicurezza con lettino/schienale, infinitamente variabile da 0° - 45°

ERG 911 L: RECLINATO PER UNA MAGGIORE SICUREZZA

L'ergometro di sicurezza con lettino/schienale ERG 911 L è stato sviluppato per l'uso nel settore cardiologico. Alcuni aspetti di sicurezza particolari richiedono l'utilizzo di un ergometro di sicurezza con lettino/schienale, ad es. pazienti con sospetti problemi al sistema cardiovascolare, durante il test da sforzo a seguito di un infarto miocardico, dopo un intervento di bypass o durante applicazioni particolari come un test con catetere cardiaco. In questi casi viene utilizzato l'ergometro di sicurezza con lettino/schienale SCHILLER. Inoltre, l'utilizzo di un ergometro di sicurezza con lettino/schienale è raccomandato anche per l'esame di pazienti anziani o disabili. Grazie al posizionamento ottimale del paziente sul lettino, è possibile ottenere prestazioni identiche alla cicloergometria.

ERG 911 LS: ERGOMETRO SPECIFICO PER L'ECOCARDIOGRAFIA

Lo sviluppo di ERG 911 LS è basato sulla tecnologia dell'ergometro di sicurezza con lettino/schienale ERG 911 L. Grazie a un asse di rotazione aggiuntivo del lettino, il paziente può essere posizionato ad un'angolazione di fino a 30° a sinistra durante l'attività. Questo garantisce una posizione particolarmente favorevole per immagini ad ultrasuoni di alta qualità durante l'ecocardiografia da sforzo. Lo stabile supporto spalla garantisce un posizionamento confortevole e sicuro del paziente mentre il lettino viene inclinato a sinistra durante l'ecocardiografia. Oltre a queste applicazioni specifiche, ERG 911 LS può naturalmente essere utilizzato anche come normale ergometro di sicurezza con lettino/schienale.

ERG 911 LS: INFINITAMENTE VARIABILE A SINISTRA (0° - 30°)

- 1 Apertura nella superficie del lettino a livello del cuore, per effettuare comodi esami ad ultrasuoni
- 2 Stabile maniglia e supporto spalla per un posizionamento sicuro del paziente quando il lettino è inclinato
- 3 Supporto per l'anca per maggiore sicurezza



Due modalità operative:

- ❖ Funzionamento remoto da un dispositivo principale (ECG, PC, ...)
- ❖ Funzionamento autonomo con protocollo a fasi personalizzabile o controllo manuale del carico

Bluetooth e collegamento RS-232

Misurazione SpO₂ (opzionale)

Maniglia stabile e regolabile

Display girevole di 180°

Telaio elegante e facile da pulire

Elevata precisione di carico

Estremamente silenzioso (anche a velocità elevata)

Privo di manutenzione grazie alla trasmissione a cinghia

Accurata unità di misurazione della pressione arteriosa con poggibraccio (opzionale)

Poggiatesta e sedile regolabile elettricamente

Apertura a livello del cuore per l'eccardiografia da sforzo


Infinitamente variabile elettricamente a sinistra (0° - 30°)

Stabile costruzione in tubi di acciaio per pazienti fino a 160 kg di peso

Infinitamente variabile elettricamente (0° - 45°)

Costruzione aperta per esami ad ultrasuoni ergonomici da parte del cardiologo

Ampio poggipiedi con telaio basso per un facile accesso

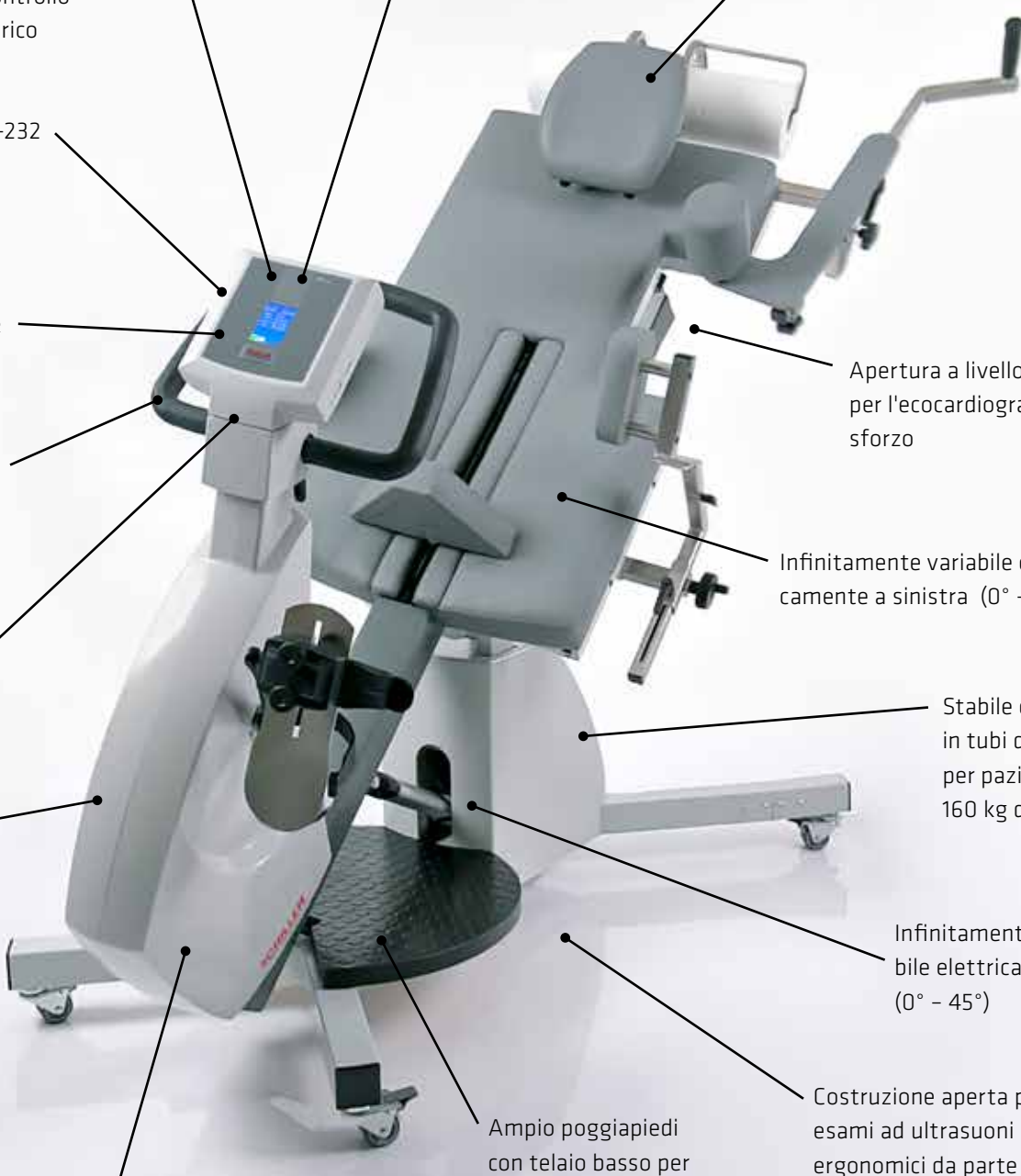



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Türkiye
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 133 331 2150
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.

