

SpiroScout SP plus

Faites passer votre ECG au niveau supérieur avec la spirométrie à ultrasons



SPIROSCOUT SP PLUS

Ajoutez tout simplement la spirométrie à votre appareil d'ECG avec SpiroScout SP plus:

- ❖ Technologie ultrasonique GANSHORN précise
- ❖ Sans étalonnage
- ❖ Pas de temps de préchauffage, pas de pièces mobiles

SpiroScout SP plus vous permet d'élargir les compétences de votre cabinet en ajoutant la mesure spirométrique à votre appareil ECG SCHILLER, en utilisant la même plateforme pour deux applications différentes. Vous bénéficierez de toutes les fonctions d'un ECG et d'un spiromètre, avec les données organisées de la même manière afin de faciliter leur gestion.

SpiroScout SP plus inclut un capteur de débit à ultrasons qui mesure le débit d'air en entrée et en sortie des poumons du patient. La technologie ultrasonique élimine les problèmes liés aux méthodes conventionnelles de mesure du débit

respiratoire, car elle ne comporte pas de pièces mobiles, d'écran de réception des expectorations et d'accessoires à étalonner.

La mesure ultrasonique du débit respiratoire est indépendante de la composition des gaz, de la pression et de l'humidité, ce qui élimine les erreurs liées à ces variables. Avec le ScoutTube jetable, les impulsions ultrasoniques circulent entre les capteurs.

Le ScoutTube jetable n'effectue aucune mesure, et ne nécessite donc pas d'étalonnage.

JETABLE ET DURABLE

Pour garantir un produit durable, SCHILLER indemnise la totalité du CO₂ émis lors de la production, de l'emballage, de l'expédition et de l'élimination des ScoutTubes à usage unique et des filtres PFT.



LES AVANTAGES UNIQUES DE LA TECHNOLOGIE ULTRASONIQUE GANSHORN:

Avantages de la technologie ultrasonique

- ❖ Aucun contact entre le capteur et l'échantillon
- ❖ Aucune influence de l'humidité, de la pression barométrique, de la contamination
- ❖ Sans étalonnage
- ❖ Pas de nettoyage des capteurs / filtres, sans entretien
- ❖ Consommables simples et économiques
- ❖ Précision très élevée pour les faibles débits
- ❖ Pas de temps d'indisponibilité

Les inconvénients de la technologie conventionnelle*

- ❖ Contact permanent entre le capteur et l'échantillon
- ❖ Extrêmement sensible à la contamination (erreurs de mesure)
- ❖ Étalonnage régulier nécessaire
- ❖ Nettoyage
- ❖ Limitée à la détection des faibles débits
- ❖ Temps d'indisponibilité pour la maintenance

*turbine, pneumotach, fil chaud

**SPIROSCOUT SP PLUS EST
COMPATIBLE AVEC:**

- ❖ CARDIOVIT CS-104
- ❖ CARDIOVIT AT-102 G2
- ❖ SPIROVIT SP-1 G2




CARDIOVIT CS-104



CARDIOVIT AT-102 G2



SPIROVIT SP-1 G2

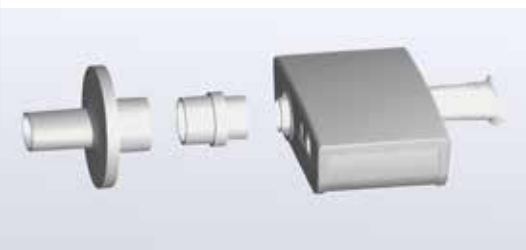

SCOUTTUBE

- ❖ Contrôle total de la contamination avec des consommables hygiéniques pour un patient unique
- ❖ Forme ovale pour une étanchéité optimale par les lèvres et un bon positionnement des dents
- ❖ Conique afin de s'adapter aux différentes tailles de bouche

FILTRE PFT

- ❖ Des résultats fiables, sans fuite et reproductibles
- ❖ Protection contre la contamination croisée et protection supplémentaire pour les opérateurs et les techniciens
- ❖ Adaptateur désinfectable



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.

