


medilogAR


Effizienter und zuverlässiger state-of-the-art Holter

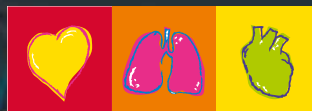

SCHILLER
The Art of Diagnostics

medilogAR

- Robust, stoss- und spritzwasserfest sowie leicht zu reinigen
- Flexibles Doppelbatteriekonzept für eine Aufzeichnungsdauer von mehr als 14 Tagen
- Unmittelbare Erkennung von Vorhofflimmern/Vorhofflattern, basierend auf der direkten P-Wellen-Analyse^{1,2}

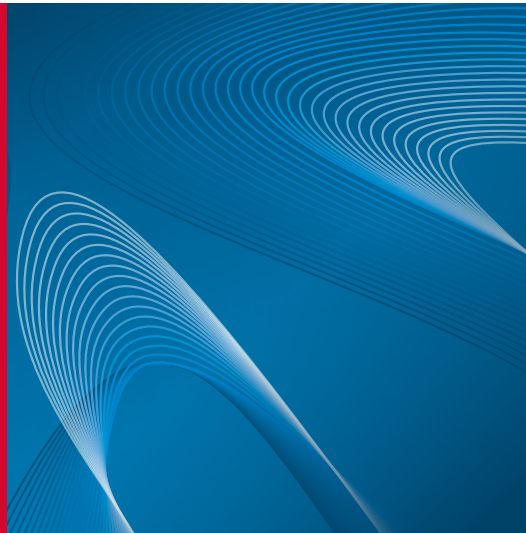

PERFEKT GEEIGNET FÜR KLINISCHE ROUTINE

Mit dem stoss- und spritzwasserfesten Design ist der medilogAR Holter besonders geeignet für die tägliche klinische Routine. Der Holter und seine Tragehülle sind robust und leicht zu reinigen.

ENERGIE FÜR ZWEI WOCHEN

Dank dem Doppelbatteriekonzept kann der Patient mehr als 14 Tage überwacht werden, ohne dass der Arzt die Batterien wechseln muss.



Umweltfreundliches Doppelbatteriekonzept (Abbildung)

UMWELTFREUNDLICHE AUSWAHL:

Der qualitativ hochstehende interne Akku wird via USB aufgeladen. Sie wählen die gewünschte Aufzeichnungsdauer von 1, 3 oder 7 Tagen und der medilogAR passt die Einstellungen entsprechend der Laufzeit an.

EINWEG-AAA-BATTERIEN:

Mit Standard-AAA-Batterien können die Durchlaufzeiten in gut ausgelasteten Kliniken gesenkt werden.

MEHR ALS 14 TAGE:

Für eine maximale Aufzeichnungsdauer kann ein vollständig aufgeladener interner Akku mit einer AAA-Batterie kombiniert werden. So erreicht man eine Aufzeichnungsdauer von mehr als 14 Tagen mit automatischer Erkennung von Vorhofflimmern^{1,2}.

VERSCHIEDENE TRAGEOPTIONEN

Der medilogAR ist so flach, dass er sogar in die Hosentasche passt. In der Tragehülle kann der Holter am Gürtel getragen werden oder am Trageriemen direkt am Körper.

SPITZENPERFORMANCE

Der medilogAR bietet auf 3 Kanälen eine Abtastfrequenz von 32'000 Hz wie sie sonst nur im Ruhe-EKG üblich ist. Dies ermöglicht direkte P-Wellen-Analyse^{1,2}, exzellente Artefaktunterdrückung und sorgt so für stets saubere, verwertbare EKGs, die mit minimalem Zeitaufwand ausgewertet werden können.

UNMITTELBARE ERKENNUNG VON VORHOFFLIMMERN/-FLATTERN:

Genau wie ein Kardiologe, sucht der medilogAR nach Vorhofflimmern- und Vorhofflattern-Episoden, indem er die P-Wellen^{1,2} betrachtet.

1 Verfügbar mit medilogAR Professional

2 Verfügbar mit medilogAR Enterprise



ERKENNUNG VON ATMUNGS-AKTIVITÄT:

Dank der Aufzeichnung des vom EKG abgeleiteten Atmungsaktivitätssignals² sucht der medilogAR nach möglichen Unterbrechungen der Atmungsaktivität während des Schlafs. Der optionale SpO₂-Sensor² bringt zusätzliche Information zur Atmungsaktivitätsbewertung und wird via Bluetooth verbunden.



EINZIGARTIGE FUNKTIONEN VER-SCHAFFEN DURCHBLICK

Die unmittelbare Erkennung von Vorhofflimmern^{1,2}, die Analyse der Atmungsaktivität² und hochauflösende HRV sind nur einige der herausragenden Funktionen des medilogAR. Die Analyse wird von der renommierten medilog DARWIN2-Software durchgeführt und bietet faszinierende Einblicke.

1 Verfügbar mit medilogAR Professional
2 Verfügbar mit medilogAR Enterprise



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 info@schiller.fr
 www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 contact@schillerfrance.fr
 www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
 sales@schiller-reomed.ch
 www.schiller-reomed.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
 info@schillerchina.com
 www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 647 35 90
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Türkiye
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
 info@schiller.com.tr
 www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 info@schillerzg.hr
 www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 mail@schiller.ru
 www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 133 331 2150
 sales@schilleruk.com
 www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

