


medilogAR


Holter de pointe, fiable et efficace

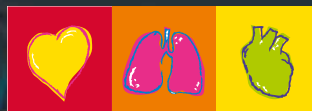

SCHILLER
The Art of Diagnostics

medilogAR

- Robuste, à l'épreuve des chocs et des projections d'eau, en plus d'être facile à nettoyer
- Concept flexible de batterie double pour une durée d'enregistrement de 14 jours et plus
- Détection instantanée de la fibrillation auriculaire/ du flutter auriculaire, basé sur l'analyse de l'onde P^{1,2}

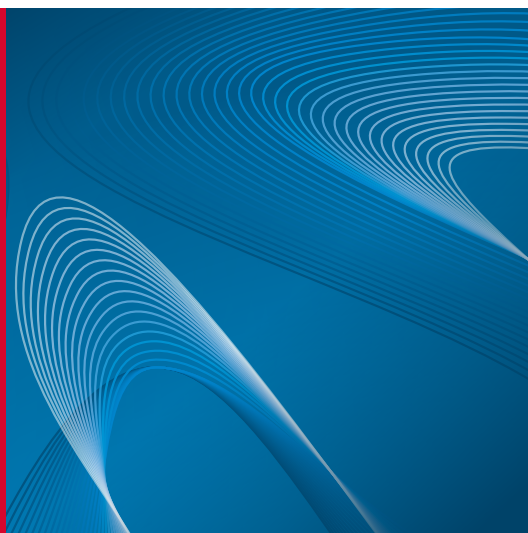

IDÉAL POUR LA VIE QUOTIDIENNE

Grâce à son concept à l'épreuve des chocs et des projections d'eau, le Holter medilogAR convient parfaitement aux activités de la vie quotidienne. Le Holter ainsi que son étui de transport sont résistants et faciles à nettoyer.

DEUX SEMAINES D'ALIMENTATION

Grâce au concept de batterie double, les patients peuvent être suivis



Concept écologique de batterie double (illustration)

pendant plus de 14 jours sans devoir consulter le médecin pour un changement de batterie.

CHOIX ÉCOLOGIQUES:

La batterie interne de haute qualité est rechargeable via USB. En ajustant la résolution du signal, la batterie interne peut être sollicitée de 24/72 heures à plus de 7 jours.

BATTERIE AAA À USAGE UNIQUE:

Pour les périodes d'utilisation plus intenses, il est recommandé d'utiliser les batteries AAA facilement disponibles.

PLUS DE 14 JOURS:

Pour une durée d'enregistrement maximale, utiliser la batterie interne entièrement chargée ainsi qu'une batterie AAA (fonctionnement de plus de 14 jours et détection automatisée de la fibrillation auriculaire^{1,2}).

DIVERSES OPTIONS DE TRANSPORT

Le medilogAR est si mince qu'il peut facilement être inséré dans la poche d'un pantalon. L'étui de transport permet de le porter sur une ceinture ou autour du cou.

UNE QUALITÉ DE SIGNAL SUPÉRIEURE

Le Holter medilogAR dispose d'un taux d'échantillonnage de 32 000 Hz permettant d'obtenir un ECG 3 pistes de qualité supérieure. Celui-ci est utilisé pour l'analyse de l'onde P^{1,2}, la suppression d'artéfacts ainsi que la détection de mouvements, permettant ainsi une analyse rapide.

FIBRILLATION AURICULAIRE / DÉTECTION AURICULAIRE INSTANTANÉE:

Le medilogAR effectue la détection des fibrillations auriculaires et flutters auriculaires en détectant directe-

1 Disponible avec medilogAR Professional

2 Disponible avec medilogAR Enterprise



ment les ondes P^{1,2}, tout comme un cardiologue le ferait.

ÉPISODES RESPIRATOIRES:

Grâce à l'enregistrement de la respiration² dérivé de l'ECC, le medilogAR est en mesure de détecter d'éventuels épisodes respiratoires pendant le sommeil. Le capteur SpO₂² facultatif, connecté via Bluetooth, permet d'obtenir plus d'informations relatives à la respiration.



Capteur SpO₂, attaché pour la nuit

1 Disponible avec medilogAR Professional
2 Disponible avec medilogAR Enterprise

BIEN PLUS QU'UN SIMPLE DÉPISTAGE D'ARYTHMIES

La détection instantanée de fibrillation auriculaire^{1,2}, l'analyse d'épisodes respiratoires², ainsi que la variabilité de la fréquence cardiaque de haute résolution ne sont que quelques-unes des caractéristiques exceptionnelles présentes sur le medilogAR. L'analyse est effectuée grâce au logiciel medilog DARWIN2 de grande renommée.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Türkiye
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 133 331 2150
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.

