

medilogAR


Holter all'avanguardia, efficiente e affidabile



SCHILLER
The Art of Diagnostics

medilogAR

- Robusto, protetto da scariche e spruzzi e facile da pulire
- Concetto flessibile a doppia batteria per una durata di registrazione di oltre 14 giorni
- Rilevamento istantaneo di fibrillazione atriale/flutter atriale mediante l'analisi dell'onda P reale^{1,2}

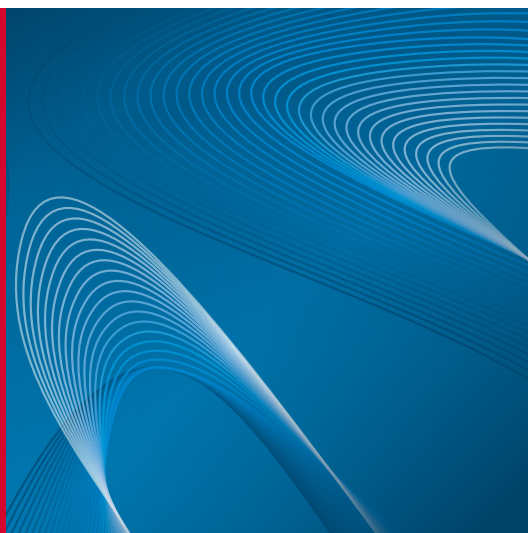

IDEALE PER LA ROUTINE CLINICA

Il design protetto da scariche e spruzzi rende l'Holter medilogAR ideale per la routine clinica quotidiana. L'Holter e la relativa custodia di trasporto sono robusti e di facile pulizia.

DUE SETTIMANE DI ALIMENTAZIONE

Grazie al concetto a doppia batteria, è possibile eseguire lo screening dei pazienti per oltre 14 giorni senza



Concetto ecocompatibile a doppia batteria (illustrazione)

dover consultare un medico per la sostituzione delle batterie.

SELEZIONE ECOCOMPATIBILE:

La batteria interna di alta qualità si ricarica tramite USB. Regolando la risoluzione del segnale, la batteria interna può funzionare per 24/72 ore o per oltre 7 giorni.

BATTERIA AAA MONOUSO:

Per i tempi di risposta più rapidi in cliniche ad elevata produttività, è possibile utilizzare batterie AAA standard facilmente disponibili.

OLTRE 14 GIORNI:

Per la durata massima di registrazione, è possibile combinare una batteria interna a piena carica con una batteria AAA per ottenere oltre 14 giorni di durata con rilevamento AF automatico^{1,2}.

VARIE OPZIONI DI TRASPORTO

medilogAR è talmente piccolo da infilarsi comodamente nella tasca dei pantaloni. Con la custodia di trasporto, può essere indossato su una cintura o al collo, direttamente sul corpo.

REALIZZATO PER LA SOPPRESSIONE DEGLI ARTEFATTI

Il registratore Holter medilogAR possiede una frequenza di campionamento dell'ECG a riposo eccezionale, di 32.000 Hz su 3 canali, per analisi dell'onda P reale^{1,2}, la soppressione sofisticata degli artefatti ed il rilevamento del movimento, per una valutazione rapida.

RILEVAMENTO ISTANTANEO FIBRILLAZIONE ATRIALE/AFL:

medilogAR esegue una scansione per fibrillazione atriale e flutter atriale

1 Disponibile con medilogAR Professional

2 Disponibile con medilogAR Enterprise



cercando direttamente le onde P^{1,2}, proprio come farebbe un cardiologo.

EPISODI RESPIRATORI:

Grazie alla registrazione delle respirazioni derivate dall'ECG², medilogAR è in grado di eseguire lo screening di potenziali episodi respiratori durante il sonno. Il sensore SpO₂² opzionale, connesso tramite Bluetooth, consente di ottenere ulteriori informazioni respiratorie.



MOLTO PIÙ DI UNO SCREENING DELL'ARITMIA

Individuazione istantanea della fibrillazione atriale^{1,2}, analisi degli episodi respiratori² e HRV ad alta risoluzione sono solo alcune delle eccezionali funzionalità di medilogAR. L'analisi viene effettuata utilizzando il prestigioso software medilog DARWIN2.

¹ Disponibile con medilogAR Professional

² Disponibile con medilogAR Enterprise



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Türkiye
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 133 331 2150
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.



SCHILLER
The Art of Diagnostics