

# ARGUS PRO LIFECARE 2

Die mobile Intensivstation mit Patientenmonitor,  
12-Kanal-EKG, Defibrillator und Schrittmacher



**SCHILLER**  
The Art of Saving Lives






**1** Linke Seitentasche: EKG, NIBD, Elektroden, linkes Paddle, LifePoint

**2** Rechte Seitentasche: SpO<sub>2</sub>, etCO<sub>2</sub>, IBD, Temp., rechtes Paddle

**3** EKG 4 plus 6

**4** IRMA / ISA Mainstream und Sidestream etCO<sub>2</sub>

# MIT ALLEN OPTIONEN NUR 4,4 KG – DER TRAUM JEDES RETTUNGSSANITÄTERS

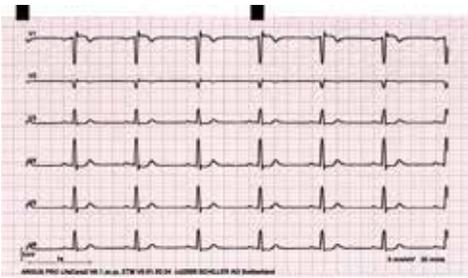

Patient Data		Vital Signs	
DOB	23.04.1987	HR	60 bpm
Age	42 years	SpO <sub>2</sub>	98%
Gender	Female	Temp	36.5°C
Weight	67 kg	IBD	36.9°C
Height	173 cm	IBD	36.9°C

Parameter	Value	Normal Range
HR	60 bpm	60-100 bpm
PR	160 ms	120-200 ms
QR	162 ms	120-200 ms
QT	382 ms	360-440 ms
QTc	404 ms	360-440 ms

Lead	I	II	III	aVR	aVL	aVF	V1	V2	V3	V4	V5	V6
R	0.152	0.123	0.119	-0.060	0.360	-0.100	0.020	0.095	0.146	0.129	0.160	0.160
S	-0.112	-0.112	-0.147	-0.189	-0.204	-0.140	-0.232	-0.265	-0.110	-0.100	-0.060	-0.060
T	0.085	0.202	0.202	0.000	0.000	0.000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100



## ARGUS LIFEPOINT

Mit dem wiederverwendbaren HLW-Feedbacksensor ARGUS LifePoint wird die Tiefe, Frequenz und Entlastung\* in Textform sowie grafisch angezeigt. Zudem ist der Sensor einfach zu positionieren.

\* Entlastung nicht verfügbar in Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und den USA.



Farbcodierte HLW-Unterstützung durch den ARGUS LifePoint

## 12 ABLEITUNGEN IN DER RUHE-EKG ANSICHT



## ÜBERWACHUNGSMODUS



# KOMPLETTE VITALDATENÜBERWACHUNG, DIAGNOSTIK UND THERAPIE

## VITALDATEN- ÜBERWACHUNG

**EKG:** Simultane 12-Kanal-EKG-Messung, automatische Kammerflimmerüberwachung

**NIBD:** Automatische Blutdruckmessung bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen

**PULSOXIMETRIE SpO<sub>2</sub>:** Masimo SET Rainbow, mit SpCO, SpMet, SpHb und PVI

**KAPNOGRAPHIE:** CO<sub>2</sub> im Haupt- und Nebenstrom messbar

**TEMPERATUR:** 2 simultane Messungen mit Sensoren zur Kern- und Hautoberflächentemperaturmessung

**INVASIVER BLUTDRUCK:** 2 simultane Messungen mit Anschlussmöglichkeiten verschiedener Druckaufnehmer

## DIAGNOSTIK

- ❖ 12-Kanal-EKG-Darstellung auf dem Bildschirm
- ❖ Ruhe-EKG-Ausdruck mit Vermessung und Interpretation
- ❖ Speicherung der aufgezeichneten Ruhe-EKGs
- ❖ Übertragung der aufgezeichneten Ruhe-EKGs als PDF-Datei an einen Mail-Account oder Hochladen der Daten an SEMA (SCHILLER's Datenmanagement System)
- ❖ Ausdruck eines simultanen 12-Kanal-EKGs
- ❖ Kontinuierlicher 6-Kanal-EKG-Ausdruck
- ❖ ST-Vermessung

## THERAPIE

**AED:** 1-2-3 Bedienung (Start AED-Analyse-Shockabgabe), automatische Erkennung von Kinder- und Erwachsenen-Pads

**DEFIBRILLATOR:** Verwendung von Pads und Paddels für Erwachsene und Kinder, synchrone und asynchrone Schockabgabe und Wechsel vom AED in manuellen Defibrillator-Modus

## SCHRITTMACHER

- ❖ Transkutane Stimulation über die Pads
- ❖ Fix- und Demand-Modus
- ❖ Pause und Overdrive-Modus
- ❖ Schrittmacher-Funktionsdarstellung während Vitaldatenüberwachung und Diagnostik

## DEFIBRILLATIONS MODUS



## SCHRITTMACHERMODUS



## LADEHALTERUNG

- ❖ Leichte und robuste Wandhalterung für Ambulanz, Flugzeug und Helikopter
- ❖ Einhandbedienung mit automatischer Verriegelung
- ❖ Netzanschluss über 100/230V Netzteil
- ❖ Bordnetz Anschluss 8-48 V DC
- ❖ USB-Schnittstelle
- ❖ Ethernet-Schnittstelle zur Datenübertragung
- ❖ VGA-Ausgang zum Anschluss eines Tochterbildschirms

## ROLLSTATIV-HALTERUNG

- ❖ Über eine VESA Adapterplatte kann die Ladehalterung an einem beliebigen VESA-kompatiblen Rollstativ befestigt werden

## TRAGENHALTERUNG

- ❖ Einfache Befestigung an den gängigsten Tragen
- ❖ Einfache, automatische Verriegelung beim Einsetzen in die Halterung

### WANDHALTERUNG



### TRAGENHALTERUNG





ARGUS PRO Lifecare 2, die zuverlässige Lösung für den Einsatz in der Luft, auf dem Boden oder auf dem Wasser.

**FLEXIBEL EINSETZBARE  
HALTERUNG FÜR JEDEN  
RETTUNGSEINSATZ**



**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
info@schiller.fr  
www.schiller.fr



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99 0  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai – 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Switzerland**  
SCHILLER-Reomed AG  
CH-8912 Obfelden  
Phone +41 44 744 30 00  
sales@schiller-reomed.ch  
www.schiller-reomed.ch



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology  
Co., Ltd.  
100102 Beijing, China  
Phone +86 10 84565453  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 647 35 90  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Türkiye**  
SCHILLER TÜRKIYE  
Okmeydani-Sisli – Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
info@schillerzg.hr  
www.schiller.hr



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
119049 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**United Kingdom**  
SCHILLER UK Ltd.  
Anstruther, Fife KY10 3H  
Phone +44 133 331 2150  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit



**SCHILLER**  
The Art of Saving Lives