

ARGUS PRO LIFECARE 2

Unité mobile de soins intensifs, équipée d'un moniteur de surveillance, d'un ECG 12 dérivations, d'un défibrillateur et d'un stimulateur cardiaque.




SCHILLER
The Art of Saving Lives

ARGUS PRO LIFECARE 2

En cas d'urgence : ARGUS PRO LifeCare 2 de SCHILLER.

- ⋄ Défibrillateur/moniteur
- ⋄ Fonctionnalités de diagnostic avancées : ECG de repos à 12 dérivations avec interprétation ETM
- ⋄ Robuste et léger, certifié pour une utilisation dans les ambulances et à bord d'hélicoptères et d'avions

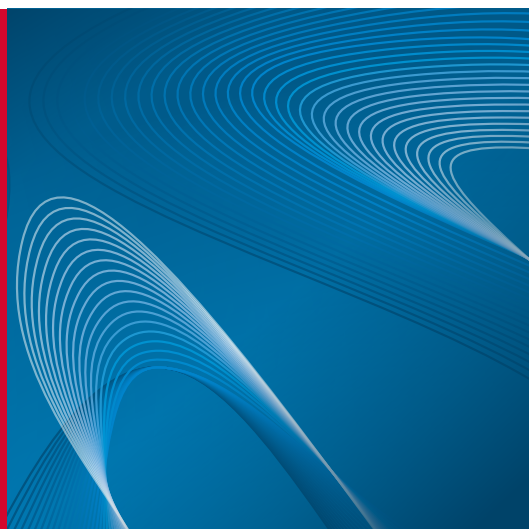

Qu'il s'agisse de soins médicaux d'urgence, de transport intrahospitalier de patients ou de leur transfert inter-hospitalier, l'ARGUS PRO LifeCare 2 effectue toutes les interventions de façon irréprochable, et ce dans un appareil compact pesant moins de 4 kilos.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ÉCRAN COULEUR 8.4" Une lisibilité exceptionnelle même en plein soleil ou à distance, configuration individuelle des 6 courbes et de tous les paramètres, diagnostic ECG 12 dérivations.

TOUCHES DE FONCTION: Touches de fonction directes pour accéder aux divers modes ainsi qu'aux fonctions les plus importantes

TOUCHES MULTIFONCTION: 7 touches multifonction pour un accès facile et rapide aux diverses fonctions du mode actuel.

IMPRIMANTE 6 PISTES

- ⋄ Papier d'une largeur de 144mm permettant d'afficher jusqu'à 6 courbes
- ⋄ Affichage d'un ECG de repos
- ⋄ Impression des rapports d'intervention
- ⋄ Longueur du rouleau de papier: 30m, plié en accordéon
- ⋄ Formats d'impression configurables individuellement

2 INTERFACES USB: Exportation des données d'intervention sur une clé USB, sauvegarde et chargement des configurations de l'appareil, mise à jour du logiciel

12 dérivations sur l'affichage de l'ECG de repos





1 Pochette latérale gauche: ECG, PNI, électrodes, palette gauche, LifePoint

2 Pochette latérale droite: SpO₂, etCO₂, PI, température, palette droite

3 ECG 4 plus 6

4 IRMA / ISA flux principal et flux latéral etCO₂

TOUTES LES OPTIONS EN SEULEMENT 4.4 KG, ÇA SIMPLIFIE LA VIE DES SECOURISTES



Patient Data		Vital Signs	
Sex	Age	HR	SpO ₂
M	55	60	98
Interpretation: Sinus rhythm. Left atrial abnormality. Normal electrical axis. ST TQ ST pattern. Left ventricular hypertrophy with ST-T segment abnormality. Consider right ventricular hypertrophy. QRS normal. Consider bundle branch block. Abnormal ECG.			
Lead	R	S	T
I	0.150	0.125	0.110
II	0.110	0.110	0.110
III	0.110	0.110	0.110
aVR	0.110	0.110	0.110
aVL	0.110	0.110	0.110
aVF	0.110	0.110	0.110
V1	0.110	0.110	0.110
V2	0.110	0.110	0.110
V3	0.110	0.110	0.110
V4	0.110	0.110	0.110
V5	0.110	0.110	0.110
V6	0.110	0.110	0.110



ARGUS LIFEPOINT

ARGUS LifePoint apporte une aide au massage cardiaque. Grâce à ce capteur réutilisable, la profondeur, la fréquence et la décompression* peuvent être affichées sous forme textuelle et graphique. L'appareil peut également être positionné facilement.

* Phase de décompression active non disponible au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis.



Assistance à la RCP par code couleur grâce à l'ARGUS LifePoint

12 DÉRIVATIONS SUR L'AFFICHAGE DE L'ECG DE REPOS



MODE MONITORAGE



MONITORAGE COMPLET DES DONNÉES VITALES, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT

MONITORAGE DES DONNÉES VITALES

ECG: mesure simultanée de l'ECG 12 dérivation, monitoring automatique de la fibrillation ventriculaire

PNI: mesure automatique de la tension artérielle pour adultes, enfants et nourissons

OXYMÉTRIE DE POULS SpO_2 :
Masimo SET Rainbow, avec $SpCO$, $SpMet$, $SpHb$ et IVP

CAPNOGRAPHIE: CO_2 mesures du flux principal et du flux latéral possibles

TEMPÉRATURE: 2 mesures simultanées de la température centrale et cutanée

PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE:
2 mesures simultanées, connexion de divers capteurs de pression

DIAGNOSTIC

- ❖ Affichage à l'écran de l'ECG 12 dérivation
- ❖ Impression de l'ECG de repos, avec mesures et interprétation
- ❖ Stockage des enregistrements d'ECG de repos
- ❖ Transmission des enregistrements d'ECG de repos au format PDF ou vers un compte de messagerie électronique, ou téléchargement des données sur SEMA (système de gestion des données SCHILLER)
- ❖ Impression simultanée d'un ECG 12 dérivation
- ❖ Impression en continu d'un ECG 6 dérivation
- ❖ Mesures du segment ST

TRAITEMENT

DAE: opérations simples à effectuer (analyse de la délivrance du choc), reconnaissance automatique des électrodes pour adultes ou enfants

DÉFIBRILLATEUR: utilisation d'électrodes ou de palettes pour adultes ou enfants, délivrance de choc synchrone ou asynchrone, passage du mode DAE au mode de défibrillation manuelle

STIMULATEUR CARDIAQUE

- ❖ Stimulation transcutanée avec électrodes
- ❖ mode fixe ou à la demande
- ❖ mode veille ou overdrive
- ❖ fonction stimulateur lors du monitoring des données vitales et du diagnostic

MODE DÉFIBRILLATION



MODE STIMULATEUR CARDIAQUE



SUPPORT POUR CHARGEUR

- ❖ Support mural léger et robuste pour ambulances, avions et hélicoptères
- ❖ Utilisation d'une seule main avec mécanisme de verrouillage automatique
- ❖ Raccordement au réseau par le bloc d'alimentation 100/230V
- ❖ Connexion de l'alimentation électrique du véhicule 8-48 V DC
- ❖ Interface USB
- ❖ Interface Ethernet pour transfert des données
- ❖ Connexion VGA pour l'unité d'affichage

SUPPORT MOBILE

- ❖ Le support du chargeur peut être fixé à l'aide d'un adaptateur VESA sur un support mobile compatible avec le standard VESA

SUPPORT POUR BRANCARD

- ❖ Installation simple à effectuer sur la plupart des brancards
- ❖ Mécanisme de verrouillage automatique

SUPPORT MURAL



SUPPORT POUR BRANCARD





ARGUS PRO Lifecare 2, une solution fiable pour les interventions aériennes, terrestres ou maritimes.

**SUPPORT ADAPTABLE POUR
TOUTES LES OPÉRATIONS
D'URGENCE**



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Türkiye
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 133 331 2150
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.