

ARGUS PRO LIFECARE 2

L'unità di terapia intensiva mobile con monitor paziente, ECG a 12 derivazioni, defibrillatore e pacemaker




SCHILLER
The Art of Saving Lives

ARGUS PRO LIFECARE 2

In caso di emergenza: ARGUS PRO LifeCare 2 di SCHILLER.

- ✧ Defibrillatore/monitor
- ✧ Funzioni di diagnostica sofisticate: ECG a riposo a 12 derivazioni con interpretazione ETM
- ✧ Robusto e leggero, certificato per l'uso in ambulanze, elicotteri ed aeromobili

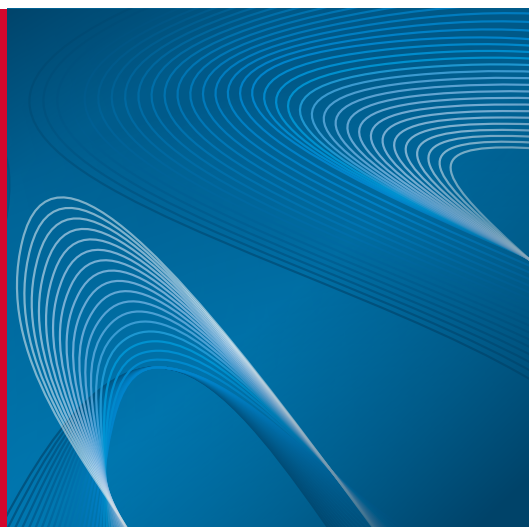

Sia che si tratti di prestazioni sanitarie d'urgenza, trasporto di pazienti ospedalizzati o trasferimenti di pazienti interospedalieri, ARGUS PRO LifeCare 2 esegue incondizionatamente tutti gli interventi ed è caratterizzato da un design compatto con un peso inferiore a 4 kg.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DISPLAY A COLORI 8,4": Straordinaria leggibilità persino in caso di luce del sole intensa e a distanza, 6 forme d'onda e tutti i parametri configurabili singolarmente, ECG diagnostico con tutte le 12 derivazioni

TASTI FUNZIONE: Tasti funzione diretti per accedere alle varie modalità e alle principali funzionalità


TASTI PROGRAMMABILI: 7 tasti programmabili per un accesso semplice e rapido alle principali funzioni della modalità del dispositivo corrente

STAMPANTE A 6 CANALI

- ✧ Larghezza carta 114 mm per una visualizzazione fino a 6 curve
- ✧ Visualizzazione dell'ECG a riposo
- ✧ Stampa dei referti di intervento
- ✧ Lunghezza carta: 30 m, piegata a Z
- ✧ Formati di stampa configurabili singolarmente

2 INTERFACCE USB: Esportazione dei dati di intervento su una chiavetta di memoria USB, salvataggio e caricamento delle configurazioni del dispositivo, aggiornamento software

12 derivazioni nella visualizzazione di ECG a riposo

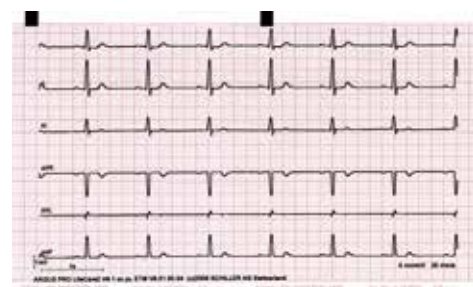



ARGUS LIFEPOINT

Grazie al sensore di feedback per CPR riutilizzabile di ARGUS LifePoint, la profondità, la frequenza ed il rilascio* possono essere visualizzati sotto forma testuale e grafica. Il dispositivo agevola inoltre le operazioni di posizionamento.

* Rilascio non disponibile in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.



Assistenza alla CPR con codice colore mediante l'ARGUS LifePoint

12 DERIVAZIONI NELLA VISUALIZZAZIONE DI ECG A RIPOSO



MODALITÀ MONITORAGGIO



MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI COMPLETO, DIAGNOSI E TERAPIA

MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI

ECG: Misurazione di ECG a 12 derivazioni in modalità simultanea, monitoraggio automatico della fibrillazione ventricolare

NIBP: Misurazione automatica della pressione arteriosa per adulti, bambini e neonati

PULSOSSIMETRIA SpO₂: Masimo Rainbow SET con SpCO, SpMet, SpHb e PVI

CAPNOGRAFIA: Possibilità di misurazione CO₂ sia mainstream che sidestream

TEMPERATURA: 2 misurazioni simultanee per temperatura interna e cutanea

PRESSIONE ARTERIOSA INVASIVA: 2 misurazioni simultanee, connessioni per vari sensori di pressione

DIAGNOSTICA

- ❖ Visualizzazione dell'ECG a 12 derivazioni sullo schermo
- ❖ Stampa di ECG a riposo con misurazione e interpretazione
- ❖ Salvataggio degli ECG a riposo registrati
- ❖ Trasmissione di ECG a riposo registrati come file PDF a un account e-mail o download dei dati su SEMA (sistema di gestione dei dati di SCHILLER)
- ❖ Stampa di ECG a 12 derivazioni in modalità simultanea
- ❖ Stampa di ECG a 6 canali in modalità continua
- ❖ Misurazione ST

TERAPIA

AED: Semplice funzionamento 1-2-3 (analisi AED dell'erogazione di scariche), rilevamento automatico di elettrodi per adulti o bambini.

DEFIBRILLATORE: Utilizzo di elettrodi e piastre per adulti e bambini, erogazione di scariche in modalità sincrona o asincrona, passaggio dalla modalità AED alla modalità di defibrillazione manuale.

PACEMAKER

- ❖ Stimolazione transcutanea attraverso gli elettrodi
- ❖ Modalità Fissa e Su richiesta
- ❖ Modalità Pausa e Overdrive
- ❖ Funzione pacemaker durante la diagnostica e il monitoraggio dei parametri vitali

MODALITÀ DEFIBRILLAZIONE



MODALITÀ PACEMAKER



ATTACCO PER CARICABATTERIE

- ❖ Attacco a parete leggero e robusto per ambulanze, aeromobili ed elicotteri
- ❖ Utilizzo con una sola mano con meccanismo di blocco automatico
- ❖ Connessione di rete tramite unità di alimentazione da 100/230 V
- ❖ Connessione alimentazione veicolo da 8-48 V c.c.
- ❖ Interfaccia USB
- ❖ Interfaccia Ethernet per trasferimento dati
- ❖ Connessione VGA per unità di visualizzazione

ATTACCO PER CARRELLO

- ❖ L'attacco per caricabatterie può essere fissato su qualsiasi carrello compatibile con gli standard VESA utilizzando una piastra adattatore VESA

ATTACCO PER BARELLA

- ❖ Attacco per montaggio facilitato sulla maggior parte delle barelle comuni
- ❖ Semplice meccanismo di blocco automatico

ATTACCO A PARETE



ATTACCO PER BARELLA





ARGUS PRO Lifecare 2, la soluzione affidabile adatta per interventi via terra, acqua e aria

ATTACCO FLESSIBILE PER QUALSIASI OPERAZIONE DI SOCCORSO



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Türkiye
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 133 331 2150
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.



SCHILLER
 The Art of Saving Lives