



EASY PULSE®

CPR meccanica efficace e compatta grazie all'innovazione tecnologica


La CPR automatica di ultima generazione



SCHILLER
The Art of Saving Lives

EASY PULSE®

SCHILLER ha compiuto un passo avanti nel miglioramento della qualità della CPR con il lancio di un compressore toracico meccanico incredibilmente piccolo e leggero: EASY PULSE.

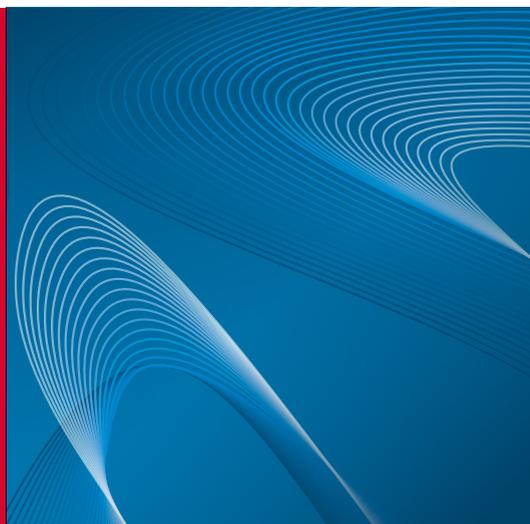

L'esecuzione manuale di compressioni toraciche in modo corretto per un periodo di tempo prolungato è pressoché impossibile. Tale attività non richiede solo un grande sforzo fisico, ma deve essere simultaneamente accompagnata anche da altre azioni, quale il monitoraggio dei parametri vitali e la defibrillazione.

EASY PULSE di SCHILLER è la soluzione per una rianimazione più efficace: questo dispositivo portatile e autonomo fornisce automaticamente compressioni toraciche a una frequenza e una profondità costanti. Essendo direttamente collegato alla parte superiore del corpo del paziente, può essere utilizzato in qualsiasi situazione. Soprattutto durante il trasporto, è possibile garantire compressioni toraciche di alta qualità senza interruzioni.

EASY PULSE è un dispositivo talmente semplice che può essere utilizzato da una sola persona. Le dimensioni e il peso sono ineguagliabili: EASY PULSE pesa infatti meno di 3,5 kg e offre così nuove possibilità, ad es. ai servizi di soccorso aereo.

DISPOSITIVI CPR AUTOMATICI DI ULTIMA GENERAZIONE

EASY PULSE è caratterizzato da una combinazione unica di pistone e fascia (Stamp & Band) che consente la compressione tridimensionale e quindi la massima efficienza.

Il peso del dispositivo è distribuito uniformemente sulla piastra di appoggio e non su un solo punto, per cui non influisce sulle compressioni toraciche o sull'indietreggiamento.



CURSORE

Il cursore agevola le operazioni di preparazione del paziente per le compressioni toraciche meccaniche. Richiede inoltre pochissimo tempo per il collegamento del dispositivo grazie al pratico sistema con fibbia: meno di 15 secondi per personale adeguatamente addestrato.



CARICABATTERIE

Caricabatterie per 2 batterie ricaricabili. Scomparto 1 per ricarica rapida in circa 45 minuti; in caso di ricarica contemporanea di due batterie, il tempo di ricarica standard è di circa 2 ore. Una carica completa della batteria consente un funzionamento di circa 45 minuti.



FACILE DA UTILIZZARE

In caso di emergenza è importante fare sempre la mossa giusta. EASY PULSE è semplice e intuitivo da utilizzare: basta premere due pulsanti per avviare immediatamente la rianimazione.



ALIMENTAZIONE ESTERNA E CAVO DI CONNESSIONE DIRETTA

In dotazione viene fornito un alimentatore per una tensione di ingresso compresa tra 100 e 240 V c.a. EASY PULSE può essere utilizzato direttamente con una modalità di alimentazione compresa tra 12 e 48 V c.c. tramite uno speciale cavo di connessione.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Leggero

- ❖ Dispositivo CPR ad alimentazione elettrica incredibilmente piccolo e leggero, con un peso di 3,5 kg
- ❖ Ideale per spazi ristretti

Completo

- ❖ Compressioni toraciche multidirezionali (3D)
- ❖ Compressioni toraciche di alta qualità a una frequenza e una profondità costanti, impossibili da ottenere con compressioni manuali
- ❖ Possibilità di ciclo compressione-ventilazione 30:2

Semplice

- ❖ Grazie al sistema con cursore e fibbia, il dispositivo può essere facilmente collegato alla parte superiore del corpo
- ❖ Facile da posizionare - facile da utilizzare

Funzioni opzionali

- ❖ Batteria sostituibile con indicatore del livello di carica
- ❖ Funzionamento autonomo per 45 minuti (con una batteria)
- ❖ Connessioni: ingresso c.c. esterno, USB



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

La disponibilità del dispositivo sul mercato è soggetta ad approvazione normativa.



SCHILLER
The Art of Saving Lives