

FRED easy G2

AED flexible, robusto e intuitivo




FRED easy G2

El compañero ideal durante cualquier intervención

Desfibrilador FRED easy G2 de SCHILLER:

- Diseñado para el soporte vital básico y avanzado
- Guía durante toda la intervención
- Complementa todo kit de emergencias

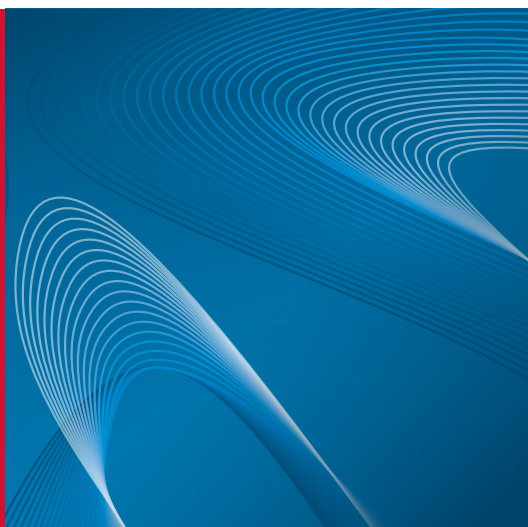

El desfibrilador FRED easy G2 ofrece información para una RCP eficaz, administrando descargas rápidas a demanda.

ADAPTADO A CUALQUIER USUARIO

El equipo está disponible en los modos automático y semiautomático, guiando al usuario profano y ofreciendo flexibilidad al usuario profesional.

COMPLEMENTA EL EQUIPO DE EMERGENCIAS

Compacto y ligero, el producto ofrece movilidad y flexibilidad cuando el tiempo es un factor crítico, ideal para servicios de emergencias, centros sanitarios e infraestructuras hospitalarias.

INTELIGENTE Y LISTO PARA LA ACCIÓN

Un LED verde parpadea cuando el equipo está listo para usar. El equipo realiza autopruebas diarias, semanales o mensuales (configurables) para garantizar su funcionalidad.

PANTALLA DE ALTA CALIDAD

La gran pantalla táctil capacitiva LCD en color de 5", ofrece una facilidad de uso sin igual. Su alta resolución y gran brillo proporcionan una legibilidad óptima de los mensajes en todo momento.

MINIMIZACIÓN DEL TIEMPO SIN CONTACTO

Las guías internacionales destacan la importancia de reducir al mínimo el retraso en la administración de la descarga. FRED easy G2 incorpora un sistema de análisis optimizado. El desfibrilador se carga sistemáticamente para administrar una descarga en cuanto el equipo lo recomienda.

ASISTENCIA MEJORADA EN LA RCP

Consiga la máxima eficiencia en las compresiones torácicas gracias a:

- **Metrónomo:** Proporciona el ritmo correcto a seguir durante la RCP. Puede desactivarse para ofrecer más flexibilidad al usuario.
- **FreeCPR (opción):** Para mejorar la calidad de la reanimación, el equipo incluye una función de información sobre la RCP. Mide la frecuencia de las compresiones a través de los electrodos de desfibrilación.



Tanto si elige FRED easy G2 está disponible en una versión semiautomática (equipo de la izquierda) y totalmente automática (equipo de la derecha).

❖ **ARGUS LifePoint 2 (opción):** Colocado en el esternón, el sensor ofrece información sobre la profundidad, la frecuencia y el retroceso de las compresiones* durante la RCP. La calidad de las compresiones se muestra mediante un código de color en la pantalla: compresión más rápida, más lenta, más profunda, menos profunda, RCP OK. El usuario también puede seguir mensajes de voz.

La forma del ARGUS LifePoint 2 se adapta al talón de la mano. El sensor está fabricado con caucho muy resistente, es reutilizable y muy fácil de limpiar.

* El retroceso no está disponible en Francia, Alemania, Reino Unido ni Estados Unidos

MODULO PEDIÁTRICO INTEGRADO

El FRED easy G2 reconoce los electrodos conectados y selecciona los niveles de energía de desfibrilación requeridos. Los electrodos para adultos también se pueden utilizar en niños. En ese caso, es preciso seleccionar el modo pediátrico pulsando el botón Adulto/Pediátrico del panel frontal. Hay mensajes de voz y texto, así como un indicador LED, que avisan al usuario de que está en modo pediátrico.

MULTILINGÜE (OPCIÓN)

Dependiendo de la configuración del equipo, puede seleccionar cuatro idiomas predefinidos. La opción multilingüe permite colocar el equipo fácilmente en espacios públicos en entornos internacionales.





COMUNICACIÓN

La conectividad del equipo permite recopilar los eventos y transferirlos a los servicios médicos de forma rápida y sencilla. Los datos de la intervención se pueden enviar de forma automática o manual utilizando varios modos:

- USB
- Bluetooth
- Red móvil (opcional)
- Wi-Fi



La conexión USB del host también admite actualizar el software y la configuración, y se conecta al sensor ARGUS LifePoint 2.

El equipo cumple con todos los requisitos legales en materia de protección de datos.

PARQUES DE DESFIBRILACIÓN INTELIGENTES

El FRED easy G2 emite una alerta sobre la fecha de caducidad de los parches de desfibrilación, lo que permite un gestión fácil.

LIFEDATANET G2 (OPCIÓN)

El FRED easy G2 se puede gestionar fácilmente utilizando el LifeDataNet G2. Podrá visualizar sus AED en un mapa interactivo, comprobar si todos los equipos funcionan correctamente o si una unidad necesita atención.

Las actualizaciones de software se pueden programar y realizar a distancia, desde cualquier sitio.

Si durante la autoprueba se detecta cualquier anomalía en el equipo, un nivel bajo de la batería o electrodos caducados, se envía una notificación por correo electrónico.

Semiautomático para mayor flexibilidad

Adecuado para todos los profesionales

El modo semiautomático para todo profesional:

- Proporciona información sobre la RCP
- Avisa al usuario para que administre una descarga



ADECUADO PARA TODOS LOS PROFESIONALES

Para uso profesional, el FRED easy G2 ofrece distintas posibilidades. Guía al usuario para realizar una RCP de calidad, a través de FreeCPR (opción) o el sensor ARGUS LifePoint 2 (opción). El desfibrilador está perfectamente adaptado a cualquier departamento de los centros sanitarios y los hospitales.

SEMIAUTOMÁTICO PARA TODOS

Esta versión del equipo satisface las necesidades tanto de los usuarios profanos como de los profesionales de la salud. El FRED easy G2 se puede configurar fácilmente para que proporcione instrucciones cortas por voz, si es necesario. Si después del análisis automático se detecta un ritmo desfibrilable, se indica al usuario que administre una descarga pulsando el botón naranja.



Totalmente automático para mayor sencillez

Un modo sencillo para todos

El modo totalmente automático para mayor sencillez:

- Permite al usuario una mayor confianza al realizar la reanimación
- Ayuda a realizar las compresiones torácicas con el FreeCPR y el metrónomo



PREPARADO PARA TODOS LOS USUARIOS

Gracias a su sencilla interfaz, el modo automático guía al usuario mediante claras imágenes gráficas en color junto con indicaciones de mensajes de voz y texto. De esta forma, el usuario puede seguir instrucciones más detalladas y es guiado en cada paso durante la terapia.

EQUIPO AUTÓNOMO

El usuario solo tiene que encender el equipo y seguir las instrucciones. No se necesita ninguna interacción adicional con el equipo. El análisis se activa automáticamente sin intervención del usuario. Si es necesario administrar una descarga, el equipo la administra directamente. Si no, informa al usuario de que continúe con las compresiones torácicas.

FREECPR (OPCIÓN) Y METRÓNOMO

En la versión automática, el metrónomo ayuda al usuario a seguir un ritmo constante durante las compresiones torácicas. Con FreeCPR (opcional), hay mensajes de voz y de texto que guían al usuario para que presione con mayor o menor rapidez, sin necesidad de un sensor adicional. El usuario solo tiene que escuchar los mensajes de voz y seguir las instrucciones de la pantalla.

Resumen de las principales características

BOTÓN ON/OFF

Pulse el botón verde para encender/apagar el equipo

LED RTU

La luz verde intermitente indica que el equipo está listo para usar (RTU).

BOTÓN DE TRANSFERENCIA DE DATOS

Transmisión directa de los datos

INDICADOR LED NARANJA

El LED indicador está encendido mientras no hay electrodos conectados

CONECTOR DE ELECTRODOS

Tanto para adultos como para niños

BOTÓN ADULTO/ PEDIÁTRICO

Cambia entre los modos de adulto y pediátrico cuando se utilizan electrodos para adultos en niños.

ALTAVOZ

Puede ajustar el volumen para poder oír los mensajes de voz en todas las situaciones

RESISTENTE

Gracias a su clase de protección IP55, el equipo resiste a las salpicaduras de agua y cuenta con la certificación IK07

BOTÓN DE DESCARGA

Pulsar para administrar una descarga en modo semiautomático

BATERÍA

Batería recargable o no recargable

PANTALLA TÁCTIL LCD

Pantalla táctil capacitiva LCD en color, protegida con cristal templado. Alto contraste, pantalla legible en condiciones de luz intensa





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño, las especificaciones y las características mostradas, o a suspender la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación. Las imágenes pueden ser representativas. Algunos productos pueden no estar autorizados por la normativa o no estar a la venta en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de SCHILLER para obtener la información y la disponibilidad más actuales.

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745: III; Organismo notificado: GMED CE0459; Fabricante: SCHILLER Medical; Lea atentamente la guía de usuario antes de usar el FRED easy G2.

