




FRED easy



Le défibrillateur automatique externe qui accompagne tous les secouristes dans leur mission de sauvetage

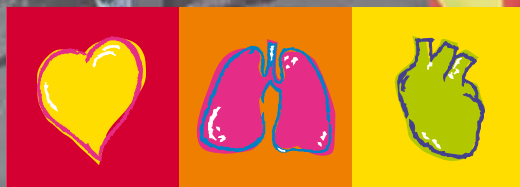

SCHILLER

The Art of Diagnostics

FRED easy

Le défibrillateur automatique externe FRED easy est le meilleur outil de sauvetage pour tous les services d'urgence : services de secours, ambulances, pompiers...

Il est léger, robuste, simple d'utilisation et donc adapté à toutes les situations.


Le FRED easy utilise MULTIPULSE BIOWAVE, la forme d'onde biphasique pulsée avec compensation de l'impédance du patient. Cette forme d'onde est aussi efficace pour les adultes que pour les enfants grâce à la reconnaissance automatique des électrodes enfants et à l'adaptation de l'énergie.

Les instructions sous forme vocale et à l'écran adaptées aux secouristes ainsi que l'analyse rapide du rythme et la délivrance du choc guident le secouriste tout au long du processus de réanimation et minimise le temps de non-intervention.

Afin de suivre le patient du début à la fin du processus de réanimation, les données d'intervention sont enregistrées et peuvent être consultées sur un PC. Il est également possible de générer un rapport.

Le FRED easy se décline en plusieurs versions et options afin de répondre à tous les besoins du secouriste :

- Version semi- ou entièrement automatique
- Métronome : cette option fournit le rythme approprié pour les compressions thoraciques
- Affichage de l'ECG
- Reprise en mode manuel : les médecins peuvent désactiver le mode automatique et décider s'ils souhaitent défibriller ou non

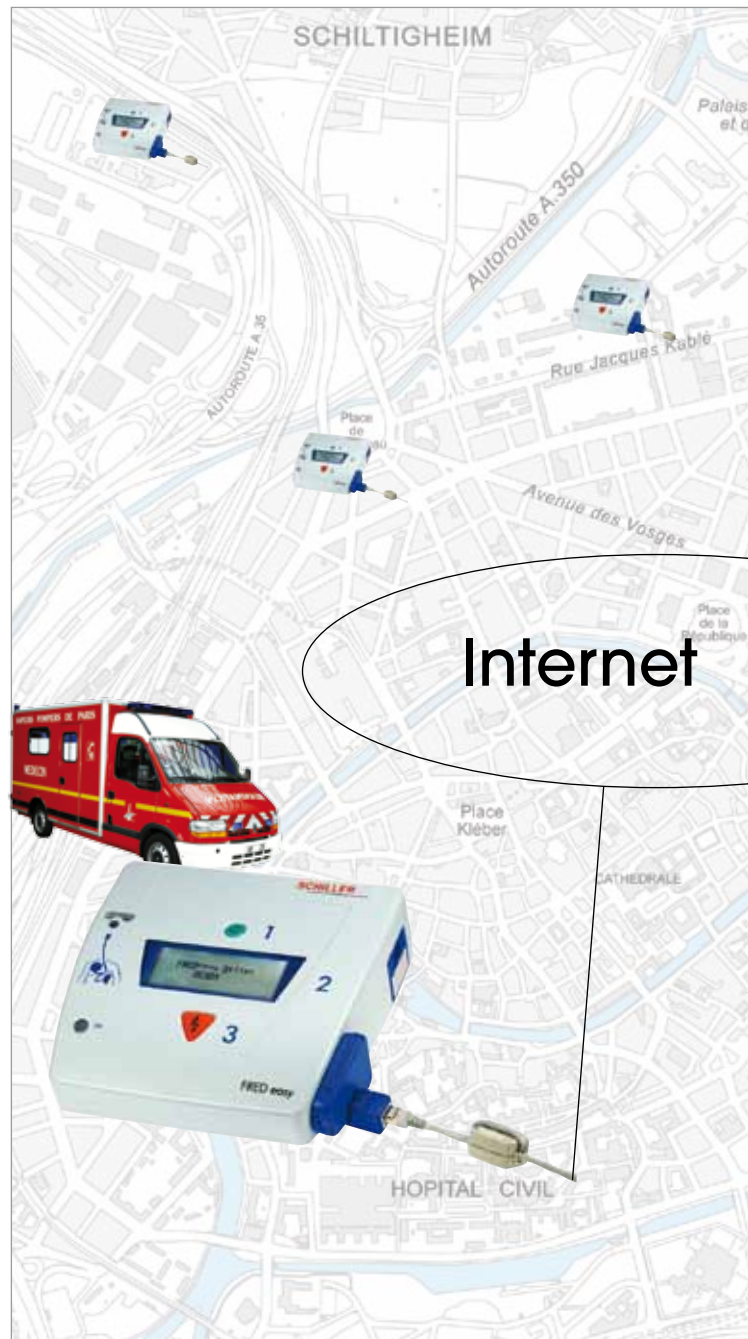


FRED easy avec reprise en mode manuel



FRED easy entièrement automatique



Affichage de l'ECG

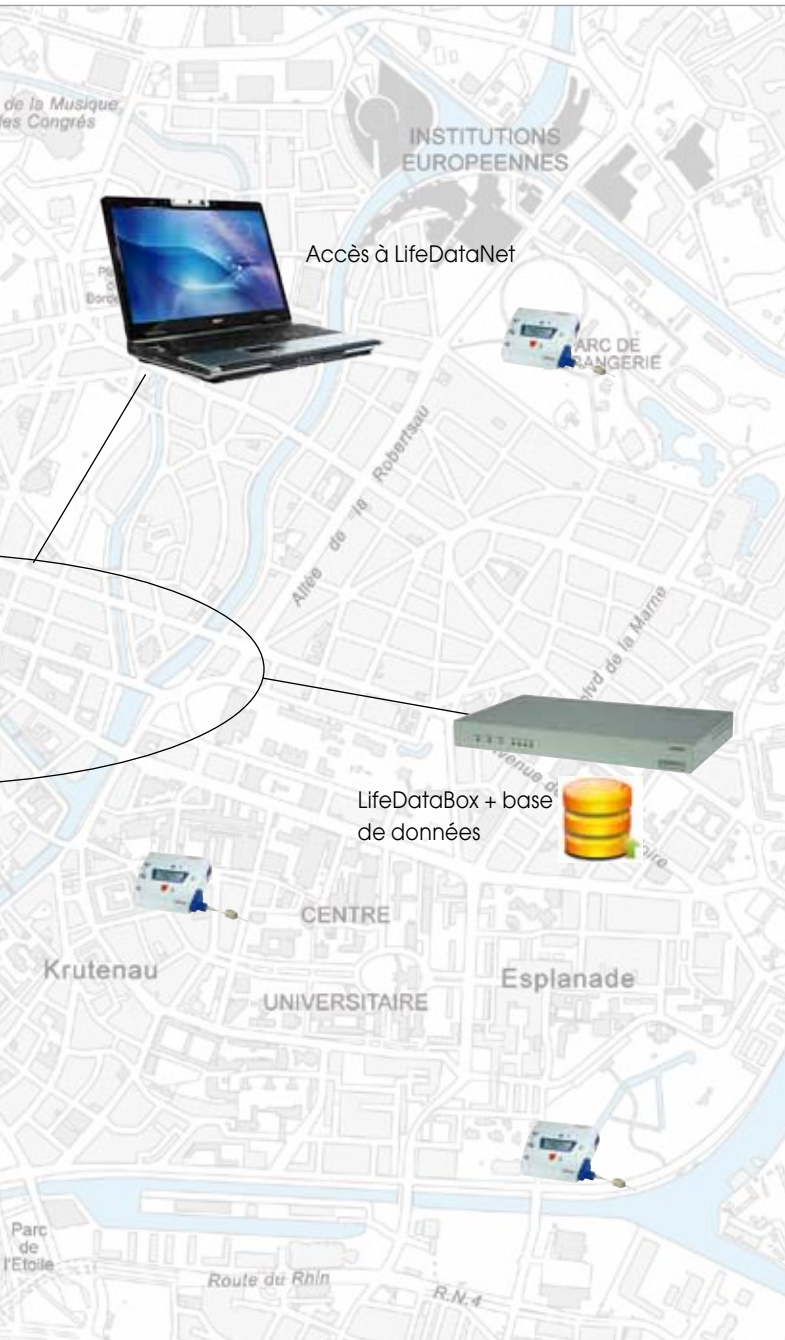

FRED easy Online

Le premier défibrillateur permettant de transmettre les données de façon automatique.

Les données d'intervention et la configuration de l'appareil peuvent être envoyées à un serveur via un réseau Ethernet.

Avantages pour tous :

La transmission est facile, rapide et sûre. Le stockage des données est centralisé pour garantir aux personnes autorisées un accès direct et immédiat à partir de n'importe quel ordinateur connecté au réseau. Accès multi-utilisateurs aux données via tout ordinateur connecté au réseau (hôpital, médecin traitant, cardiologue, services de secours, administration). Le système simplifie considérablement la gestion médicale et administrative des données patient (plus de papier, plus de carte mémoire).

LifeDataNet :

Les données transmises sont stockées sur un serveur central (LifeDataBox) équipé de l'application LifeDataNet.

Il est possible de transmettre deux types de données :

- Données patient (événements, courbe ECG, impédance du patient)
- Informations relatives à la configuration et à la maintenance

L'application LifeDataNet est une interface simple et conviviale qui vous permet de :

- voir quel appareil a transmis les données (numéro de série, identification, date et heure de la transmission) ;
- télécharger et analyser les données patient ;
- visualiser les réglages de l'appareil (mode, réglages de l'énergie, options) ;
- visualiser l'état de maintenance (résultat de l'autotest, état de la batterie, version du logiciel).

Lorsqu'un véhicule de secours revient au poste de secours, connectez simplement le FRED easy au réseau : les données sont alors téléchargées automatiquement et l'appareil est prêt pour une nouvelle intervention.

Schiller offre également ARGUS PRO LifeCare 2 et DG4000 pour effectuer une réanimation et une surveillance avancées du patient.



ARGUS PRO LifeCare 2



DEFIGARD 4000



Asia

SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria

SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China

SCHILLER Int'l Trading (Shanghai) Co. Ltd.
200335 Shanghai, China
Phone +86-21-62099627
Fax + 86-21-62099623
sales@schiller.com.my
www.schiller.cn



France

SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)

SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany

SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85521 Ottobrunn
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary

SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India

SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Japan

SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp



Poland

SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.

SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Spain

SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland

SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Diefikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey

SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA

SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33122
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

11/11



Part no.: 2.500379



SCHILLER

The Art of Diagnostics