

FRED EASYPORT PLUS


Der kleine und leistungsfähige Defibrillator für jedermann, jederzeit, überall



FRED EASYPORT PLUS

Der ideale Begleiter für unterwegs

Der Taschendefibrillator FRED easyport plus passt in jede Ärztetasche und in jedes Notfallkit – der ideale Begleiter für jeden Einsatz.

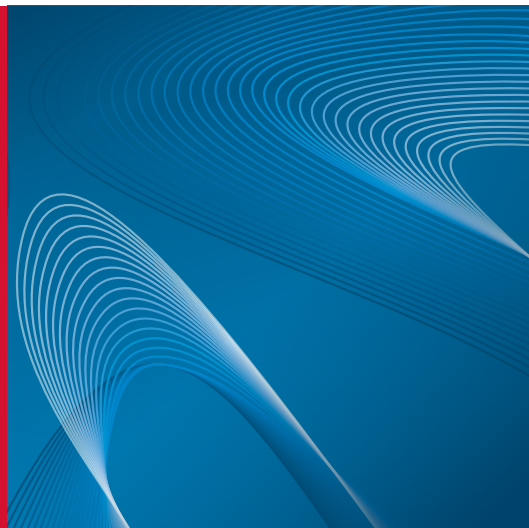

ES GEHT UNS ALLE AN

Weltweit erleiden jährlich mehr als 7 Millionen Menschen einen plötzlichen Herzstillstand. Es kann jederzeit jemanden treffen, egal wo, egal wann.

Während der Defibrillation wird elektrische Energie ans Herz abgegeben um den richtigen Herzrhythmus wiederherzustellen. Defibrillation in Kombination mit adäquater Herzdruckmassage ist die einzige Therapieform, welche das Leben eines Patienten retten kann.

LEICHT UND KLEIN

Der Taschendefibrillator FRED easyport plus wiegt nur 780 Gramm und kombiniert geringe Grösse mit umfangreicher Funktionalität.

SCHOCK SOFORT BEREIT, FALLS NÖTIG

Internationale Richtlinien unterstreichen die Wichtigkeit, die Dauer bis zur Schockabgabe so kurz wie möglich zu halten. Um diese Dauer zu minimieren verfügt der FRED easyport plus über ein rasches Analysesystem. Zudem lädt er die benötigte Energie systematisch, so dass der Schock abgegeben werden kann sobald das Gerät einen Schock empfiehlt.

AUF JEDEN BENUTZER ANGEPASST

Der FRED easyport plus ist geeignet für regelmässige wie auch seltene Benutzer von Defibrillatoren. Er kann mit einem wiederaufladbaren Akku oder mit Einweg-Batterien betrieben werden. Das externe Ladegerät kann zwei Akkus gleichzeitig aufladen.

HLW-FEEDBACK

Defibrillation alleine reicht nicht aus. Um die Organe mit genügend Sauerstoff zu versorgen, muss die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) korrekt durchgeführt werden um eine Durchblutung wiederherzustellen.

Um eine möglichst effiziente Herzdruckmassage zu erreichen, unterstützt Sie der FRED easyport plus wie folgt:

- ❖ Anzeige der korrekten Tiefe, Frequenz und Entlastung*
- ❖ Vorgabe eines regelmässigen Rhythmus via Metronom

Mit dem ARGUS LifePoint-Sensor wird der Benutzer während der Herzdruckmassage akustisch und visuell mit farbcodierten Meldungen auf der Anzeige unterstützt.

* Entlastung nicht verfügbar in Frankreich, Deutschland, Grossbritannien und den USA



INFORMATIONS- ÜBERWACHUNG

Der FRED easyport plus zeichnet Interventionsdaten auf, wodurch Ärzte und Notärzte einen besseren Überblick über den Zustand des Patienten erhalten.

- HLW-Qualität
- EKG-Kurve
- Impedanzkurve
- Ereignisse

ABRUF VON INFORMATIONEN

Dank der USB- und Bluetooth-Funktionalitäten können gespeicherte Dateien ganz einfach im Datenverwaltungssystem SEMA von SCHILLER geprüft und verwaltet werden.

FINDEN SIE DAS GERÄT, DAS ZU IHNEN PASST

Der FRED easyport plus ist in drei Versionen verfügbar, welche auf die verschiedenen Benutzerstufen angepasst sind.



AED FIRST

Der halb-automatische FRED easyport plus mit seinem grauen Gehäuse erfordert die Bestätigung des Retters, um einen Schock abzugeben.

Auf dem grossen Farb-LCD kann eine EKG-Kurve angezeigt werden.

Geeignet für Ersthelfer.



AED AUTO

Beim vollautomatischen FRED easyport plus ist kein Eingreifen des Retters erforderlich. Nach der Analyse bestimmt das Gerät, ob ein Schock nötig ist. Der Schock wird gegebenenfalls automatisch abgegeben.

Auf dem grossen Farb-LCD kann eine EKG-Kurve angezeigt werden.

Geeignet für geschulte Laien.



AED MANUAL

Der manuelle FRED easyport plus sticht durch sein rotes Gehäuse hervor und erlaubt es Ärzten und Rettungssanitätern, in den manuellen Modus umzuschalten. Dank der EKG-Anzeige können medizinische Fachpersonen entscheiden, ob ein Schock nötig ist.

Geeignet für Ärzte.



SCHILLER
FRED easyport plus

00:00:04
PLUG AND APPLY ELECTRODES



ELECTRODES
FRED PA-1
RFID
ADULT



KLEIN UND LEISTUNGSFÄHIG

Der FRED easyport plus wiegt nur 780 Gramm und gibt Schocks mit bis zu 200 Joule ab. Die Multipulse Biowave-Technologie garantiert einen effizienten und sicheren Defibrillationsschock und minimiert gleichzeitig Schäden am Myokard.

KOSTBARE SEKUNDEN GEWINNEN

Die Defibrillationselektroden sind vorangeschlossen und können somit rasch auf der Brust des Patienten platziert werden. Die Rhythmus-Analyse beginnt sofort, um die Dauer bis zur Schockabgabe zu minimieren.

STETS EINSATZBEREIT

Der FRED easyport plus führt regelmässige Selbsttests durch um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt funktioniert. Der Status wird mittels blinkender Ein-/Aus-Taste angezeigt.

DATENÜBERTRAGUNG AN SEMA

Interventionsdaten können via USB oder Bluetooth übertragen werden für die Überprüfung durch medizinische Fachpersonen.

ROBUST

Mit seiner IP44-Klassifizierung ist der FRED easyport plus gegen das Eindringen von Spritzwasser geschützt.





TASCHEDEFIBRILLATOR

Der FRED easyport plus misst bloss 150 × 143 Millimeter – dieses Foto zeigt das Gerät in Originalgrösse (1:1)!

FÜR ALLE UMGEBUNGEN GEEIGNET

Der FRED easyport besitzt eine grosse LCD-Anzeige in Farbe, bei welcher die Helligkeit automatisch angepasst wird – alle Informationen sind stets auf einen Blick einsehbar.

INTUITIVER KINDERMODUS

Drücken Sie einfach diese Taste um den Patientenmodus zu ändern – keine anderen Elektroden erforderlich.

HLW-FEEDBACK

Das integrierte Metronom gibt den korrekten Rhythmus vor und führt den Benutzer während der Intervention.

Zusätzlich führt der ARGUS LifePoint-Sensor den Benutzer mit visuellen und akustischen Meldungen und garantiert damit eine effiziente Herzdruckmassage.

OPTIMIERTE BENUTZEROBERFLÄCHE

Klare Anweisungen durch drei einfache Schritte mit Illustrationen und gesprochenen Instruktionen.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit. Klassifizierung gemäss EU-Verordnung 2017/745: III; benannte Stelle: GMED CE0459; Hersteller: SCHILLER Medical; Bitte lesen Sie zuerst sorgfältig die Gebrauchsanweisung durch, bevor Sie den FRED easyport plus Defibrillator verwenden.

