

FRED EASYPORT PLUS


Petit et puissant, le défibrillateur pour tous, partout, à tout moment



FRED EASYPORT PLUS

Le compagnon idéal pour toutes interventions

FRED easyport plus, le défibrillateur de poche, trouvera sa place dans chaque sacoche de médecin et kit d'urgence. C'est le compagnon idéal lors de toutes interventions.

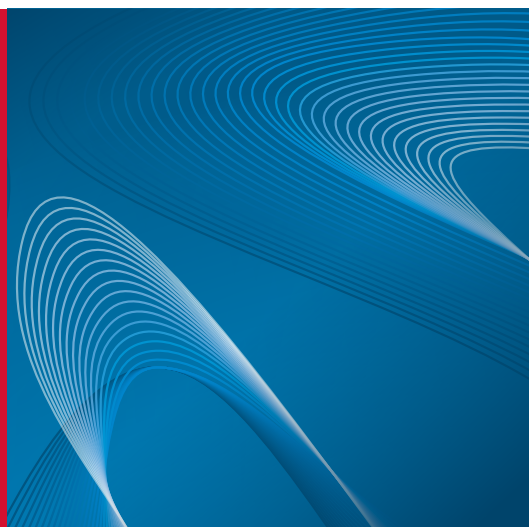

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS

Chaque année, plus de 7 millions de personnes à travers le monde sont victimes d'un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque peut toucher tout un chacun, en tout lieu et à tout moment.

La défibrillation consiste à délivrer une impulsion électrique au cœur afin de rétablir un rythme cardiaque régulier. L'utilisation d'un défibrillateur combinée à des compressions thoraciques efficaces constitue le seul traitement permettant de sauver la vie d'un patient.

FACILE À TRANSPORTER

Le défibrillateur de poche FRED easyport plus ne pèse que 780 grammes, il combine petite taille et fonctionnalités avancées.

CHOC DÈS QUE NÉCESSAIRE

Les recommandations internationales soulignent l'importance de réduire le temps de délivrance du choc.

Le FRED easyport plus dispose d'un système d'analyse rapide et charge systématiquement l'énergie requise afin que le choc puisse être délivré dès que l'appareil le recommande.

ADAPTÉ À TOUS LES UTILISATEURS

Le FRED easyport plus convient pour une utilisation intensive ou occasionnelle. Il peut fonctionner avec une batterie rechargeable ou une pile jetable. Le chargeur externe peut charger deux batteries simultanément.

AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE

La défibrillation seule n'est pas suffisante. Afin de maintenir un bon apport en oxygène aux organes, la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) est indispensable afin de restaurer un flux sanguin correct.

Le FRED easyport plus vous aide à renforcer l'efficacité du massage cardiaque:

- ❖ en donnant des instructions sur la profondeur, la fréquence et le relâchement*
- ❖ en délivrant un rythme régulier grâce au métronome

En utilisant le capteur ARGUS LifePoint, le secouriste bénéficie d'une assistance visuelle et sonore via l'affichage de messages avec des codes couleur lors des compressions thoraciques.

*Relâchement n'est pas disponible en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis



SUIVI DES INFORMATIONS

Le FRED easyport plus enregistre les données d'intervention, ce qui permet aux médecins et urgentistes d'avoir une meilleure visibilité sur l'état du patient.

- ❖ Qualité de la RCP
- ❖ Courbe ECG
- ❖ Courbe d'impédance
- ❖ Événements

RÉCUPÉRATION DES INFORMATIONS

Grâce à ses fonctions USB et Bluetooth, les fichiers enregistrés peuvent être facilement examinés et gérés par SEMA, la solution de gestion de données SCHILLER.

TROUVEZ L'APPAREIL QUI VOUS CONVIENT

Le FRED easyport plus est proposé en trois versions, adaptées aux différents niveaux d'utilisation.



DAE FIRST

Le FRED easyport plus, DAE semi-automatique de couleur gris nécessite la confirmation du secouriste pour délivrer un choc.

Une courbe ECG peut être affichée sur le grand écran LCD couleur.

Conçu pour les premiers intervenants.



DAE AUTO

La version entièrement automatique du FRED easyport plus ne demande aucune action de la part du secouriste. Après analyse du rythme cardiaque, l'appareil détermine si un choc est nécessaire. Si c'est le cas, le choc est automatiquement délivré.

Une courbe ECG peut être affichée sur le grand écran LCD couleur.

Conçu pour les intervenants formés mais non spécialisés.



DAE MANUAL

Se distinguant par sa couleur rouge, le FRED easyport plus manuel permet aux médecins et professionnels paramédicaux de délivrer un choc manuellement. Grâce à l'affichage de l'ECG, les professionnels de santé peuvent déterminer si un choc est nécessaire.

Conçu pour les médecins.



SCHILLER
FRED easyport plus

00:00:04

PLUG AND APPLY ELECTRODES

1 [Power Button]

2 [Electrode Pad]

3 [Shock Button]

ELECTRODES
FRED PA-1,
RFID
ADULT

1 [Diagram 1: Chest placement]

2 [Diagram 2: Anterior-posterior placement]

3 [Diagram 3: Anterior-lateral placement]

4 [Diagram 4: Posterior-lateral placement]

PETIT ET PUISSANT

Le FRED easyport plus ne pèse que 780 grammes et délivre des chocs jusqu'à 200 joules. La technologie Multipulse Biowave assure des chocs de défibrillation efficaces et sûrs, tout en réduisant au minimum les dommages du myocarde.

GAGNEZ DE PRÉCIEUSES SECONDES

Les électrodes de défibrillation sont préconnectées afin d'être rapidement appliquées sur la poitrine du patient. L'analyse de la fréquence cardiaque démarre immédiatement afin de réduire le délai de délivrance du choc.

TOUJOURS PRÊT

Le FRED easyport plus effectue des tests automatiques réguliers pour contrôler son bon fonctionnement. Son statut est indiqué par le bouton marche/arrêt clignotant.

TRANSMISSION DE DONNÉES À SEMA

Les données d'intervention peuvent être envoyées par interface USB ou Bluetooth afin d'être examinées par des professionnels de santé.

CONÇU POUR DURER

Classifié IP44, le FRED easyport plus résiste aux projections d'eau.





DÉFIBRILLATEUR FORMAT DE POCHE

Le FRED easyport plus mesure seulement 150 x 143 millimètres – cette photo correspond à la taille réelle (1/1)!

ADAPTÉ À TOUS LES ENVIRONNEMENTS

Le FRED easyport plus possède un grand écran LCD couleur qui ajuste automatiquement la luminosité afin de voir les indications d'un seul coup d'œil.

MODE PÉDIATRIQUE INTUITIF

En utilisant les mêmes électrodes, il suffit d'appuyer sur le bouton pour changer le type de patient.

AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE

Le métronome intégré indique le rythme correct et guide le secouriste pendant l'intervention.

Par ailleurs, le capteur ARGUS LifePoint guide le secouriste avec des signaux sonores et visuels à l'écran pour pratiquer des compressions thoraciques efficaces.

INTERFACE UTILISATEUR OPTIMISÉE

Trois étapes simples avec des illustrations et des instructions sonores pour une parfaite compréhension.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.

Classification selon le règlement (UE) 2017/745: III; organisme notifié: GMED CE0459; fabricant: SCHILLER Medical; veuillez lire la notice d'utilisation avant d'utiliser le FRED easyport plus.

