

FRED EASYPORT PLUS


Pequeño y potente desfibrilador apto para cualquier persona, momento y lugar



FRED EASYPORT PLUS

El compañero ideal para llevar consigo

FRED easyport plus, el desfibrilador de bolsillo, cabe fácilmente en el botiquín de emergencia y en el maletín del médico. Es el compañero ideal durante cualquier intervención.

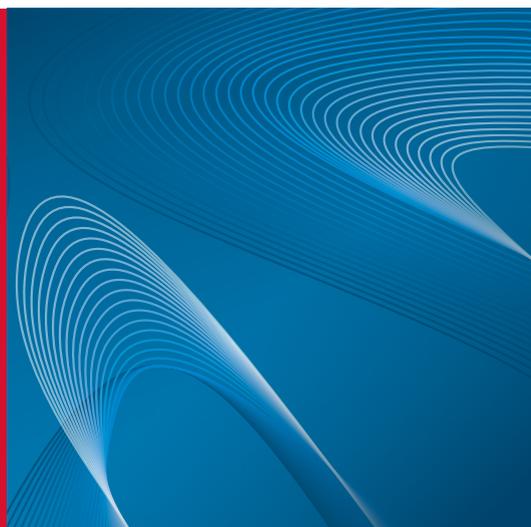

NOS AFECTA A TODOS

Cada año, más de 7 millones de personas en todo el mundo mueren debido a un paro cardíaco súbito. Cualquiera de nosotros puede sufrir un paro cardíaco súbito en cualquier momento y en cualquier lugar.

La desfibrilación consiste en aplicar energía eléctrica al corazón para restablecer un ritmo cardíaco correcto. El uso de un desfibrilador, en combinación con compresiones torácicas bien realizadas, es el único tratamiento que puede salvar la vida de un paciente.

FÁCIL DE TRANSPORTAR

Como desfibrilador de bolsillo, el FRED easyport plus solo pesa 780 gramos y combina su pequeño tamaño con grandes funcionalidades.

DESCARGA EN EL MOMENTO NECESARIO

Las guías internacionales destacan la importancia de reducir al mínimo el retraso en la administración de la descarga.

Para reducir este retraso, el FRED easyport plus tiene un sistema de análisis rápido y carga sistemáticamente la energía requerida para poder administrar la descarga en cuanto lo recomienda el aparato.

ADAPTADO A CUALQUIER USUARIO

El FRED easyport plus es adecuado tanto para usuarios frecuentes como no frecuentes. Puede funcionar con una batería recargable o una pila desechable. El cargador externo puede cargar dos baterías simultáneamente.

INFORMACIÓN DE RCP

La desfibrilación por sí sola no es suficiente. Para mantener un buen aporte de oxígeno a los órganos, la reanimación cardiopulmonar (RCP) debe realizarse correctamente con el fin de restablecer la circulación sanguínea.

El desfibrilador FRED easyport plus le ayuda a conseguir la máxima eficiencia con las compresiones torácicas:

- ❖ indicando la profundidad, frecuencia y retroceso* correctos
- ❖ marcando un ritmo regular mediante el metrónomo

Al usar el sensor ARGUS LifePoint, el responsable de primeros auxilios se beneficia de una ayuda acústica y visual a través de mensajes en pantalla codificados por colores mientras realiza las compresiones torácicas.

*El retroceso no está disponible en Francia, Alemania, Reino Unido ni Estados Unidos



SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El FRED easyport plus registra los datos de la intervención, con lo que los doctores y médicos de urgencias pueden tener una visión general más clara del estado del paciente.

- ❖ Calidad de la RCP
- ❖ Curva ECG
- ❖ Curva de impedancia
- ❖ Eventos

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Gracias a las funcionalidades de USB y Bluetooth, los archivos guardados pueden revisarse y gestionarse con facilidad en SEMA, la solución de gestión de datos de SCHILLER.

DESCUBRE EL DISPOSITIVO QUE MÁS TE CONVIENE

El FRED easyport plus está disponible en tres versiones para adaptarse a los diferentes niveles de usuario.



AED FIRST

El FRED easyport plus AED semiautomático, con su cubierta gris, requiere que el responsable de primeros auxilios confirme la administración de una descarga.

Se puede visualizar una curva ECG en la gran pantalla LCD en color.

Apto para equipos de primeros auxilios.



AED AUTO

El FRED easyport plus totalmente automático no requiere ninguna acción por parte del responsable de primeros auxilios. Después de analizar la frecuencia cardíaca, el dispositivo determina si es necesario administrar una descarga. Si es el caso, la descarga se administra automáticamente.

Se puede visualizar una curva ECG en la gran pantalla LCD en color.

Adecuado para personas capacitadas para responder a las emergencias.



AED MANUAL

Caracterizado por su cubierta roja, el FRED easyport plus manual permite a médicos y paramédicos cambiar a la cancelación manual. Gracias a la pantalla de ECG, los profesionales sanitarios pueden determinar si es necesario administrar una descarga.

Adecuado para médicos.



ELECTRODES
FRED PA-1,
FRED ABILUS Pro Life Case 1,
FRED 2, CARDIOVIT AT-101 (only)



SCHILLER
FRED easyport plus



PLUG AND APPLY ELECTRODES

00:00:04

2

3

1

RFID

4

3

2

1

PEQUEÑO Y POTENTE

El FRED easyport plus solo pesa 780 gramos y administra descargas de hasta 200 julios. La tecnología Multipulse Biowave garantiza una descarga de desfibrilación efectiva y segura mientras se reduce al mínimo el daño al miocardio.

GANAR PRECIOSOS SEGUNDOS

Los electrodos de desfibrilación están preconectados para conseguir una rápida aplicación al pecho del paciente. El análisis de la frecuencia cardíaca comienza inmediatamente para reducir el tiempo hasta que se administra la descarga.

SIEMPRE PREPARADO

El FRED easyport plus realiza autocomprobaciones automáticas regulares para asegurarse de su correcto funcionamiento. Su estado se indica mediante el botón de encendido/apagado intermitente.

TRANSMISIÓN DE DATOS A SEMA

Los datos de la intervención pueden enviarse por USB o Bluetooth para que los revisen los profesionales sanitarios.

DISEÑO PARA DURAR

Con clasificación IP44, el desfibrilador FRED easyport plus es resistente a las salpicaduras del agua.





DESFIBRILADOR DE BOLSILLO

El FRED easyport plus solo mide 150 x 143 milímetros; la fotografía muestra su tamaño original (1:1).

ADECUADO PARA TODOS LOS ENTORNOS

El FRED easyport plus tiene una gran pantalla LCD en color que ajusta automáticamente su brillo para ayudar a visualizar de un vistazo las indicaciones.

MODO PEDIÁTRICO INTUITIVO

Como se utilizan los mismos electrodos, basta con pulsar este botón para cambiar el modo de paciente.

INFORMACIÓN DE RCP

El metrónomo integrado establece el ritmo correcto y guía al responsable de primeros auxilios durante la intervención.

Además, el sensor ARGUS LifePoint ayuda al responsable de primeros auxilios con ayudas acústicas y visuales en pantalla para garantizar compresiones torácicas efectivas.

INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADA

Tres sencillos pasos con ilustraciones e instrucciones de voz fáciles de entender.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño, las especificaciones y las características mostradas, o a suspender la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación. Las imágenes pueden ser representativas. Algunos productos pueden no estar autorizados por la normativa o no estar a la venta en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de SCHILLER para obtener la información y la disponibilidad más actuales.
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745: III; Organismo notificado: GMED CE0459; Fabricante: SCHILLER Medical; Lea atentamente la guía de usuario antes de usar el FRED easyport plus.

