

FRED EASYPORT PLUS


Defibrillatore compatto e potente per chiunque, in qualsiasi momento e ovunque



FRED EASYPORT PLUS

Il compagno di viaggio ideale

FRED easyport plus, il defibrillatore tascabile, si inserisce facilmente nella borsa di ogni medico e nel kit di emergenza. È il compagno ideale per ogni intervento.

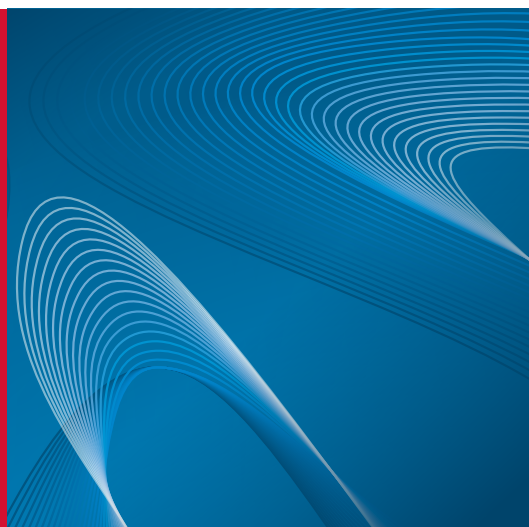

UNA QUESTIONE CHE CI RIGUARDA TUTTI

Sono oltre 7 milioni le persone colpite ogni anno da arresto cardiaco improvviso, in tutto il mondo. L'arresto cardiaco improvviso può colpire chiunque, in qualsiasi luogo e in qualunque momento.

La defibrillazione eroga energia elettrica al cuore, ristabilendo un ritmo cardiaco appropriato. L'uso di un defibrillatore in combinazione con compressioni toraciche correttamente eseguite rappresenta l'unica terapia in grado di salvare la vita di un paziente.

FACILE DA TRASPORTARE

Come defibrillatore tascabile, FRED easyport plus pesa solo 780 grammi e combina le piccole dimensioni con grandi funzionalità.

EROGARE LA SCARICA NON APPENA NECESSARIO

Le linee guida internazionali sottolineano l'importanza di ridurre al minimo il ritardo dell'erogazione delle scariche. Per ridurre questo ritardo, FRED easyport plus dispone di un sistema di analisi rapida e carica sistematicamente l'energia necessaria in modo che la scarica possa essere erogata non appena il dispositivo la raccomanda.

ADATTATO A QUALSIASI UTENTE

FRED easyport plus è adatto sia per utenti abituali che per utenti occasionali. Può essere utilizzato con una batteria ricaricabile o monouso. Il caricabatterie esterno può caricare due batterie contemporaneamente.

FEEDBACK PER CPR

La sola defibrillazione non è sufficiente. Per mantenere un buon afflusso di ossigeno agli organi, la rianimazione cardiopolmonare (CPR) deve essere effettuata correttamente per ripristinare un corretto flusso ematico.

FRED easyport plus aiuta l'utilizzatore a eseguire le compressioni toraciche con la massima efficienza:

- ❖ indicando la corretta profondità, frequenza e l'indietreggiamento*
- ❖ impostando un ritmo regolare mediante il metronomo

Quando si utilizza il sensore ARGUS LifePoint, il soccorritore beneficia di un'assistenza vocale e visiva attraverso messaggi a colori visualizzati sullo schermo durante l'esecuzione delle compressioni toraciche.

*Indietreggiamento non disponibile in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti



TRACKING DELLE INFORMAZIONI

FRED easyport plus registra i dati degli interventi, consentendo al personale medico e ai medici di emergenza di ottenere una panoramica migliore della situazione del paziente.

- ❖ Qualità della CPR
- ❖ Curva ECG
- ❖ Curva impedenza
- ❖ Eventi

RECUPERO DELLE INFORMAZIONI

Grazie alle funzionalità USB e Bluetooth, i file salvati possono essere facilmente rivisti e gestiti nel SEMA, la soluzione di gestione dati di SCHILLER.

UN DISPOSITIVO PER OGNI ESIGENZA

FRED easyport plus è disponibile in tre versioni adatte ai diversi livelli di utenza.



AED FIRST

Il FRED easyport plus semiautomatico con l'involucro grigio richiede la conferma del soccorritore per dare una scarica.

Una curva ECG può essere visualizzata sull'ampio display LCD a colori.

Adatto per i primi soccorritori.



AED AUTO

Il FRED easyport plus completamente automatico non richiede alcuna azione da parte del soccorritore. Dopo l'analisi della frequenza cardiaca, il dispositivo determina se è necessario erogare una scarica. In tal caso, la scarica viene erogata automaticamente.

Una curva ECG può essere visualizzata sull'ampio display LCD a colori.

Adatto per soccorritori laici addestrati.



AED MANUAL

Distinguendosi per il suo involucro rosso, il FRED easyport plus manuale permette a medici e paramedici di passare alla modalità manuale.

Grazie alla visualizzazione dell'ECG, gli operatori sanitari possono determinare se è necessario erogare una scarica.

Adatto ai medici.



SCHILLER
FRED easyport plus

1 

00:00:04  

PLUG AND APPLY ELECTRODES

2 

3 

ELECTRODES
FRED PA-1,
RFID
ADULT

1 

2 

3 

4 

COMPATTO E POTENTE

Il FRED easyport plus pesa solo 780 grammi ed eroga scariche fino a 200 joule. La tecnologia Multipulse Biowave assicura una scarica di defibrillazione efficace e sicura riducendo al minimo i danni al miocardio.

GUADAGNARE SECONDI PREZIOSI

Gli elettrodi di defibrillazione sono pre-collegati per una rapida applicazione sul torace del paziente. L'analisi della frequenza cardiaca inizia immediatamente, riducendo così il tempo fino all'erogazione della scarica.

SEMPRE PRONTO

Il FRED easyport plus esegue regolarmente e automaticamente dei test di autocontrollo per verificare che funzioni correttamente. Il suo stato è indicato dal pulsante on/off lampeggiante.

TRASMISSIONE DATI AL SEMA

I dati degli interventi possono essere inviati tramite USB o Bluetooth per la revisione da parte degli operatori sanitari.

PROGETTATO PER DURARE

Classificato IP44, il FRED easyport plus resiste all'ingresso di spruzzi d'acqua.





DEFIBRILLATORE TASCABILE

Il FRED easyport plus misura solo 150 x 143 millimetri: questa foto mostra le sue dimensioni originali (1:1)!

ADATTO A TUTTI GLI AMBIENTI

Il FRED easyport plus è dotato di un ampio display LCD a colori che regola automaticamente la luminosità per facilitare la visualizzazione delle indicazioni a colpo d'occhio.

MODALITÀ PEDIATRICA INTUITIVA

Mentre si utilizzano gli stessi elettrodi, basta premere questo pulsante per cambiare la modalità paziente.

FEEDBACK PER CPR

Il metronomo integrato imposta il ritmo corretto e guida il soccorritore durante l'intervento.

Inoltre, il sensore ARGUS LifePoint assiste il soccorritore con indicazioni vocali e visive sullo schermo per garantire compressioni toraciche efficaci.

INTERFACCIA UTENTE OTTIMIZZATA

Tre semplici passi con illustrazioni e istruzioni vocali per una chiara comprensione.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo.
Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.
Classificazione in conformità al Regolamento (UE) 2017/745: III; organismo notificato: GMED CE0459; produttore: SCHILLER Medical; leggere la guida utente prima di utilizzare FRED easyport plus.

