

SEMA

El sistema de gestión de datos de SCHILLER:
Gestione, analice y guarde registros en pocos clics.




SCHILLER
The Art of Diagnostics

SEMA

Sistema de gestión de datos SEMA de SCHILLER:

- ✦ Gestione, analice y guarde los datos recopilados con los equipos de SCHILLER conectados
- ✦ Flujo de trabajo de análisis de datos totalmente personalizable
- ✦ Apto tanto para consultas médicas como para los entornos hospitalarios más complejos

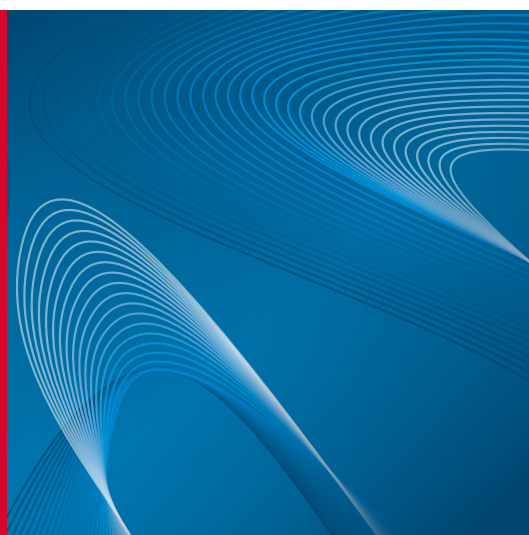

Obtenga una segunda opinión en el menor tiempo posible con SEMA Liberty Mobile.

EFICIENCIA CLÍNICA

El sistema de gestión de datos SEMA permite al usuario gestionar, analizar y guardar registros obtenidos con equipos de SCHILLER en pocos clics.

SEMA está diseñado para agilizar los procesos de trabajo gracias a herramientas avanzadas, por ejemplo, bandeja de entrada (lista de registros actualizada continuamente), edición por lotes y criterios de búsqueda definidos por el usuario.

REVISIÓN DE ECG EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR

El portal web protegido mediante contraseña SEMA Liberty Mobile permite revisar datos de forma remota desde una tablet o un smartphone para todos los tipos de registro.

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN

- ✦ El diseño de las pantallas y los flujos de trabajo se puede adaptar fácilmente a las necesidades particulares de cada usuario.
- ✦ Plantillas de interpretación, acrónimos e informes definidos por el usuario.
- ✦ El idioma preferido se puede configurar por lugar de trabajo.
- ✦ Cada usuario puede guardar su propia vista de inicio y sus filtros de búsqueda.
- ✦ SEMA Office ofrece hasta 20 licencias para puestos de trabajo, mientras que SEMA Enterprise ofrece un número ilimitado de licencias posibles para puestos de trabajo.

CONECTIVIDAD DE SCHILLER

El sistema SEMA incluye SCHILLER Server y el cliente SEMA instalado en un PC. Los registros se guardan en la base de datos de SCHILLER Server y es posible acceder a ellos para consultarlos desde un cliente SEMA. Los usuarios y los privilegios de usuario se definen en SCHILLER Server.

DATOS PROTEGIDOS

Puede confiar en la seguridad de los datos de sus pacientes: con el inicio de sesión basado en roles y la autenticación LDAP, el acceso a los datos de los pacientes está controlado rigurosamente.

ECG REPOSO Y RITMO REPOSO

En SEMA se pueden medir, analizar y guardar los registros de ECG reposo y ritmo reposo de los equipos de SCHILLER. La función ECG Framer permite extraer ECG de 10 segundos de registros de ritmo reposo, analizarlos y enviarlos a sistemas de terceros.



ECG ESFUERZO Y CPET

Es posible finalizar los informes de pruebas de esfuerzo en el puesto de adquisición o, más cómodamente, en un puesto de trabajo SEMA, desde donde puede verse la prueba completa en formato editable para el análisis y la elaboración de informes. La CPET también se puede revisar y editar con SEMA/LFX.



ECG HOLTER Y ABPM

Una vez analizados los registros en el software específico DARWIN2, los informes se enviarán a SEMA, donde pueden consultarse y guardarse con los demás registros.



NEUMOLOGÍA

Los resultados neurológicos obtenidos con equipos GANSHORN se pueden transmitir y guardar en SEMA para su revisión.



ESPIROMETRÍA

Los resultados de las pruebas de función pulmonar se pueden transmitir y guardar en SEMA para su revisión.





HIS/PACS/EMR

SEMA se comunica en ambas direcciones con sistemas PACS, HIS y EMR a través de SCHILLER Server. Los registros analizados y guardados se pueden exportar a sistemas de terceros en formato DICOM, HL7 y PDF. También es posible importar informes de fabricantes externos.



PRIMEROS AUXILIOS

Desde un simple AED hasta un monitor multiparamétrico, los datos de intervención registrados con todos los productos de la gama de emergencia y rescate de SCHILLER pueden visualizarse en SEMA.

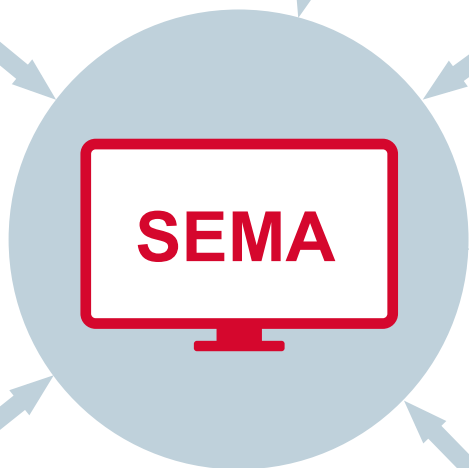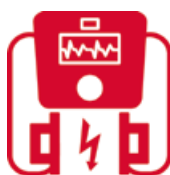



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño, las especificaciones y las características mostradas, o a suspender la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación. Las imágenes pueden ser representativas. Algunos productos pueden no estar autorizados por la normativa o no estar a la venta en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de SCHILLER para obtener la información y la disponibilidad más actuales.

