

SEMA

Sistema di gestione dei dati SCHILLER:
Gestione, analisi e memorizzazione con pochi click




SCHILLER
The Art of Diagnostics

SEMA

Sistema di gestione dei dati SEMA di SCHILLER:

- ✧ Gestione, analisi e memorizzazione dei dati acquisiti mediante dispositivi SCHILLER collegati
- ✧ Flusso di lavoro per l'analisi dei dati completamente personalizzabile
- ✧ Dallo studio medico fino ai più complessi ambienti ospedalieri

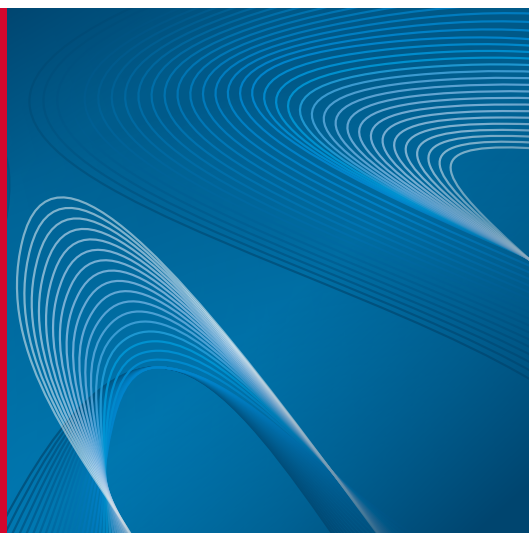

Ottenere un secondo parere nel più breve tempo possibile con SEMA Liberty Mobile.

EFFICIENZA CLINICA

Il sistema di gestione dei dati SEMA consente all'utente di gestire, analizzare e memorizzare registrazioni acquisite dai dispositivi SCHILLER collegati con pochi click.

SEMA è progettato per accelerare i processi di lavoro grazie a strumenti avanzati come l'inbox (lista di registrazione continuamente aggiornata), modifica in batch e criteri di ricerca definiti dall'utente.

REVISIONE DEGLI ECC OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO

Il portale web SEMA Liberty Mobile protetto da password consente la revisione dei dati in remoto tramite tablet o smartphone per tutti i tipi di registrazione.

PERSONALIZZABILE

- ✧ Facile adattamento dei layout delle schermate e dei flussi di lavoro alle esigenze di ogni utente.
- ✧ Modelli di interpretazione, acronimi e referti definiti dall'utente.
- ✧ La lingua preferita può essere impostata per ogni postazione di lavoro.
- ✧ Ogni utente può salvare la vista iniziale e i filtri di ricerca personalizzati.
- ✧ SEMA Office fornisce fino a 20 licenze per stazioni di lavoro in contemporanea mentre SEMA Enterprise consente un numero illimitato di licenze contemporanee.

CONNETTIVITÀ SCHILLER

Il sistema SEMA comprende SCHILLER Server e il client SEMA installato su un PC. Le registrazioni vengono memorizzate nel database SCHILLER Server e visualizzate su un client SEMA. Gli utenti e i privilegi per gli utenti sono definiti su SCHILLER Server.

DATI PROTETTI

Gestione sicura dei dati dei vostri pazienti: con l'accesso degli utenti basato sui ruoli e l'autenticazione LDAP, l'accesso ai dati paziente è rigorosamente controllato.

ECG A RIPOSO E RITMO A RIPOSO

Le registrazioni ECG a riposo e ritmo a riposo dei dispositivi SCHILLER possono essere misurati, analizzati e memorizzati in SEMA e inviate a un sistema di terze parti. Con la funzione ECG Framer è possibile estrarre ECG di 10 secondi da una registrazione ritmo a riposo, analizzarla e trasmetterla a un sistema di terze parti.



ECG DA SFORZO E CPET

I rapporti dei test da sforzo possono essere finalizzati nella stazione di acquisizione o comodamente in SEMA Workstation, dove il test completo è disponibile per l'analisi e la creazione di rapporti in formato modificabile. CPET può anche essere rivisto e modificato con SEMA/LFX.



ECG HOLTER E ABPM

Non appena le registrazioni sono state analizzate nel software dedicato DARWIN2, i rapporti vengono inviati a SEMA dove possono essere visualizzati e memorizzati con le altre registrazioni.



PNEUMOLOGIA

I risultati dei test polmonari, acquisiti con dispositivi GANSHORN, possono essere trasmessi e memorizzati in SEMA per la revisione.




SPIROMETRIA

I risultati dei test delle funzionalità polmonari possono essere trasmessi e memorizzati in SEMA per la revisione.




SOCCORSO

Dal semplice AED al monitor multiparametrico, i dati di intervento registrati con i prodotti dell'intera linea di emergenza e soccorso SCHILLER possono essere visualizzati in SEMA.

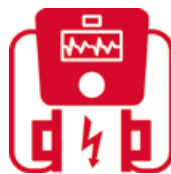

HIS/PACS/EMR

SEMA comunica in modo bidirezionale mediante SCHILLER Server con i sistemi PACS, HIS, ed EMR. Le registrazioni analizzate e memorizzate possono essere esportate in formato DICOM, HL7 e PDF in sistemi di terze parti. È anche possibile importare referti da produttori di terze parti.

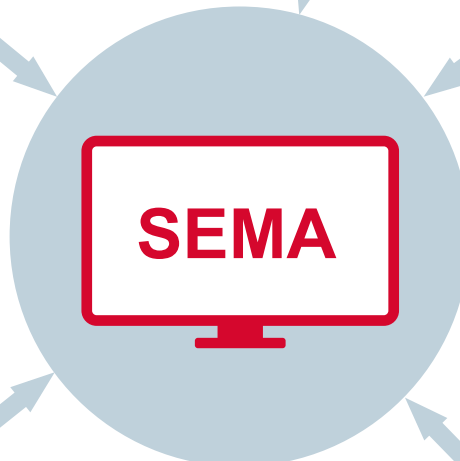



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.

