



DEFIGARD 5000

Die neue Vision in der klinischen Defibrillation

Der DEFIGARD 5000 vereint die Effizienz von gepulster biphasischer Defibrillation (*MULTIPULSE BIOWAVE*®) mit Präzisionsmessung und verfügt ausserdem über das grösste Farbdisplay auf dem Markt.



SCHILLER
The Art of Diagnostics

DEFIGARD 5000

Monitor und Defibrillator

Die Größe des Farbdisplays (10,4 Zoll) erlaubt die gleichzeitige Darstellung von bis zu 12 EKG-Ableitungen. Die Bedienung ist denkbar einfach – alle Parameter und Menüs können über den Navigationsknopf und die Funktionstasten direkt aufgerufen werden. Dank AED (halbautomatischer Defibrillator) und manuellem Modus ist der DEFIGARD 5000 das perfekte Gerät im Falle eines Herzstillstandes:

- Verwendung von Klebeelektroden, Paddles oder Löffeln
- Externer Herzschrittmacher und Überwachungsfunktionen wie EKG, SpO₂ (Masimo), CO₂ (IRMA) und NIBD ermöglichen die fortlaufende Betreuung und Überwachung des Patienten.



Zahlreiche hochstehende Funktionen

Defibrillation mit der *MULTIPULSE BIOWAVE*[®]-Technologie, die mit einer viel tieferen Defibrillationsenergie arbeitet. Dank fortschrittlichem Erkennungssystem für Kassetten und Klebeelektroden ist ein schneller Wechsel zwischen den unterschiedlichen Defibrillationsmodi möglich: Klebeelektroden, Paddles und Löffel.

- AED-Modus mit Klebeelektroden: Konfigurierbar auf 2 bis 200 J (Erwachsene) bzw. 2 bis 70 J (Kinder); automatische Erkennung von Kinderelektroden und Anpassung der Energie. Der Benutzer wird mit Sprach- und Textmeldungen durch den Defibrillationsablauf geführt.
- Manueller Modus mit Paddles oder Klebeelektroden, Wahl der Energie zwischen 2 und 200 J.
- Interne Defibrillation mit 2 bis 30 J.

DEFIGARD 5000



Herzschrittmacher (Option):

- Betriebsarten Fix, Demand und Overdrive (Frequenz x3)
- Einstellungen werden gespeichert (Strom und Frequenz) damit die Stimulation bei Bedarf rasch wieder aufgenommen werden kann

Monitor

- Grosses LCD-Farbdisplay (10,4 Zoll)
- Anzeige: AED-Anweisungen, Vermessungen und Kurven für SpO₂, CO₂, NIBD und bis zu 12 EKG-Ableitungen

Drucker (Option):

- 3-Kanal-Drucker
- Automatischer oder manueller Ausdruck von Kurven, Vermessungen, Ereignissen, Trends und Alarmen


Datenaufzeichnung

- Interner Speicher für 3 Stunden EKG-Daten oder 500 Ereignisse im AED-Modus sowie 24 Stunden Trenddaten für sämtliche Parameter in grafischer und tabellarischer Form
- USB-Anschluss für die Übertragung von AED-Daten


Übermittlung

- Übermittlung eines 12-Kanal-EKGs via GSM oder Standard-Modem (Option)
- Ethernet- oder USB-Anschluss für Software-Aktualisierungen

Simultane Anzeige von 12 EKG-Ableitungen

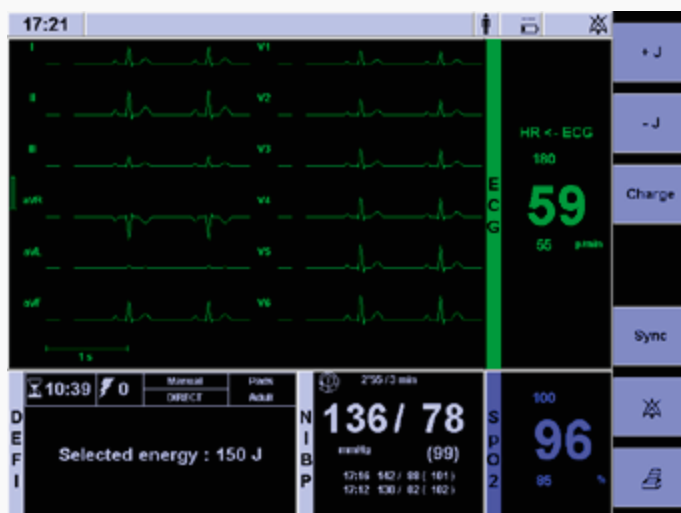

Capnometrie

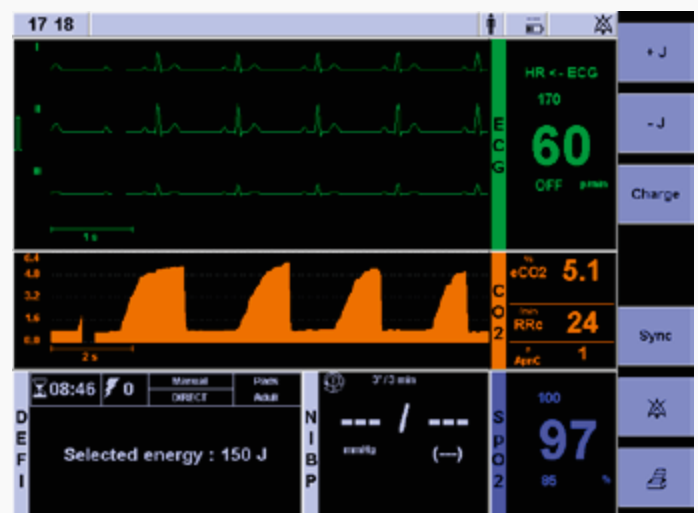



CE 0459



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-10-84565453
info@schillermedical.com
www.schillermedical.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerz.hr
www.schiller.ch



Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch




Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Article no.: 2.500427 03/14, DE

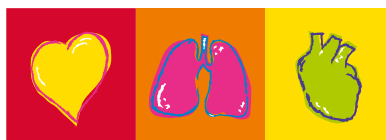

SCHILLER
The Art of Diagnostics