

EASY PULSE®

Système de massage automatisé (RCP)
compact et efficace 3,5 kg de technologie


RCP automatique de
dernière génération



SCHILLER
The Art of Diagnostics

EASY PULSE®

SCHILLER a franchi un nouveau pas dans l'amélioration de la RCP avec l'introduction du plus petit et plus léger compresseur cardiaque externe: l'EASY PULSE.

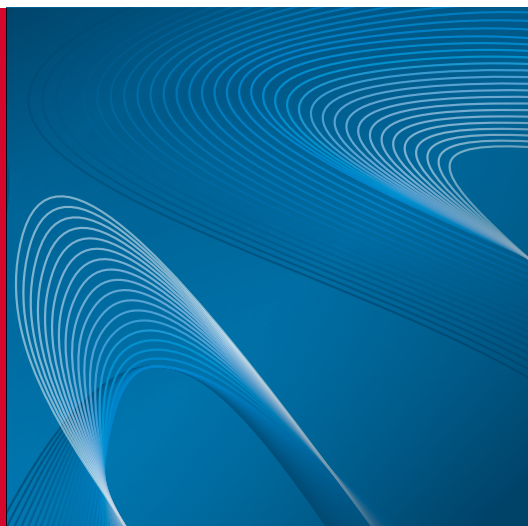

Il est difficile de réaliser correctement des compressions thoraciques manuelles sur une période prolongée. Non seulement ce geste nécessite une grande force physique, mais il faut aussi pouvoir effectuer d'autres tâches simultanément, comme surveiller les signes vitaux du patient.

L'EASY PULSE de SCHILLER est la réponse à une réanimation plus efficace: cet appareil de transport autonome effectue des compressions automatiques de fréquence et profondeur constantes. Il est directement fixé sur le torse du patient et peut donc être utilisé en toute situation, indépendamment des conditions ambiantes. Particulièrement lors du transport, il est possible d'assurer un massage cardiaque de haute qualité, sans interruption.

L'EASY PULSE est si simple à utiliser qu'une seule personne suffit. Sa petite taille et sa légèreté sont sans pareil: l'EASY PULSE pèse moins de 3,5 kg et offre ainsi de toutes nouvelles possibilités, notamment aux services de secours aérien.

APPAREILS DE RÉANIMATION AUTOMATIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

L'EASY PULSE est doté d'un système unique de compression permettant d'effectuer des compressions 3D, assurant ainsi un maximum d'efficacité.

Le poids de l'appareil étant réparti également sur le socle de l'appareil et non sur un point unique, il n'exerce aucune influence sur les compressions thoraciques ni sur la ré-expansion thoracique.



PLANCHE DORSALE

La planche dorsale permet de préparer aisément le patient au massage cardiaque mécanique. Le système de fixation pratique permet également de positionner l'appareil très rapidement – une personne formée mettra moins de 15 secondes.



CHARGEUR

L'EASY PULSE est alimenté par batterie rechargeable (autonomie d'environ 45 minutes). La batterie peut être rechargée au moyen d'un chargeur double (en moins de 2 heures) ou de la fonction turbo (en moins de 50 minutes).



SIMPLICITÉ D'UTILISATION

En situation d'urgence, chaque geste doit être le bon. Le fonctionnement de l'EASY PULSE est simple et intuitif: il suffit d'appuyer sur les deux touches pour immédiatement initier la réanimation.



ALIMENTATION EXTERNE ET CÂBLE DE CONNEXION DIRECT

Un bloc d'alimentation pour une tension d'entrée de 100 VCA à 240 VCA est fourni. L'EASY PULSE peut être raccordé directement à une source d'alimentation de 12 VCC - 24 VCC via un câble de connexion prévu à cet effet.

CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES

Léger

- ❖ Appareil de réanimation électrique incroyablement petit et léger, pesant seulement 3.5 kg.
- ❖ Idéal pour les interventions dans les environnements confinés

Complet

- ❖ Compressions thoraciques multidirectionnelles (3D)
- ❖ Compressions thoraciques de haute qualité: la fréquence et la profondeur restent constantes, ce que ne permettent pas des compressions pratiquées manuellement
- ❖ Cycle compression/ventilation avec un rapport de 30:2 possible

Simple

- ❖ Grâce à la planche dorsale et à la sangle de fixation, il peut être facilement fixé au torse du patient
- ❖ Mise en œuvre simple et rapide

Atouts supplémentaires

- ❖ Batterie amovible avec indicateur du niveau de charge
- ❖ Autonomie de 45 minutes (avec une seule batterie)
- ❖ Connexions: entrée CC externe, USB



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

